

dentoil[®]

PREMIUM

dentoil[®]

PREMIUM

dentoil[®]

PREMIUM

CZ DENTOIL – vysoce účinný mazací a čistící olej pro každodenní údržbu všech typů dentálních rotačních nástrojů. Je bez chuti a zápachu, netoxický, nelepějící, s antioxydačními účinky. **POUŽITÍ:** Aplikujte denně před prvním a po posledním použití nástroje, rovněž před každou sterilizací, a to po dobu 2-3 vteřin. Prebytečný olej setřete. **UPOZORNĚNÍ:** Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztříšnit. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropíchejte nebo nespálujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah/obal předáním do sběrného dvora jako nebezpečný odpad. Spotřebujte do data uvedeného na dně nádoby.

GB DENTOIL – highly effective lubricating and cleaning oil for daily maintenance of all types of dental handpieces. It is tasteless, odourless, non-toxic, non-caustic, with antioxidant effects. **APPLICATION:** Apply daily before the first and after the last use of the handpiece, also before each sterilization, for 2-3 seconds. Wipe off the oil surplus. **CAUTION:** Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C. Keep out of reach of children. Dispose of the packaging within an organized refuse collection. Expiration date is indicated on the bottom of the container.

RU DENTOIL – высокодейственное масло для ежедневной смазки и чистки всех типов стоматологических наконечников, без вкуса и запаха, нетоксическое, неедкое, с противокислотным воздействием. **ПРИМЕНЕНИЕ:** Применять ежедневно перед первым началом и по окончании работы с инструментом, а также перед каждой стерилизацией в течении 2-3 сек. Лишнее масло на поверхности вытереть. **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Чрезвычайно воспламеняемый аэрозоль. Флакон под давлением: возможен взрыв при нагреве. Хранить вне воздействия высокой температуры, вдали от горячих поверхностей, искр, открытого огня и иных источников возгорания. Не курить. Не подвергать воздействию температур выше 50°C/122°F. Не распылять у открытого огня или иных источников воспламенения. Не прокалывать или сжигать даже после использования. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Хранить в местах, недоступных для детей. **СРОК ГОДНОСТИ:** Дата окончания срока годности указана на дне флакона изделия.


SLOŽENÍ/INGREDIENTS/СОСТАВ: Paraffinum liquidum, Isobutane, Propane, Butane

Vysoce účinný
mazací a čistící olej pro dentální
rotační nástroje

Highly effective
lubricating and cleaning oil
for daily maintenance of dental
handpieces

Высокодейственное
масло для ежедневной
смазки и чистки всех
типов стоматологических
наконечников

e 500 ml

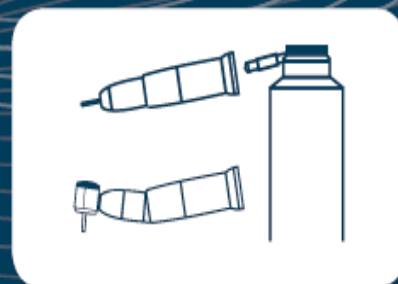

e 500 ml 650 3 PC⁺
A980



Nebezpečí
Danger
Опасность



Stomadent SK s.r.o.
Lackovce 300, Humenné, Slovakia
www.stomadent.sk