

Umění nabarvit keramiku



*initial*TM
Painting Solutions

Lustre Pastes NF
Spectrum Stains

CC


Dobarvujte estetické náhrady s Initial™ od GC

GC nabízí uživatelům Initial nejmodernější a vysoce estetická řešení pro keramiku, kterou lze dobarvovat. V závislosti na konkrétním případě a požadovaných vlastnostech poskytnou dvě produktové řady, Initial Lustre Pastes NF a Initial Spectrum Stains, očekávaný výsledek. Jsou vhodné pro celou řadu CTE, takže můžete pracovat s kompletní keramickou řadou GC Initial a téměř se všemi typy jiné keramiky.

Initial Lustre Pastes NF, jedinečné trojrozměrné dobarvovací pasty na keramiku od GC, dodávají vaší práci na hloubce a autenticitě... a to pouhým dobarvením. K dosažení nepřekonatelné životnosti a přirozeného lesku všech vašich dostaveb už není potřeba složité vrstvení nebo vypalovací cykly navíc.

Initial Spectrum Stains poskytují dvourozměrné dobarvovací efekty a lze jich použít jak k vnitřnímu, tak vnějšímu barvení. Díky nim dosáhnete velmi vytříbeného konečného výsledku s lesklým povrchem, přičemž textura zůstane zachována.

Oba produkty se vzájemně doplňují. V některých případech se používají oba: například Spectrum Stains lze přidat k Lustre Pastes NF nebo jednotlivým keramickým práškům.

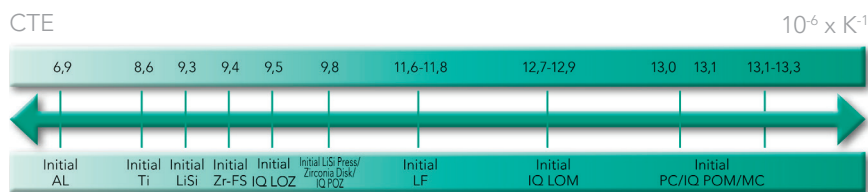

Kompatibilita s keramickou řadou Initial






Lustre Pastes NF V odstíny

S odstíny „Body A-D“ lze požadovaných V odstínů docílit velmi snadno během okamžiku. Za pomoci dalších dostupných odstínů můžete náhrady dále individualizovat, a dosáhnout tak dokonale přizpůsobeného konečného výsledku.



Lustre Pastes NF - dásňové odstíny

Dásňové odstíny vycházejí z pečlivého výběru keramických částicek růžové barvy bez fluorescence, které dokonale napodobují vzhled přirozených dásní. Snadno lze dosáhnout přirozeného přechodu od krčku korunky k dásni.

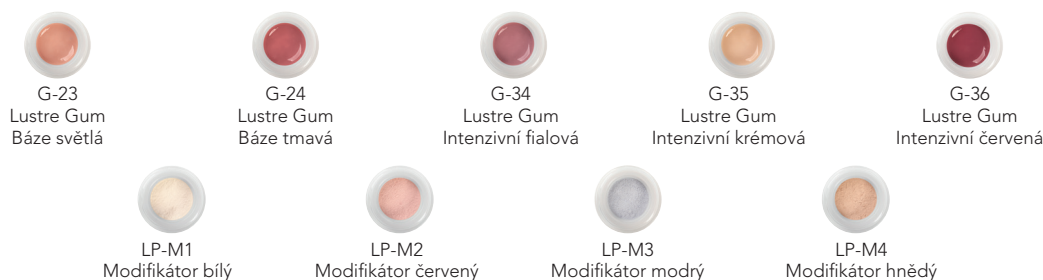


Spectrum Stains

Barvy a glazury v odstínu zubů jsou vyvinuty pro vnější barvení a glazování keramických materiálů a vnitřní individualizaci vrstvené keramiky. Barvy keramiky Initial Spectrum Stains jsou kompatibilní s širokou řadou CTE a jsou dokonale přizpůsobené, aby vyhovovaly téměř všem typům dentální keramiky. Zejména jsou přizpůsobeny estetickému barevnému konceptu keramiky Initial.

Initial Spectrum Stains jsou práškové barvy dostupné v 16 odstínech, které zvyšují estetiku vašich náhrad.

Bez ohledu na způsob vrstvení docílíte velmi hezkého konečného výsledku, kdy je zachována textura povrchu a zajištěna optimální úroveň lesku.

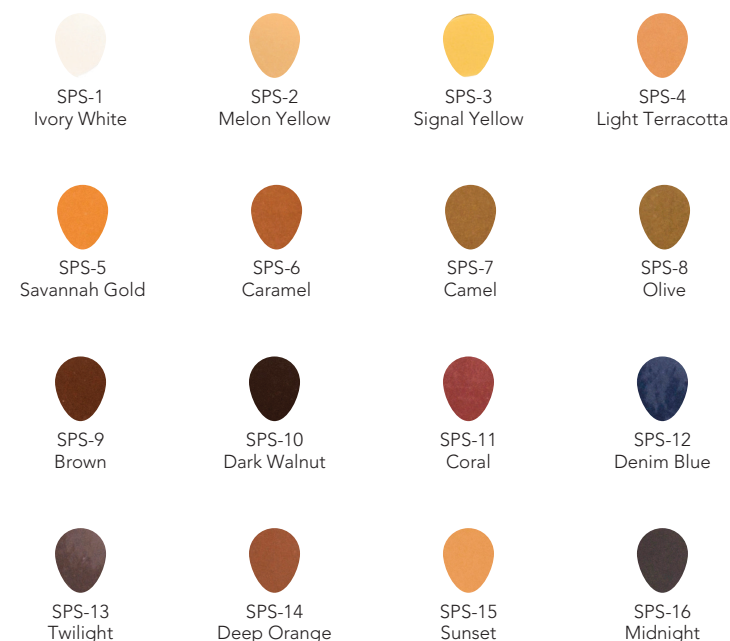

Krásná hloubka s Initial Lustre Pastes NF

Dokonalé dokončení vašich náhrad

K dosažení nepřekonatelné živosti a přirozeného lesku všech vašich dostaveb již nepotřebujete složité vrstvení nebo vypalovací cykly navíc. S pastami Initial Lustre Pastes NF můžete dosáhnout hloubky barev a reálně působícího efektu translucence... pouhým barvením.

Initial Lustre Pastes NF jsou založeny na speciální směsi jemných keramických částíček. Kroky k dokončení vaší práce zůstávají stejné bez ohledu na techniku použitou k vytvoření základu. Použitím ředící tekutiny zachováte optimální konzistenci až do konce.

Požadovaný V odstín vytvoříte nanesením Lustre Pastes NF „Body A-D“. Tento postup zahrnuje vše potřebné k okamžitému vytvoření V odstínů.

Pro lepší charakterizaci jednoduše použijte další dostupné barvy k vytvoření vysoce estetických výsledků.



Výchozí stav



Nanášení LP Neutral



Nanášení odstínů Body



Konečná náhrada
vykazující barvu a lesk

Snadné úpravy

S pastami Initial Lustre Pastes NF můžete své práce snadno upravovat.

Změnit barvu, jas, šedou světelnost nebo přidat povrchový lesk nikdy nebylo tak snadné!



Jas



Barva



Šedá hloubka



„Díky nabarvení
keramiky
můžete ztvárnit
i ty nejjemnější
detaily“.







Dodejte svým monolitickým dostavbám charakter...

Jedinečná konzistence zajišťuje stejnorodé úpravy i vzhled. Požadované textury / hladkosti vrstvy Lustre Pastes NF lze docílit jemnou vibrací nebo kondenzací dostavby. Není potřeba žádného složitého vrstvení nebo vypalovacích cyklů navíc; je to rychlé, snadné a bezpečné. Pasty jsou připravené k použití a mají jemné tixotropní vlastnosti pro snadné a přesné nanášení.



Plně anatomické konstrukce z lithium disilikátu jako LiSi Press lze individualizovat pomocí Lustre Pastes NF.

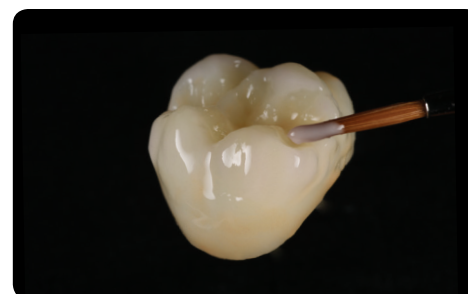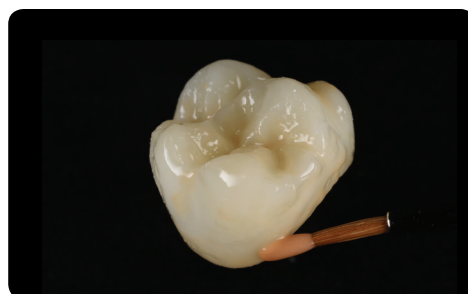

Hledáte způsob, jak dodat život svým zirkonovým monolitickým náhradám zhotoveným pomocí CAD/CAM, jako např. Initial Zirconia Disk? Lustre Pastes NF nabízejí řešení pro všechny druhy náhrad.



Se systémy GC Initial IQ - One Body, Press-over-Metal nebo Press-over-Zircon lze dodat na charakteristice a lesku během jediného vypalovacího cyklu.





...nebo je využijte pro hloubkové efekty uvnitř vrstvení.



Cut back



Nanášení Lustre Pastes NF (+vypalování)



Nanášení opálových / incizních hmot (+vypalování)



Konečný výsledek

Dosáhněte těch nejlepších estetických výsledků díky pastám Initial Lustre Pastes NF s technikou cut-back u lisovaných nebo vrstvených prací. Po nabarvení pomocí Lustre Pastes NF dokončíte náhradu příslušnými fazetovacími keramickými materiály GC Initial: CL-F pro vysokou translucenci a opálové a sklovinné hmoty pro incizní efekty.





Dobarvěte své červené a bílé estetické náhrady...

Dvě sady, jeden přístup.



Výchozí stav



Nanášení různých dásňových odstínů Initial Lustre Pastes NF Gum Shades



Charakterizace pomocí V odstínů



Konečný výsledek





...s přirozeně vypadajícími přechody, a to i na zirkoniových konstrukcích.



Vzhledem k narůstající oblibě zirkoniových náhrad a dostaveb zhotovených pomocí CAD/CAM nabízí GC řešení k zachování stejných estetických standardů. S Lustre Paste NF budou vaše monolitické dostavby vypadat přirozeně a plně života. Jejich unikátní složení umožňuje větší interakci se základním keramickým materiálem a opticky působí jako vrstvená keramika. Díky tomu se zvyšuje trojrozměrný efekt vaší náhrady. V jednoduchosti se skrývá krása!





Rozšiřte své možnosti dobarvení o Initial Spectrum Stains


Initial Spectrum Stains obsahují pigmenty, které jsou sintrované uvnitř skelné matrice, nabízejí stabilitu a umožňují reprodukovatelné a stejné výsledky. S Initial Spectrum Stains můžete vytvářet nekonečné kombinace. Používejte je jak k vnějšímu, tak vnitřnímu barvení. Lze je také přidat ke keramickým hmotám nebo k Initial Lustre Pastes NF a dosáhnout ještě většího počtu možností!

Dvě konzistence


Initial Spectrum Stains lze nanášet v konzistenci preferované uživatelem jako pastu nebo tekutější. Bez ohledu na použitou konzistenci budou konečné výsledky stejné: zabarvení a lesk s velmi jemným rozlišením, zachovávající povrchovou texturu náhrady. Jsou 2D protějškem past Initial Lustre Pastes NF.




Korunka s jemnou texturou
připravená ke glazování

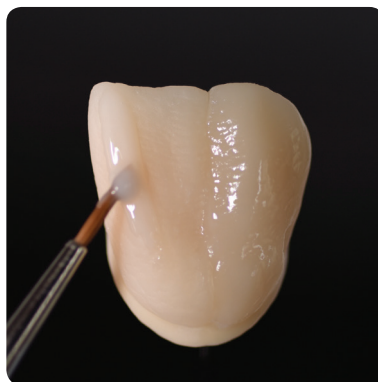

Glazování s tekutou nebo
pastovou konzistencí

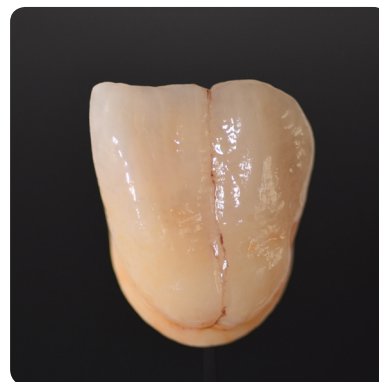

Po vypálení: dobarvená a glazovaná
se zachováním jemné textury

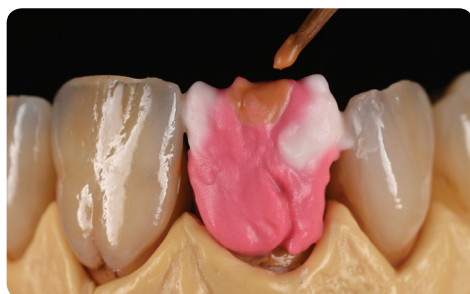

Vnitřní dobarvení...



...nebo vnější





2D a 3D řešení dobarvení keramiky... od GC

GC Initial Lustre Pastes Set NF - V odstíny

- 4 odstíny Body a 1 neutrální k nejsnazšímu dosažení náhrady ve V odstínu.
- 9 efektů, pomocí kterých můžete projevít své umělecké vlohy a domalovat bílé skvrny, dekalifikace, tenké linky a prasklinky.

Složení sady:

1x neutrální (4 g)
1x Value (4 g)
4x odstín Body (4x 4 g)
8x odstín se sklovinným efektem (8x 4 g)
1 x ředící tekutina (8 ml)
1 x obnovující tekutina (8 ml)
1 míchací nádobka
2 štětce
Tabulka barev
Technický manuál



Lustre Enamel Effect 9 (Deep Orange) a 10 (Twilight) nejsou součástí sady, lze je však objednat zvlášť.

GC Initial Lustre Pastes Set NF - odstíny dásní

- 5 past v barvě dásní připravených k použití, s ideálními tixotropními vlastnostmi pro snadné a přesné nanášení.
- 4 mísitelné modifikátory dásní umožňující neomezenou kreativitu při kopírování přirozené harmonie dásní.

Složení sady:

5x odstín pro dásně (5x 4 g)
4x modifikátor barvy pro LP NF (4x 3 g)
Ředící tekutina (8 ml)
Obnovující tekutina (8 ml)
1 míchací nádobka
2 štětce
Tabulka barev
Technický manuál



GC Initial Spectrum Stains

- 16 práškových barev zvýrazňujících estetiku náhrady.
- Dvě konzistence s vylepšeným konečným výsledkem, zachovávající texturu a poskytující optimální úroveň lesku.

Složení sady:

16x barva Initial Spectrum barvy SPS (16x 3 g)
1x Initial Spectrum GL (10 g)
1x glazovací tekutina Initial Spectrum (25 ml)
Tekutina pro glazování pasty Initial Spectrum (8 g)
Vzorník barev Initial Spectrum



GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GCEEO Czech Republic
V Olšinách 82
CZ - 100 00 Prague 10
Tel. +420.274.771.965
Fax. +420.274.771.965
info.czech@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

GC