

BioStamp



NÁVOD K POUŽITÍ





1 - Úvod.....	1
2 - Obsah balení.	1
3 - Instalace.	1
4 - Návod k použití.....	1
5 - Řešení problémů.	2
6 - Údržba a čištění.....	2
7 - Technické specifikace.	3
8 - Symbolika	3
9 - Záruční doba a technická podpora.	3
10 - Autorizovaný zástupce v Evropě.....	3

► 1 - ÚVOD

Svářečka Biostamp společnosti Bio-Art je vybavena technologií PTC (pozitivní teplotní koeficient) pro účinnou kontrolu teploty sváru.

Pracuje s rolemi papíru o šířce až 300 mm, má ovládací páku s exkluzivním systémem blokování papíru a řezačku pro řezání v obou směrech.

► 2 - OBSAH BALENÍ

Svářečka Biostamp (1x).

Napájecí kabel 2p+T (1x).

Návod k použití (1x).

► 3 - INSTALACE


- Svářečka je vyrobena pro napětí 127 nebo 220 V AC, bez bivalentního spínacího systému a musí být připojena k elektrické síti s uzemněním a dvoupólovým ochranným zařízením.

- Pro instalaci role papíru ji jednoduše položte na konkávní část šasi a ujistěte se, že plastový povrch papíru směřuje nahoru.

- Nezapojujte svářečku do stejné zásuvky s jinými instalovanými spotřebiči, stroji nebo zařízeními. -

Po připojení napájecího kabelu k elektrické síti se ozve pípnutí, které signalizuje správnou elektrickou komunikaci.

► 4 - NÁVOD K POUŽITÍ

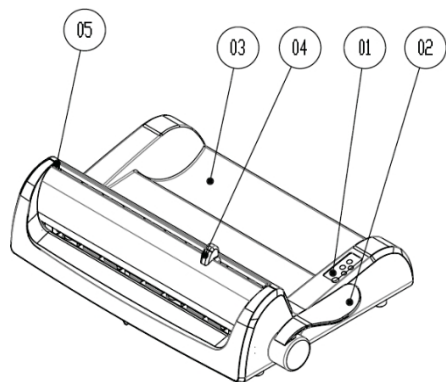

1 - Ovládací panel

2 - Ovládací páka;

3 - Příhrádka na role papíru;

4 - Vozík s řezacím nožem na papír;

5 - Fixace dráhy a uvolňovací šroub.

1 - Chcete-li zapnout svářečku BioStamp, stiskněte tlačítko On/Off na ovládacím panelu.

Přerušované se rozsvítí zelená kontrolka indikující čas ohřevu svářecí jednotky;

2 - Počkejte, až se zelená kontrolka změní z přerušovaného na trvale svítící, což znamená, že je stroj připraven k použití;

3 - Pro sváření vložte papír plastovou stranou nahoru do svářečky, skrz otvory. Poté otočte páčkou o 180° proti směru hodinových ručiček, papír přitlačte a zajistěte. Rozsvítí se červená kontrolka signalizující proces sváření;

4 - Počkejte, až se ozve pípnutí a červená kontrolka se přerušovaně rozsvítí, což znamená, že sváření bylo úspěšně dokončeno;

5 - Pokud je to nutné, odřízněte papír se stále aktivovanou pákou posunutím řezačky na konec řádku;

6 - Vraťte páku do výchozí polohy a červená kontrolka zhasne, stroj je připraven k novému sváření.

Poznámka:

- Vozík s noži svářečky řeže papír v obou směrech a posouvá se na obě strany po celé délce papíru. Operace řezání musí být prováděna po sváření a vždy s přitlačeným papírem;

- Nepoužívejte páku s přerušovaně svítící zelenou kontrolkou, v takovém případě se spustí zvukový a světelný výstražný signál červené kontrolky;

- Pokud se páka nevrátí do 10 minut nebo pokud stroj není aktivován po dobu 60 minut, dojde k jeho vypnutí z bezpečnostních důvodů

► 5 - ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Svářka se po stisknutí tlačítka na ovládacím panelu nespustí, zelená dioda se nerozsvítí.	Nedostatečné napětí ve svářečce.	Zkontrolujte napájení, napájecí kabel a pojistku.
Nedostatečné sváření	Svářka pro 220V je zapojena do 127V.	Zkontrolujte napájení na přístroji a zásuvce.
	Krátký svářecí čas.	Nevracejte páčku zpět, dokud se červená kontrolka přerušované nerozsvítí.
	Nečistoty blokují svářecí jednotku.	Zkontrolujte možné překážky ve štěrbíně, kudy se posouvá papír a vše pečlivě vhodným nástrojem očistěte.
Papír se během sváření pálí a plast tavi	Svářka pro 127V je zapojena do 220V.	Zkontrolujte napájení na přístroji a zásuvce.
	Dlouhý čas sváření.	Když červená kontrolka přerušované svítí, vraťte páčku zpět.

► 6 - ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- 1 - K čištění šasi použijte pouze suchý měkký hadřík; nepoužívejte rozpouštědla, čisticí prostředky ani chemické přípravky.
- 2 - K čištění žádné části svářečky BioStamp nepoužívejte kovové nebo ostré předměty;
- 3 - Uživatel by neměl provádět žádnou údržbu svářečky BioStamp, vždy využijte autorizovanou technickou podporu.

6.1 Výměna pojistek.

- 1 - Před výměnou pojistky odpojte napájecí kabel ze zásuvky a ze vstupního konektoru;
- 2 - Vložte malý šroubavák do otvoru zásuvky držáku pojistek umístěné ve vstupním konektoru (AC) a vytáhněte ji ven;
- 3 - Zkontrolujte dvě pojistky, přičemž pojistka dále uvnitř zásuvky musí být nahrazena náhradní, která se nachází za ní;
- 4 - Vraťte zásuvku s pojistkami, dokud není zcela zasunutá;
- 5 - Vraťte napájecí kabel a zapněte stroj, abyste zkontrolovali, zda pracuje správně.

Pozor:

- Pokud pojistka stále způsobuje problémy, vyhledejte autorizovanou technickou podporu;
- Vždy mějte v držáku pojistek náhradní pojistku a používejte pouze standardní pojistku Ø5x20mm 6A/250V.

6.2 - Výměna nožů na řezání papíru.


Pro výměnu řezacích nožů není nutné demontovat šasi svářečky; pro výměnu řezacích nožů postupujte podle níže uvedeného postupu a pouze vyjměte kolejnici a sestavu vozíku nožů.

- 1 - Odpojte napájecí kabel;
- 2 - Umístěte vozík nože (04) zcela na pravou stranu kolejnice;
- 3 - Uvolněte upevnění kolejnice a uvolněte šroub (05) protisměru hodinových ručiček, dokud se kolejnice neodpojí od své podpěry a hlava šroubu (05) se neodkryje veskršni, aby se dala použít k ručnímu posunu kolejnice;
- 4 - Po uvolnění kolejnice přidržte levou rukou odkrytou hlavu šroubu (05) a pravou rukou přidržte vozík nože (04). Přes šroub (05) posuňte kolejnici doprava a uvolněte ji z vložky podpěry na levé straně;
- 5 - Levou stranu kolejnice tlačte pod úhlem nahoru, dokud se neuvolní z plastového žlabu šasi. Poté vytáhněte kolejnici ven a doleva, uvolněte kolejnici z podpěry na pravé straně a vyjměte celou sestavu z přístroje;
- 6 - Po vyjmutí sestavy z přístroje vyjměte vozík (04) z kolejnice a vyměňte nože;
- 7 - Přemístěte vozík nožů na kolejnici a vraťte sestavu do přístroje opačným postupem, než je uvedeno výše.

► 7 - TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napájecí napětí:127 nebo 220VAC 50/60Hz
 Pracovní výkon:(*PTC pozitivní teplotní koeficient)
 Šířka sváru:12 mm3
 Počáteční doba ohřevu:3' 30" minut
 Doba svařování:6" sekund
 Délka sváru:(max.) 300 mm
 Rozměry stroje (ŠxHxV):460 x 300 x 125 mm.
 Rozměry balení (ŠxHxV):.. 500 x 320 x 160 mm.
 Hmotnost bez obalu:3,600 Kg
 Hmotnost s obalem:4 600 kg.

► 8 -SYMBOLIKA

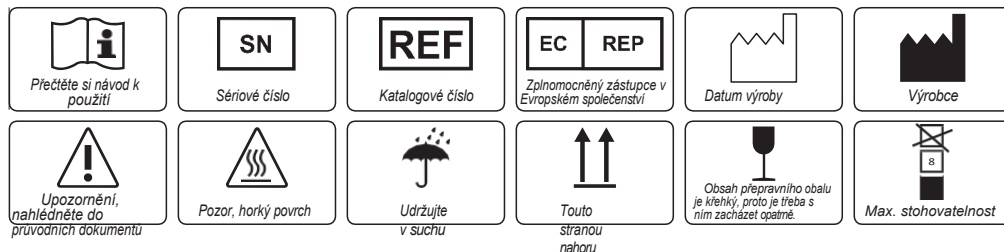

► 9 - ZÁRUČNÍ DOBA A TECHNICKÁ PODPORA

Společnost Bio-Art Equipamentos Odontológicos Ltda., poskytuje záruku 1 (jeden) rok od data zakoupení přístroje (faktury). Záruka je poskytována výhradně autorizovaným distributorem a zahrnuje jakoukoli výrobní vadu, je poskytována prostřednictvím opravy výrobku a podléhá následujícím požadavkům:

- zda byl výrobek používán správně v souladu s pokyny popsány v návodu k použití;
- Po reklamaci následuje faktura, která je zaevidována v záruční době a je k ní přiložen protokol s popisem poškození a sériovým číslem výrobku;
- S výrobkem se zachází, přepravuje a skladuje opatrně;
- Náklady na dopravu (z a do) hradí zákazník;

Omezení záruky:

- Přirozené opotřebení dílů;
- Nesprávné použití, pády nebo nehody;
- Nedostatečná doprava;
- Oprava neoprávněnou osobou;
- Použití v rozporu s funkcemi a účelem zařízení;
- Opotřebení vlivem nepříznivých podmínek (vlhkost, chlad a teplo);
- Poškození v důsledku nedostatečného čištění nebo údržby nevhodnými výrobky.

V případě pochybností se obraťte na výrobce:

BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
 Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim Tangará - CEP 13568-000 - São Carlos - SP - Brasil Tel.
 +55 (16) 3371-6502 - Fax +55 (16) 3372-5953 - www.bioart.com.br
 CNPJ 58.538.372/0001-56 - Insc. Estadual 637.034.447.113

► 10 - AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE PRO EU

EC	REP
----	-----

Obelis s.a.
 Boulevard Général Wahis 53 - 1030 Brussels, BELGIUM
 Tel: +(32) 2.732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03
 E-mail: mail@obelis.net



BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

📍 Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim
Tangará - CEP 13568-000
São Carlos - SP - Brazil

☎ (16) 3371-6502
🌐 www.bioart.com.br
📷 [bioart_solucoes_inteligentes](#)