



**TOP PRVOTŘÍDNÍCH VOCO PRODUKTŮ –
SPOLEHLIVÝCH A INOVATIVNÍCH**

První kompozit na světě s termo-viskózní technologií

- Inovativní materiál
Díky přehřátí je materiál zatékavý při nanášení a hned poté jej lze tvarovat (termo-viskózní technologie)
- Šetří čas
Výplně zhotovené efektivně z jednoho jediného materiálu
- Vynikající manipulace
Nanášení bez vzduchových bublin díky úzké a dlouhé kanyle



... zahřejte



... nechte zatéct



... vytvarujte




VisCalor® bulk

REF 6062 Sada VisCalor Dispenser, Caps 80 × 0,25 g (16 × univerzální, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), VisCalor Dispenser

REF 6063 Sada Caps Warmer, Caps 80 × 0,25 g (16 × univerzální, 16 × A1, 16 × A2, 32 × A3), Caps Warmer



Nanášení zahřátého VisCalor bulk ve vynikající zatékavé konzistenci tenkou kanylou

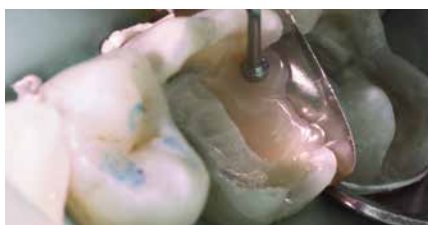

Adaptace tvarovatelného VisCalor bulk



Vyleštěné a hydratované kavity II. třídy den po zhotovení výplně

Zdroj: Dr. Fernando Feitosa, Americana / Brazílie

Celalux® 3

- Nejmodernější LED technologie se světlem vysoké intenzity (zhruba 1.300 mW / cm²)
- Rozsah vlnové délky 450 - 480 nm
- Uhlazený a elegantní design (ve tvaru pera), hmotnost násadce včetně baterie a světlovodu pouhých 70 g
- Informuje o tom, kolik času uplynulo vibracemi na začátku a znovu po 10 s a 20 s
- Snadná manipulace, bezdrátové zařízení
- 8 mm světlovod sterilizovatelný v autoklávu
- Trvalá připravenost k použití díky náhradní baterii dodávané s přístrojem
- Baterie se snadno vyměňuje

REF 9090 Celalux 3 (násadec, nabíječka baterií, napájecí kabel s univerzálními adaptéry, 2 lithium polymerové baterie, 8 mm světlovod, antireflexní zařízení, návod k obsluze)



Take FIVE to match them all!

- všech 16 klasických odstínů VITA® lze pokrýt pomocí pouhých 5 klastrových odstínů Cluster-Shade
- pouze 10 sekund vytvrzování světlem u všech odstínů
- vynikající biokompatibilita, protože neobsahuje žádné klasické monomery
- zdaleka nejnižší polymerační smrštění (1,25 % objemu)
- Kompatibilní se všemi běžnými vazebnými prostředky



Admira® Fusion 5

- REF 6243 Zkušební sada
10 × 0,2 g Caps (2 × A1, A2, A3, A3.5, A4),
10 × Futurabond U *SingleDose*,
karta s odstíny, příslušenství
- REF 6225 Stříkačky 5 × 3 g (A1, A2, A3, A3.5, A4), karta s odstíny
- REF 6235 Caps 75 × 0,2 g (15 × A1, A2, A3, A3.5, A4), karta s odstíny

Admira Fusion 5

VITA®
classical

A1				A2		A3			A3.5				A4		
A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4

Moje výplň:
Přirozeně
kompatibilní!



Admira® Fusion

- REF 2750 Sada + bond
stříkačky 5 × 3 g (A2, A3,
GA3.25, A3.5, Admira Fusion
x-tra), vzorník odstínů +
Futurabond U *SingleDose* 20 ks
- REF 2780 Sada + bond
Caps 75 × 0,2 g (15 od
každého odstínu A2, A3,
GA3.25, A3.5, Admira Fusion
x-tra), vzorník odstínů
+ Futurabond U *SingleDose*
20 ks

Stříkačka 3 g¹ Caps 15 × 0,2 g¹

Admira® Fusion Flow

- REF 2816 Sada stříkaček 5 × 2 g
(A1, A2, A3, A3.5, WO)
vzorník odstínů, příslušenství

Stříkačka 2 × 2 g, různé odstíny¹

¹Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny naleznete na www.voco.dental nebo v hlavním katalogu

Admira® Fusion x-base

- REF 2812 Stříkačka 5 × 2 g univerzální

Admira® Fusion x-tra

- REF 2810 Stříkačka 3 g univerzální
REF 2811 Caps 15 × 0,2 g univerzální



„Přesvědčila mě podobnost produktu GrandioSO se zubem.“

Dr. H. Gräber, Mnichov, Německo

Grandio®SO

Náš kompozit pro náročné. Tento výplňový materiál vyniká vlastnostmi podobnými zubu v kombinaci s velkou uživatelskou přívětivostí a přirozenou estetikou.

- Univerzální nanohybridní výplňový materiál
- Výborné fyzikální vlastnosti
Vysoký obsah plniva, 89 % hmotnosti
- Univerzální
Všestranné pro vysoké požadavky ve frontálním i distálním úseku chrupu

REF 2600 Sada stříkaček 5 × 4 g (A2, A3, A3.5, GA3.25, GA5), vzorník odstínů

REF 2640 Sada Caps 80 × 0,25 g (16 × A2, A3, A3.5, GA3.25, GA5), vzorník odstínů

Stříkačka 4 g / Caps 16 × 0,25 g¹



Grandio®SO Light Flow

- Zatékavý nanohybridní výplňový materiál – nízkoviskózní
- Přesné nanášení díky extra jemné kanyle a tudíž optimálně vhodný pro špatně přístupné oblasti a malé kavity



REF 2585 Sada stříkaček 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), vzorník odstínů, přís.

Stříkačka 2 × 2 g¹

Grandio®SO Flow

- Viskózní univerzální nanohybridní výplňový materiál – středně viskózní
- Vynikající zatékavost, univerzální použití a přesné nanášení



REF 2720 Sada stříkaček 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, WO), vzorník odstínů, přís.

Stříkačka 2 × 2 g / Caps 16 × 0,25 g¹

Grandio®SO Heavy Flow

- Zatékavý univerzální nanohybridní výplňový materiál – vysoce viskózní
- Větší stabilita, tj. bez nežádoucího odtékání a univerzální použití



REF 2680 Sada stříkaček 5 × 2 g (A2, A3, A3.5, WO, GA5), vzorník odstínů, přís.

Stříkačka 2 × 2 g / Caps 16 × 0,25 g¹

¹Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny naleznete na www.voco.dental nebo v hlavním katalogu

Univerzální adhezivum – Je to vaše volba!

Vazebný prostředek pro všechny případy! S Futurabond U, jediným duálně tuhoucím univerzálním adhezivem v balení *SingleDose*, máme jasný záměr: Poskytnout vám vazebný prostředek, který nabízí pouze samé výhody a spolehlivost, díky čemuž nebude vaše ordinace potřebovat žádný jiný adhezivní systém.

Futurabond® U

- Duálně tuhoucí univerzální adhezivum
- Jeden bond na všechno – jakákoliv další adheziva jsou pro ordinaci zbytečná
- Samo-leptací technika, technika selektivního leptání nebo technika total-etch – zcela svobodně na výběru lékaře
- Vynikající univerzálnost použití



REF 1571 SingleDose 50 ks, příslušenství

REF 1572 SingleDose 200 ks, příslušenství

Samo-leptací režim



Selektivní leptání



Total-etch



Každá kapka je výhrou! Univerzální adhezivum, které je tím pravým pro každou situaci.

Futurabond® M+

- Univerzální adhezivum
- Lze jej použít spolu s nebo bez leptání kyselinou fosforečnou
- Je výborně vhodný pro přímé a nepřímé výplně
- Bezpečná adheze k různým materiálům, jako jsou kovy, keramika na bázi oxidu zirkoničitého nebo oxidu hlinitého, či silikátová keramika, a to bez dodatečného použití primeru



REF 1515 Lahvička 5 ml, příslušenství

REF 1516 Lahvička 3 x 5 ml

Futurabond DC je osvědčený a oblíbený samo-leptací vazebný prostředek pro použití pod všechny světlem, samovolně nebo duálně tuhnoucí výplňové materiály – pro pevnou a trvalou adhezi!

Futurabond® DC

- Duálně tuhoucí samo-leptací bond posílený nanoplňivými
- Chemická polymerace pro oblasti, do nichž lze těžko dosáhnout polymerační lampou
- Futurabond DC dosahuje stejných adhezivních vlastností jako přípravky typu total-etch bez samostatného leptání zubní hmoty
- Tolerantní vůči vlhkosti



REF 1164 SingleDose 50 ks, příslušenství

REF 1165 SingleDose 200 ks, příslušenství

Grandio – Klasický nanohybridní materiál

S materiálem Grandio vytvořilo VOCO v roce 2003 nové standardy, protože se stalo prvním dodavatelem nové generace nanohybridních kompozitů na světě. Osvědčilo se milionkrát na všech kontinentech, a tak zůstává Grandio i nadále první volbou mezi nanokompozity! Inovativní nanotechnologie dělá z Grandio vysoce kvalitní kompozit, který je proslulý svými fyzikálními kvalitami, stejně jako optimálními vlastnostmi při zpracování – a to všude.

Grandio®

- Ideální konzistence a nejjednodušší možné zpracování
- Modul elasticity srovnatelný s hmotou přirozeného zubu
- Zvýšená odolnost vůči abrazi a stabilita při žvýkání
- Vysoká biokompatibilita díky nízkému obsahu pryskyřice



REF 1800 Sada stříkaček 5 × 4 g (A1, A2, A3, A3.5, B2), vzorník odstínů

REF 1830 Sada Caps 50 × 0,25 g (10 × A1, A2, A3, A3.5, B2), vzorník odstínů

Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny naleznete na www.voco.dental nebo v hlavním katalogu



Počáteční situace
Zdroj: Dr. Marcelo Balsamo



Kondicionování a podkládání materiálem Grandio Flow



Výplň zhotovená z materiálu Grandio

Grandio Flow – bezkonkurenční také v zatékové verzi

Od výplní minimálně invazivně preparovaných kavit po rozsáhlé pečetění fisur a opravy fazet – s Grandio Flow lze využít také všech výhod Grandio v zatékové verzi. Díky jasné technologické výhodě nechává Grandio Flow konvenční zatékové materiály daleko za sebou: Obsah pryskyřice je až o 50 % nižší než u konvenčních zatékových materiálů, což vede k prvotřídním výsledkům v oblastech, kde je zapotřebí povrchová tvrdost a odolnost vůči abrazi.


Grandio® Flow

- Optimální zatékavost
- Vysoký obsah plniva, 80 % hmotnosti
- Odstíny odpovídají Grandio
- Mikrohybridní kompozitum – svými fyzikálními vlastnostmi




REF 1860 Sada stříkaček 8 × 2 g (A1, 2 × A2, 2 × A3, A3.5, B2, OA2), vzorník odstínů, příslušenství

Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny naleznete na www.voco.dental nebo v hlavním katalogu

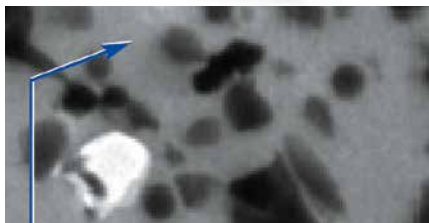

Tradiční zatékový materiál, nevyplněná oblast

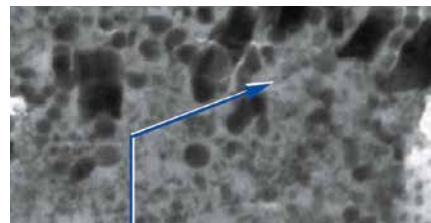

Grandio Flow, oblast vyplněná nano-částicemi

Amaris – pro oslnivé výsledky

Přirozeně jednoduchý, jednoduše překrásný! Pokud jde o nejvyšší míru estetiky, doporučujeme Amaris. U tohoto kompozitu extra třídy je speciální toto: Systém vám umožňuje vysokou míru flexibility v odstínech, protože odstín můžete průběžně měnit ve dvou součinných pracovních krocích – dokonce i v průběhu vrstvení! Vysoce estetický výsledek díky tomu nezávisí jen na počáteční volbě odstínu.

Amaris®

- Optimální leštitelnost, odolnost vůči abrazi a vysoký lesk
- Dva snadné kroky, nízké náklady na materiál
- Přirozené vrstvení
- Pokrytí celé škrály odstínů díky kombinaci pouhých osmi komponent



Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny naleznete na www.voco.dental nebo v hlavním katalogu

REF 1930 Sada stříkaček 8 × 4 g (O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), Amaris Flow stříkačky 2 × 1,8 g (HT, HO), vzorník odstínů, příslušenství

REF 1949 Úvodní sada Caps 32 × 0,25 g (4 × O1, O2, O3, O4, O5, TL, TN, TD), Amaris Flow stříkačky 2 × 1,8 g (HT, HO), vzorník odstínů, příslušenství



Nanášení Amaris TL za účelem rekonstrukce palatinální části skloviny

Zdroj: Dr. Sânzio Marques – Passos, Brazílie



Modelace z Amaris O1, přirozený vzhled vytvarování mamelonů z Amaris Flow HO



Hotová rekonstrukce frontálních zubů

x-tra fil: Amalgám – ne, díky!

Všichni nejspíš znáte pacienty, kteří chtějí neamalgámovou výplň, ale za cenu amalgámu. x-tra fil byl navržen speciálně pro základní ošetření v laterálním úseku (výplně kavit I. a II. třídy) a korunkové dostavby. Díky možnosti nanášení vrstev silných až 4 mm v jednom pracovním kroku a krátké době světelného vytvrzování v délce 10 sekund můžete vy i vaši pacienti těžit z velmi krátké doby ošetření.

x-tra fil®

- Hloubka vytvrzení 4 mm
- Doba vytvrzování pouhých 10 sekund
- Univerzální odstín
- Zkracuje délku ošetření, obzvláště v kombinaci s adhezivem Futurabond SingleDose

Více než
13 milionů
výplní na celém
světě!²



REF 1739 Stříkačky 10 × 5 g

REF 1740 Stříkačka 5 g

REF 1741 Caps 20 × 0,25 g

²na základě údajů o prodeji

Vlákno z kompole

Retrakční pasta VOCO Retraction Paste je nepostradatelným pomocníkem pro účinné dočasné rozšíření a vysušení gingiválního sulku. Vytváří podmínky pro úspěšné konvenční nebo digitální otiskování.

VOCO Retraction Paste

- Adstringentní pasta pro účinné dočasné rozšíření a vysušení gingiválního sulku
- Tenká kanylka s pružným hrotem – snadná a přesná aplikace do sulku
- Změna viskozity – pasta pro optimální aplikaci a rozšíření sulku
- Dobrá viditelnost – kontrastní vůči gingivě



REF 1012 Caps 25 × 0,3 g

REF 1013 Caps 100 × 0,3 g

Působivě přesný!

Přesně dosedající zubní náhrady vyžadují materiál, který svými vlastnostmi zajistí optimální zhotovení otisku – od začátku až do odlítní. Na této koncepci jsou založeny vlastnosti otiskovací hmoty V-Posil.

V-Posil®

- Přesný otiskovací materiál, VPS
- Vysoce hydrofilní A-silikon pro maximální přesnost
- Dlouhá doba zpracování kombinovaná s krátkou intraorální dobou tuhnutí
- Výjimečná pevnost a výborná schopnost elastické obnovy zajišťují jistotu během nebo po vyjímání otisku
- Dobrá hydrofilnost, dokonce i po ztuhnutí, pomáhá při odlévání a tedy zhotovení dokonalé náhrady



Úvodní sada Putty Fast / Light Fast REF 2991

Putty Fast Kartuše 2 × 380 ml
Light Fast Kartuše 2 × 50 ml

Úvodní sada Heavy Soft Fast / Light Fast REF 2985

Heavy Soft Fast Kartuše 2 × 380 ml
Light Fast Kartuše 2 × 50 ml

Úvodní sada Mono Fast / Light Fast REF 2987

Mono Fast Kartuše 2 × 380 ml
Light Fast Kartuše 2 × 50 ml

Úvodní sada Putty Fast / Light Fast REF 2984

Putty Fast Dóza 2 × 450 ml
Light Fast Kartuše 2 × 50 ml

Úvodní sada Putty Soft Fast / Light Fast REF 2904

Putty Soft Fast Dóza 2 × 450 ml
Light Fast Kartuše 2 × 50 ml

Podložky pro každý den

Dobrá podložka je základem úspěšné výplně. Ať se jedná o přímé nebo nepřímé krytí dřeně či světelné vytvrzování. S našimi podkládacími materiály máte na výběr podle konkrétní situace.

Ionoseal®

- Světlem tuhnečící jednosložkový skloionomerní kompozitní cement pro podložky
- Jednosložkový materiál k okamžitému použití
- Časově úsporný: vytvrzení světlem během několika sekund
- Rychlá a hygienická aplikace



REF 1326 Stříkačky 3 × 2,5 g, příslušenství



Preparovaná kavita



Přímé nanášení Ionoseal



Dokončená podložka



Výsledná výplň

Zdroj: Dr. Marcelo Balsamo, São Paulo / Brazílie

Calcicur®

- Okamžitě aplikovatelná pasta na bázi hydroxidu vápenatého
- Vhodný pod jakoukoli podložku nebo výplňový materiál
- Připraven k okamžitému použití
- S vysokou hodnotou pH (12,5), které je známo svým bakteriostatickým účinkem



REF 1096 Stříkačka 3 × 2,5 g, příslušenství

Calcimol LC

- Světlem tuhnečící rentgen kontrastní pasta s obsahem hydroxidu vápenatého
- Efektivní ochrana dřeně
- Jednosložkový materiál k okamžitému použití
- Časově úsporné světelné vytvrzování a přímé nanášení z neodkapávající NDT® stříkačky



REF 1307 Stříkačky 2 × 2,5 g, příslušenství

REF 1047 Tuby 2 × 5 g, příslušenství

Odolné provizorní náhrady

Žvýkácké funkce, fonetika a estetika musí být v pořádku i u provizorních náhrad. Se Structur, naším provizorním samovolně tuhoucím kompozitem pro výrobu vysoce kvalitních provizorních korunek a můstků, i odolných dlouhodobě provizorních náhrad lze pracovat v několika málo krocích. Materiál je založen na známé nanohybridní technologii VOCO.

Structur 2

- Jednoduchý a rychlý pracovní postup
- Vytvrzení v ústech za méně než 1 minutu
- Jednoduché tvarování a leštitelnost



REF 1492 Kartuše 5 × 75 g A2, míchací hroty typu 6
REF 1491 Kartuše 5 × 75 g A3, míchací hroty typu 6

Kartuše 75 g, příslušenství¹

Structur 3

- Zpracování
 - rychlé, jednoduché a spolehlivé díky systému kartuší 1:1
 - krátká doba tuhnutí
 - elastická fáze umožňuje snadné odstranění z preparovaného zubu
 - lesk bez leštění – vyžaduje pouze odstranění inhibiční vrstvy
- Odolnost
 - vysoká pevnost v tlaku
 - výborná odolnost vůči zlomení



**Zářivý lesk
bez leštění!**

REF 2512 Kartuše 5 × 50 ml A2, míchací hroty typu 6
REF 2513 Kartuše 5 × 50 ml A3, míchací hroty typu 6

Kartuše 50 ml, příslušenství¹

¹Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny naleznete na www.voco.dental nebo v hlavním katalogu



Po vyjmutí během elastické fáze: extraorální tuhnutí

Zdroj: Prof. Jürgen Manhart, Universita Mnichov / Německo



Dokončený provizorní můstek



Můstek ze Structur 3 finální práce


Clip

- Světlelým tuhoucím výplňovým materiálem na provizorní výplně
- Snadno se nanáší – snadno se odstraňuje v jednom kuse
- Nedochozí k poškození hranic preparace
- Šetří čas i peníze



REF 1285 Stříkačky 3 × 4 g

REF 1287 Caps 25 × 0,2 g

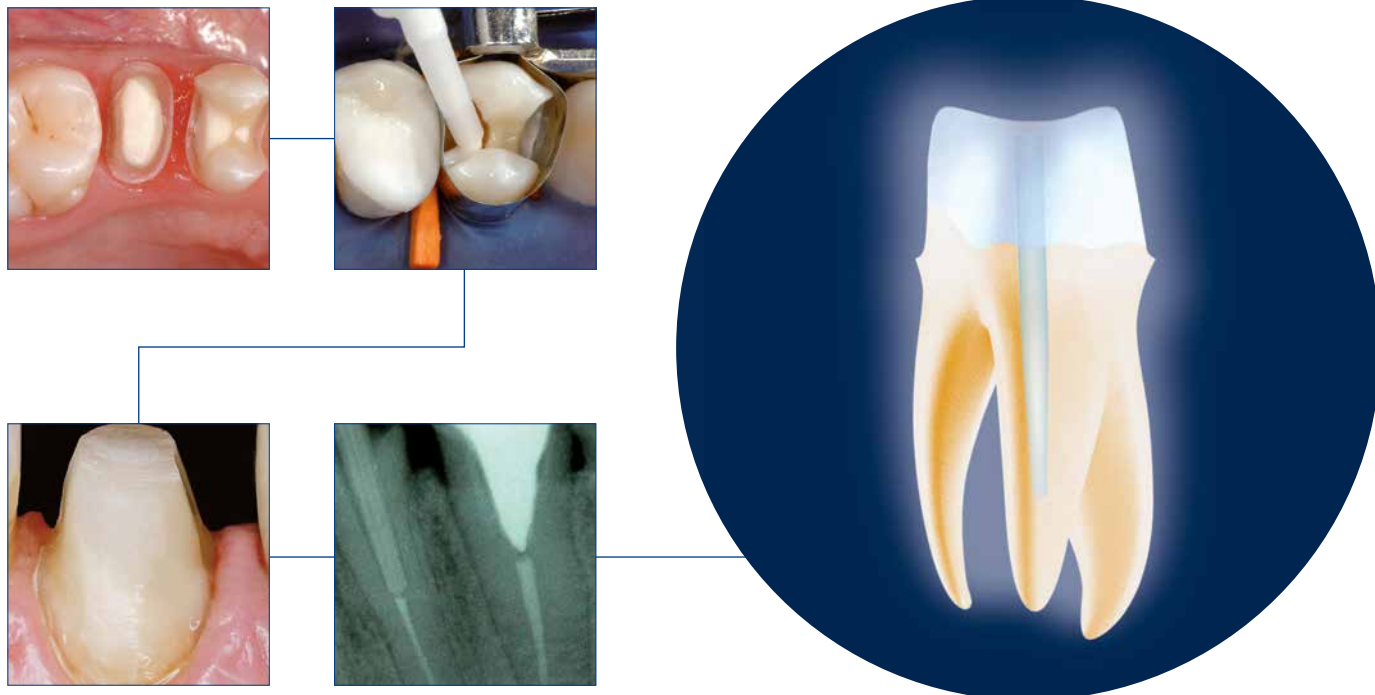

Snadno zhotovená korunková dostavba

Má-li přirozený zub stále dostatek zubní hmoty, je obvykle cílem jeho zachování. S naším klasickým dostavbovým materiálem **Rebilda DC** a odpovídajícími kompozitními kořenovými čepy **Rebilda Post** nabízíme dostavbový systém, který se chová jako přirozený zub, a to i při zatížení.

Rebilda® Post

- Skleněným vláknem vyztužené kompozitní čepý
- Elasticita podobná dentinu, vysoká pevnost v ohybu
- Vysoká rentgen kontrastnost (350 %AI)
- Anatomický tvar



REF 1782 Sada II 5 čepů každého průměru (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), 1 vrták každého průměru (ø 1,0 mm, ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), Ceramic Bond lahvička 5 ml, Futurabond U SingleDose 20 ks, Rebilda DC QuickMix stříkačka 10 g dentinu, příslušenství

Rebilda® DC

- Duálně tuhnoucí zatékavý upevňovací systém korunkových dostaveb a čepů
- Rychlé zpracování díky vytvrzování světlem
- Dodatečná chemická polymerace pro spolehlivé zpracování
- K dostání v 10 g QuickMix stříkačkách nebo 50 g kartuších



REF 1396 Kartuše 50 g dentinu, příslušenství
 REF 1397 Kartuše 50 g modrá, příslušenství
 REF 1398 Kartuše 50 g bílá, příslušenství

REF 1403 QuickMix stříkačka 10 g dentinu, příslušenství
 REF 1404 QuickMix stříkačka 10 g modrá, příslušenství
 REF 1405 QuickMix stříkačka 10 g bílá, příslušenství



Celosvětově úspěšný produkt

Profluorid Varnish je nepostradatelný pro snížení citlivosti zubů. Tento lak se snadno nanáší a zasychá během několika sekund. Vyvolává nejen dobrý pocit, ale také dobře chutná – protože díky sedmi atraktivním příchutím si vybere naprosto každý pacient. Je k dostání také v tubách a kartuších.

VOCO Profluorid® Varnish

- Rychlá desenzibilizace a uvolňování fluoridu (5 % NaF \approx 22.600 ppm fluoridu)
- Snadno se nanáší – tolerantní vůči vlhkosti
- K dostání v sedmi příjemných příchutích



Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny naleznete na www.voco.dental nebo v hlavním katalogu

Příchut'	SingleDose 200 x 0,40 ml	Tuba 10 ml
Melounu	REF 1271	REF 1267
Karamelu	REF 2229	REF 2232
Třešně	REF 2230	REF 2233
Máty	REF 2231	REF 2234
Žvýkačky	REF 2239	-
Cola s limetkou	REF 2241	REF 2236
Piña Colada	REF 2243	REF 2237
Příchut'	4 x 10 ml Tuba	
Mixed	REF 2971	



Zlatý standard fluoridace

Bifluorid 10 je každodenním pomocníkem pro ošetření hypersenzitivity. Tento lak je univerzální a snadno se nanáší – ideální také pro ortodontickou léčbu a ošetření po bělení.

Bifluorid 10®

- Fluoridový lak proti hypersenzitivitě
- Okamžité znecitlivění
- Vznik ochranné vrstvy proti tepelnému a mechanickému působení
- Speciální základ laku prodlužuje délku působení a hloubku fluoridace



REF 1616 Lahvička 10 g

REF 1617 Lahvička 3 x 10 g,
Solvent lahvička 10 ml,
Pele Tím No. 1

REF 1618 SingleDose 50 ks, příslušenství

REF 1619 SingleDose 200 ks, příslušenství



Odolné výplně bez bondování

Ionolux®

- Světlem tuhnoucí skloionomerní výplňový materiál
- Vynikající doba zpracování – doba tuhnutí individuálně upravitelná světelným vytvrzením
- Není nutné kondicionování tvrdých zubních tkání
- Nelepí se na nástroje, snadno se modeluje



REF 2115 Sada aplikačních kapslí 50 ks
(10 x A1, 10 x A2, 30 x A3)

REF 2122 Aplikační kapsle 150 ks A2

REF 2123 Aplikační kapsle 150 ks A3

Barevný pro děti – léty prověřeno

Twinky Star®

- Barevný, světlem tuhnoucí, kompomer – výplňový materiál s třpytivým efektem
- Osm atraktivních barev s třpytivým efektem
- Rychlá a jednoduchá aplikace z kompulí
- Výborná leštiteľnosť



REF 1680 Sada Caps 40 x 0,25 g (5 od každého odstínu), vzorník odstínů



Každodenní pomocník pro vaši práci

Fissurit® F

- Světlem tuhnoucí pečtidlo fisur s fluoridem, bílé
- Rychlé a přímé nanášení z neodkapávající NDT® stříkačky
- Díky bílé barvě při nanášení dobře viditelný
- Výborné zatékavé vlastnosti a nízká viskozita




REF 1292 Stříkačky 2 x 2 g, příslušenství

REF 1293 Sada stříkaček 5 x 2 g, příslušenství

Pele Tim

- Molitanové peletky k nanášení tekutých a pastovitých přípravků
- 5 praktických velikostí
- Bezbolestné nanášení bez tlaku
- Úsporné nanášení

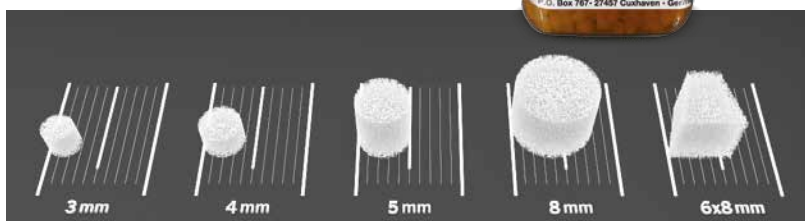

REF 2250 No. 0 3.000 x ø 3 mm

REF 2252 No. 1 3.000 x ø 4 mm

REF 2253 No. 2 1.000 x ø 5 mm

REF 2254 No. 3 500 x ø 8 mm

REF 2255 No. 4 500 x 6 x 8 mm

Perfect Bleach – přirozeně bílé zuby

Účinné, šetrné a dlouhotrvající: S naším systémem pro domácí bělení Perfect Bleach můžete svým pacientům nabídnout pohodlné a moderní bělení zubů, které splňuje i ty nejvyšší estetické požadavky – a to za atraktivní poměr cena-výkon.



Perfect Bleach®

- Jednoduché použití
- Šetrný k hmotě zubu a stávajícím výplním
- Výsledek bělení se projeví již po krátké době



REF 1660 Sada stříkačky 6 x 2,4 ml s 10 % peroxidem karbamidu, Block Out Gel LC stříkačka 1,2 ml, 2 folie, úložný box, etuje, vzorník odstínů, příslušenství

REF 1664 Sada stříkačky 6 x 2,4 ml s 16 % peroxidem karbamidu, Block Out Gel LC stříkačka 1,2 ml, 2 folie, úložný box, etuje, vzorník odstínů, příslušenství

Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny naleznete na www.voco.dental nebo v hlavním katalogu

Vydrží – bez leptání a bondování!

Pro pevnou adhezi k zubu a výplni: S Bifix SE, duálně tuhoucím, samo-adhezivním upevňovacím systémem lze rychle a spolehlivě upevňovat nepřímé náhrady a kořenové čepy. Tento materiál na bázi kompozitu je vhodný pro keramiku, zirkon, kompozity i kovy. Nejsou nutné žádné další vazebné prostředky nebo kondicionéry, protože již obsahuje všechny potřebné komponenty.

Bifix® SE

- Rychlé zpracování: bez leptání nebo bondování
- Neutrální zápach
- Snadná manipulace

¹Další prodávané formy balení a jednotlivé odstíny naleznete na www.voco.dental nebo v hlavním katalogu



REF 1784 Sada QuickMix stříkaček 3 x 5 g (univerzální, transparentní, bílý-opákní), příslušenství

QuickMix stříkačka 5 g, příslušenství¹

Podkládání snímatelných náhrad – víme, jak na to!

Perfektní podložení během jediné návštěvy. Materiály Ufi Gel hard C a Ufi Gel SC jsou ideálním týmem snů pro každodenní práci s protetikou. Systém nabízí pro každý protetický případ speciální řešení pro podkládání a nanáší se snadno a rychle přímo v ordinaci. Pokud by později byly zapotřebí další úpravy, lze je udělat i po několika letech.

Ufi Gel® hard C

- Tvrdý materiál k přímému podkládání protéz
- Celkové, tvrdé podkládání v zubní ordinaci během jediné návštěvy
- Neobsahuje metylmetakryláty
- Neutrální příchut a vůně



REF 2215 Sada kartuše 80 g, adheziva lahvička 10 ml, příslušenství

Ufi Gel® SC

- Trvale měkký, za studena tuhnoucí podkládací materiál na bázi silikonu
- Silikon k podkládání špičkové kvality
- Celý postup podkládání během jedné návštěvy ordinace
- Zůstává trvale měkký



REF 2041 Sada kartuše 50 ml, adhezivum lahvička 10 ml, glazura báze 10 ml, glazura katalyzátor 10 ml, příslušenství



CleanJoy – radost z čištění

S CleanJoy se stane čištění zubů radostí! Pasta šetrně odstraňuje plak a diskolorace a výborně chutná díky příchuti máty, třešní a karamelu. Xylitol a fluoride (700 ppm) také přispívají k remineralizaci zubů a posílení přirozené struktury zubů.

CleanJoy®

- Stabilní, homogenní konzistence, neodstříkujete (2.000 - 3.000 otáček / min)
- Bez parabenů
- K dostání ve třech úrovních abrazivnosti – lze ji individuálně upravit každé situaci



mint



caramel



cherry

Příchuť	Hrubá (červená) Tuba 100 g	Střední (žlutá) Tuba 100 g	Jemná (zelená) Tuba 100 g
Mátová	REF 2092	REF 2091	REF 2090
Karamelová	REF 6092	REF 6091	REF 6090
Třešňová	REF 6100	REF 6099	REF 6098


Tuba 4 × 100 g Jemná (zelená)

Mátová
REF 2089

VAŠE OBJEDNÁVKA

Nabídky platí pouze pro spolupracující maloobchodní partnery. Vždy jsou brány v úvahu ceny nabízené Vaším dentálním depem. Právo na chyby a opomenutí vyhrazeno. Výrobce nenes odpovědnost za tiskové chyby.

Tento prospekt byl předán zástupcem:



VC 84_009900 CZ 1123

