

Biodentine™ XP

je tak liečebný
ako aj výplňový materiál
zubnej drene
v jednom produkte.



- ▶ Kapsle all in one
- ▶ Priama aplikácia
- ▶ Voliteľný objem

Objavte
Bio-Bulk Fill
postup



SKZL Regionálna komora Bratislava
v spolupráci s firmou Hu-Fa Dental s.r.o.
si Vás dovoľujú srdečne pozvať na prednášku:

Diódové lasery

Otvorte dvere novým možnostiam alebo ako Vám
pomôže dentálny laser vo Vašej každodennej praxi

Sobota 31. mája 2025, BRATISLAVA
LINDNER HOTEL BRATISLAVA,
Metodova ul. č.4, 821 08 Bratislava



Prednášajúci: Dr. Sergio A. Velasquez

Zubný lekár z univerzity v Manizales v Kolumbii. Ortodontista z Universidad del Valle, Cali, Kolumbia. Vedúci postgraduálneho kurzu ortodoncia a čelustnej ortopédie v Unicoc, Cali a profesor na klinike samo-ligatujúcich, súčasných techník v ortodoncii, interdisciplinárneho manažmentu a diagnostiky. Špecializácia: Lasery v zubnom lekárstve, Univerzita v Aachene, Nemecko. Magisterské štúdium v oblasti vzdelávania sprostredkovaného počítačovými a komunikačnými technológiami - ICESI University, Cali, Kolumbia. Výskumný pracovník v oblasti terapeutického a chirurgického lasera s Universidad del Valle a Unicoc, Cali, Kolumbia. Koordinátor Kolumbijskej ortodontickej spoločnosti Valle del Cauca Sectional 2013 - 2015. Indexované vedecké publikácie z praxe založené na dôkazoch a účinku nízko-intenzívneho lasera počas ortodontickej liečby pre urýchlenie pohybu a pre kontrolu bolesti. Získanie 2 národných cien za výskum. Vlastná súkromná prax v ortodoncii: Samoligovacie systémy v kombinácii s chirurgickou a terapeutickou aplikáciou lasera. Člen WALED - Svetovej akadémie pre laserové vzdelávanie a výskum v zubnom lekárstve.

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

pozyvame Vás na výnimočnú konferenciu pod vedením špičkového špecialistu Dr. Sergia Velasqueze, ktorý Vám priblíži využitie dentálnych laserov v praxi.

Čo vás čaká?

- Využitie dentálneho lasera v každodennej praxi v ktorejkoľvek dentálnej ordinácii (všeobecná stomatológia i špecializované ordinácie).
 - Možnosti a výhody laserového ošetrovania pri rôznych diagnózach.
 - Základné laserové techniky a ich špecifiká. Nároky na prácu s dentálnymi lasermi.
 - **Využitie fotobiomodulácie: liečba bolesti, opuchov, áft. Dekontaminácia. Dezinfekcia. Prevencia. Zníženie hypersenzitívnosti. Podpora hojenia po chirurgických zákrokoch a extrakciách. Skrátenie doby liečby.**
 - Konkrétna diagnóza vs. vhodná terapia. Klinické prípady – fotografie, videá.
 - Možnosť vyskúšať si prácu s laserom na konkrétnom prístroji.
- Získajte odpovede na všetky Vaše otázky a načerpajte inšpiráciu od kolegu, pre ktorého je laserová terapia skutočnou vášňou!

Cena:

pre študentov **138 €**
pre členov SKZL **184 €**
pre nečlenov SKZL **276 €**

Cena zahŕňa:

Účasť na prednáške, 7 kreditov, tlmočenie do češtiny, občerstvenie a obed

Bližšie informácie o programe a prihlášku nájdete tu: **bit.ly/41DPiWi**
Opýtajte sa svojho obchodného zástupcu.


Prosím kontaktuje Ing. Majchrákovú na email: majchrakova@hufa.sk
prípadne sekretariát RKZL Bratislava na tel. čísle: +421 910 507 295.




Fotobiomodulačné intraorálne a extraorálne adaptéry rozširujú využitie lasera v každodennej praxi o terapiu/liečbu bolesti a podporu hojenia, napr:





1. úľava od bolesti po extrakcii tretieho moláru

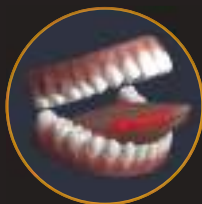

2. podpora hojenia a úľava od bolesti u vredov, áft, herpesov

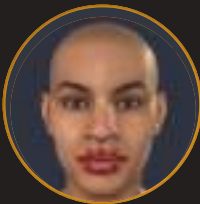

3. prevencia a liečba zápalov sliznice

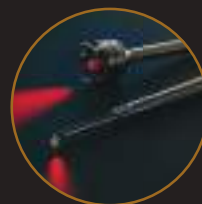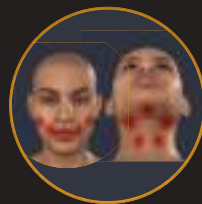

PBM adaptéry

vzdelávanie

www.hufa.sk/vzdelavani/

webináre

Od evolúcie k revolúcii zubných bioaktívnych materiálov

Inovatívne bioaktívne materiály a osvedčené klinické postupy, ktoré zásadne menia prístup k ošetrovaniu hlbokých kazov a ochorení pulpy. Dozviete sa, ako správne voliť diagnostické metódy, ako efektívne pracovať s minimálne invazívnymi technikami a mnoho ďalšieho.

Prednášajúci:
Agnieszka Pacyk, PhD.



kedy: 20. marca 2025
kde: on-line

bit.ly/42z6ZGY

Ideálny odtieň kompozita & Ako zlepšiť polymerizáciu

Ako dosiahnuť perfektný farebný súlad a zaistiť, aby vaše výplne nielen dobre vyzerali, ale aj vydržali? Na tomto webinári sa dozvieme, ako využiť optické vlastnosti kompozitov vo svoj prospech, ako efektívne maskovať zafarbený dentín a ako správne pracovať s polymerizačnou lampou pre maximálne výsledky. Získate praktické tipy, ktoré vám pomôžu zlepšiť každodennú klinickú prax.

Prednášajúci:
MVDr. Michael Stiksa



kedy: 9. apríla 2025
kde: on-line

bit.ly/3Ec7gpc

Dokumentácia a legislatívne požiadavky na prevádzku stomatologickej ordinácie

Praktická prednáška, na mieru ušitá zubným lekárom, dentálnym hygieničkám, technikom a spolupracujúcim osobám, ktoré sa v ordinácii starajú a zodpovedajú za všetku dokumentáciu, vám pomôže zvládnuť administratívne výzvy zubnej praxe s prehľadom a v súlade s legislatívou!

Prednášajúci: Mgr. Jitka Vnoučková,
Ing. Bc. Dagmar Tothová



kedy: 24. apríla 2025
kde: on-line

bit.ly/3ZEmQz

REVOLÚCIA V ZUBNOM OŠETRENÍ S LASERMI BIOLASE

BIOLASE
Global Leadership in Lasers

Moderná stomatológia bez bolesti a stresu

BIOLASE je popredný svetový inovátor v oblasti zubných laserov. S tisíckami laserov používaných v operáciách po celom svete milióny pacientov zažili výhody laserovej stomatológie, ako sú jemnejšie zákroky a pohodlné hojenie.

Tieto lasery umožňujú zubným lekárom liečiť efektívnejšie, bezpečnejšie a šetrnejšie ako tradičné metódy. Ponúkajú vyššiu presnosť, rýchlejšie hojenie a zníženie stresu pacientov, čím pomáhajú zmeniť ich vnímanie návštevy lekára. Systém Waterlase je bezpečnou a šetrnou alternatívou tradičných dentálnych nástrojov. Pomocou laserovej energie a vodného spreja dokáže vykonávať mnoho procedúr bez vŕtania.

Pre koho sú lasery BIOLASE určené?

- ✓ **Všeobecní zubní lekári**
– modernizácia praxe, efektívnejšie zákroky
- ✓ **Špecialisti – parodontológia, endodoncia, chirurgia**
– presnejšie a menej invazívne postupy
- ✓ **Detská stomatológia**
– bezbolestné ošetrenia bez stresu a strachu

Výhody dentálnych laserov BIOLASE

Lasery BIOLASE prinášajú bezbolestné a minimálne invazívne ošetrenie, ktoré často eliminuje potrebu anestézie, minimalizuje krvácanie a urýchljuje hojenie. Ich presné pôsobenie chráni zdravé tkanivá, čím sa znižuje riziko mikrofraktúr a urýchljuje regenerácia. Pacienti oceňujú komfortnejší priebeh zákrokov bez stresu, zatiaľ čo lekári získavajú efektívnejší nástroj na skrátenie času ošetrenia a zlepšenie výsledkov. Zavedenie laserovej technológie tak zvyšuje spokojnosť pacientov aj prestíž kliniky.

Budúcnosť stomatológie začína dnes!

Posuňte úroveň Vašej praxe na novú úroveň s technológiou, ktorá spája komfort pacienta, a precíznosť a efektívnosť práce zubného lekára.

Kontaktujte nás pre viac informácií
a individuálnu konzultáciu:

medima@medima-sk.sk
+421 902 628 611, +421 903 069 606
www.medima-sk.sk, www.sternweber.sk




MEDIMA-SK


Stačí iba jeden odtieň

- Nanohybridný kompozit na báze Bis - GMA, naplnený z 60-61% objemovo (71 % váhovo).
- Ultradent's RPM technológia-chameleón efekt dáva kompozitu unikátne optické a fyzikálne vlastnosti.
- Odtieň Universal Body pre estetické výplne, ktoré splynú s okolitým zubom/zubmi, za použitia iba 1 odtieňa kompozitu.
- Presne vyvážená translucencia a opacita.
- Výborne lešiteľný s dlhodobou výdržou lesku.
- Fluorescencia blížiac sa prirodzenému zubu.
- Možnosť ďalších dentínových a sklovinných odtieňov (napr. pre výplne tr. III a tr. IV).


Použitie v každodennej praxi:
Kompozitné výplne z 1 odtieňa:

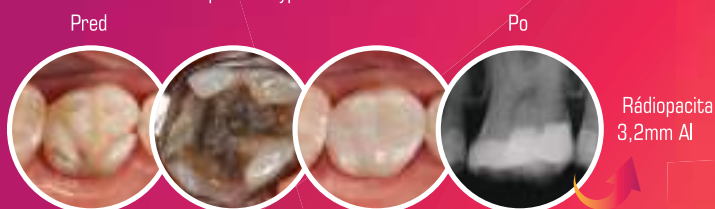

Pediatrické výplne

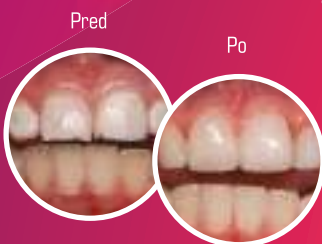


Veľké výplne tr. I

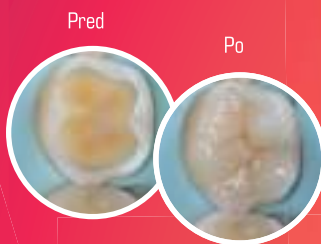

Odtieň Universal Body
Shade pre reálny vzhľad



Žiadne farbenie alebo vrstvenie

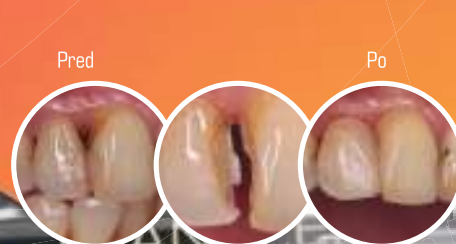


Prvý kompozit,
ktorý po vybielení nemusíte opraviť

Splynie s odtieňom okolitých zubov
Ak pacient bude bieliť bieliacimi géľmi Opalescence™,
výplne sa prispôbia s svetlejšímu odtieňu.



**ZĽAVA
25%**

504734 Transcend UniBody (UB) striekačka 4×4g	219,90 €	294,00-€
504817 Transcend UniBody kompule (UB) 40×0,2g	127,50 €	170,00-€
504726 Transcend kit - striekačka 7×4g od každého odtieňa: A1D, A2D, A3D, B1D, EN, EW, UB	365,00 €	487,00-€
504814 Transcend kit - kompule 70×0,2g od každého odtieňa: A1D, A2D, A3D, B1D, EN, EW, UB	210,00 €	280,00-€
5047xx: striekačka 1×4g odtiene: A1D, A2D, A3D, B1D, EN, EW, UB	65,30 €	87,00-€
5047xx: kompule 10×0,2g odtiene: A1D, A2D, A3D, B1D, EN, EW, UB	37,50 €	50-€

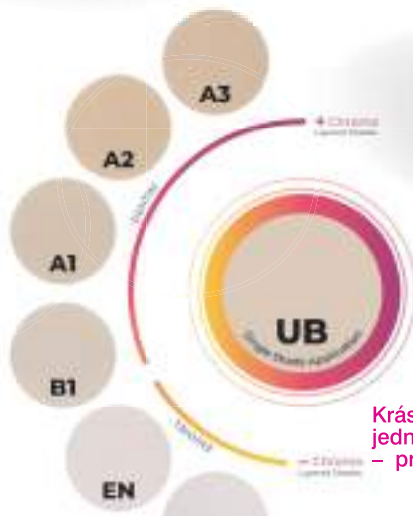

Krásny výsledok
jednoducho
– pre akúkoľvek výplň

Tip:

Na zmäkčenie kompozitu použite
Composite Wetting Resin



Peak[™] Universal Bond

– svetlom tuhnúce adhesívum s 0,2% chlórhexidínu

Peak[™] SE Primer

– samoleptací primer s pH 1,2

- Pre všetky dentálne materiály (dentín, sklovina, kov, keramika, kompozit aj zirkón).
- Najvyššia pevnosť väzby k dentínu (71,3MPa) a k sklovine (51,7 MPa)
- Pre techniku Total-Etch, aj Self-Etch.
- Nízky obsah plniva (7,5%) a minimálna hrúbka filmu 2µm
- Na priame aj nepriame rekonštrukcie, bondovanie koreňových čapov a endodontických ošetrení
- Etylalkohol ako rozpúšťadlo.

**ZĽAVA
20%**



504553	Peak Universal Bond Refill	4 × 1,2ml striekačka	90,80 €	121,00 €
504543	Peak Universal Bond	1 × 4 ml fľaštička	67,50 €	90,00 €
505135	Peak SE Primer	4 × 1,2 ml striekačka	75,00 €	100,00 €

Ďalšie balenia - vid' katalóg Ultradent 2023 str. 59-60



ULTRA-ETCH[™]

Leptadlo s 35% kyselinou fosforečnou

- samolimitujúca chémia leptá len do hl. **1,9µm**
- penetruje do najmenších fisúr, ale nesteká na vertikálnych povrchoch
- neobsahuje polyméry, nezanecháva rezíduá
- tixotropné, ľahko pretečie kanylou
- **expiračná doba 48 mesiacov**

500164	Refill 4 × 1,2 ml	46,80 €	52,00 €
500163	Intro kit 4 striekačky	54,90 €	61,00 €
500685	IndiSpense 30 ml	91,80 €	102,00 €
500168	Refill 20 × 1,2 ml	114,30 €	127,00 €
500167	Econo kit 20 striekačiek	138,60 €	154,00 €

**ZĽAVA
10%**



bit.ly/3YldydW

Širokospektrálna LED polymerizačná lampa.

- Priemer šošovky 12,5 mm
- **Výkonné špeciálne LED diódy** (8 polymerizačných, 4 pre biele svetlo)
- Rozsah vlnových dĺžok 380–515 nm
- Na polymerizáciu všetkých dentálnych materiálov vrátane bulk - fill materiálov
- Dokonale kolimovaný, homogénny zväzok svetelných lúčov pre spoľahlivú, úplnú polymerizáciu aj v hĺbke (napr. dna bulkfilov)
- Horné a dolné podsvietené tlačidlo s farebnou indikáciou režimu
- Štíhlejšie telo z leteckého hliníka vysoko odolné proti poškodeniu
- Ergonomický dizajn s plochou hlavičkou s výborným dosahom do všetkých častí úst
- Funkcia **Akcelerometer** - prepínanie medzi polymerizačnými a/alebo diagnostickými režimami pohybom zápästia
- Akumulátory s výdržou až 120 polymerizácií na 1 nabitie
- Možnosť jednoducho zmeniť napájanie VALO X z batériového na napájanie zo siete pomocou adaptéra (je súčasťou balenia)

**ZÁRUKA
5 ROKOV!!**

**20 %
ZĽAVA**

2 POLYMERIZAČNÉ A 2 DIAGNOSTICKÉ REŽIMY

Polymerizačný režim:

širokospektrálne LED diódy

- 2 polymerizačné výkony: štandard (1100 mW/cm², 10 sekúnd)
- extra vysoký pulzný (2 200 mW/cm², 5 sekúnd 3× pulz s oneskorením)

Diagnostické režimy:

- UV svetlo na detekciu fluorescenčných materiálov (napr. pečatidlá fisúr, výplne, indikátory plaku a i.)
- Biele svetlo pre presnejšie určenie farby zuba, výplní, protetiky, určenie odtieňa pri bielení a i.
- Externé polymerizačné a diagnostické šošovky VALO X (sú súčasťou balenia - 5 ks celkom)

Kit 505973:

- 1 × VALO X LED lampa
- 5 × externá šošovka (polymerizačná bodová, polymerizačná ProxiBall, diagnostická interproximálna, diagnostická transluminačná, diagnostické UV svetlo)
- 2 × nabíjacia batéria
- 1 × nabíjačka batérií
- 1 × el. kábel pre napájanie nabíjačky alebo káblového adaptéra
- 1 × káblový adaptér, držiak na lampu
- 1 × oranžový ochranný štítok proti modrému svetlu
- 1 × vzorkové balenie ochranných nálevkov

2 072,00 € ~~2 590,00 €~~

LED polymerizačné lampy

**ZÁRUKA
5 ROKOV!!**



**VALO
GRAND**

- širokospektrálne LED diódy s rozsahom vlnových dĺžok 385 – 515 nm
- na polymerizáciu všetkých dentálnych materiálov
- kolimovaný zväzok svetelných lúčov

3 polymerizačné režimy:

- štandard (1 000 mW/cm²)
- vysoký (1 600 mW/cm²)
- extra vysoký (3 200 mW/cm²)

Možnosť polymerizácie na 3 sekundy na vrstvu.
Odolné proti poškodeniu pádom a poškrabaniu.

TIP

s VALO LED lampou ušetríte – spolymerizujete spoľahlivo za 3 sekundy¹

¹ dbajte na odporúčania výrobcov kompozitných materiálov ohľadom množstva energie v J potrebné na polymerizáciu.

**10 %
ZĽAVA**

Kit 505972: VALO Grand Cordless LED lampa čierna

1 863,00 € ~~2 070,00 €~~

Kit 504866: VALO Grand Cordless LED lampa polnočná modrá

1 863,00 € ~~2 070,00 €~~

Kit 504865: VALO Grand Cordless LED lampa oranžová Red Rock

1 863,00 € ~~2 070,00 €~~

Kit 504864: VALO Grand Cordless LED lampa zafírová modrá

1 863,00 € ~~2 070,00 €~~

Kit 505971: VALO Grand LED lampa káblová


1 737,00 € ~~1 930,00 €~~

Porcelain Etch a Silane

Leptadlo a silan na keramiku



Povrch keramiky pred leptaním

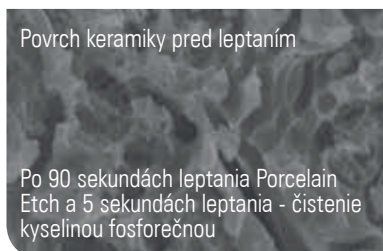

Po 90 sekundách leptania Porcelain Etch a 5 sekundách leptania - čistenie kyselinou fosforečnou

- Pufrovaná 9% kyselina fluorovodíková
- Na intraorálne aj extraorálne leptanie keramiky
- Nesteká
- Nezafarbuje kompozity ani živicové cementy
- 90 sekúnd leptanie, oplach, 60 sekúnd Ultradent® Silane

ZĽAVA
20%

500405 Porcelain Etch Kit:	2×1,2ml Porcelain Etch, 2×1,2ml Silan, 20× kanyla Black Mini Brush, 20× kanyla Inspirat Brush	99,90 €	125,00 €
500406 Porcelain Etch Refill:	2×1,2 ml striekačka	37,60 €	47,00 €
501019 Porcelain Etch & Silane:	2×1,2 ml striekačka + 20 kanýl	52,80 €	66,00 €
500410 Silan Refill:	2×1,2 ml striekačka	29,60 €	37,00 €
501108 Porcelain repair kit		205,60 €	257,00 €

Composite Wetting Resin - zvlhčovacia živica pre lepšiu modeláciu kompozita

- Svetlom tuhnúca hydrofóbná živica plnená zo 45%
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Zlepšuje modeláciu tuhších kompozitov
- Zabraňuje lepeniu na nástroj
- Nezoslabuje oteruvzdornosť a pevnosť kompozitu
- **Extrémne dlhá expiračná doba 40 mesiacov**

503059 striekačka 2×1,2ml 62,40 € 78,00 €



ZĽAVA
20%

Tip:

Nepoužívajte na zvlhčenie kompozitov bondy. Bondy sú plnené z cca 7%, obsahujú rozpúšťadlá a/alebo leptáciu zložku a ich použitie na zvlhčenie vedie k oslabeniu kompozitnej výplne.

Opalescence® PF PROFESIONÁLNE BIELENIE S DLHODOBÝM VÝSLEDKOM, BEZPEČNÉ PRE VAŠE ZUBY

- stabilný bieliaci gél s kontrolovaným uvoľňovaním kyslíka = zaručená koncentrácia po celú dobu životnosti
- rozloží viac zafarbovujúcich pigmentov = vybielený odtieň dlhšie vydrží
- **20%** vody chráni pred dehydratáciou zubov a návratom k pôvodnému odtieňu
- **formula PF** (fluorid sodný a dusičnan draselný) chráni pred citlivosťou zubov pri a po bielení
- pH 6,9 – šetrný k zubnej sklovine
- jediný vysoko viskózný lepkavý gél = nevyteká z nosiča
- jediný gél, ktorý posilňuje mikrotvrdosť skloviny
- príchuť: mäta, melón, bez príchuť
- doba bieliaceho cyklu: v priemere **5-10 aplikácií**
- 1/3 - 1/2 striekačky na 1 nosič

Nočné bielenie Opalescence® PF 10%

10% karbamidu peroxidu

Doba 1 aplikácie: 8-10 hodín/ noc

Denné bielenie Opalescence® PF 16%

16% karbamidu peroxidu

doba 1 aplikácia: 4-6 hodín/ deň

Vybielené zuby s úžasne dlhou výdržou odtieňa (až niekoľko rokov)
– nie je potrebné prebieľovať každý mesiac!

10%
zľava



Opalescence™
tooth whitening systems

Tip:

Bielenie doplníte Bieliacou zubnou pastou Opalescence Originál alebo Opalescence Sensitivity Relief.

Na výrobu bieliaceho nosiča používajte fólie s hrúbkou **0,9 mm**, silnejšie fólie môžu byť príčinou citlivosti zubov pri bielení.

Bieliaci nosič MUSÍ MAŤ rezervoáre!

Bez nich je významne znížený účinok bielenia a predlžuje sa celková doba bielenia.

Pacient Kit (8 x 1,2 ml striekačka Opalescence PF, 1 x 25 ml bieliaca zubná pasta Opalescence, 1 x krabička na nosiče, 1 x kartička vzorkovník odtieňov) **90,00 € 400,00-€**

Doktor Kit

8 x 1,2 ml striekačka Opalescence PF, 2 x fólie Soft Tray, 1 x 1,2 ml LC Block-Out Resin, 1 x 25 ml bieliaca zubná pasta Opalescence, 1 x krabička na nosiče, 1 x kartička vzorkovník odtieňov **98,10 € 400,00-€**

Refill (40 x 1,2 ml striekačka Opalescence PF) **315,00 € 350,00-€**

BIELIACA ZUBNÁ PASTA Opalescence®

CHRÁNÍ ZUBY PRED PIGMENTÁCIOU. SKVELO UDRŽÍ BIELY ODTIEŇ. SKVELO CHUTÍ.

Bieliaca zubná pasta Opalescence Original

4,8x väčšia absorpcia fluoridov sklovinou (spĺňa špecifikácie ADA)

Balenie: 12x 133 g, 24x 28 g

Bieliaca zubná pasta Opalescence Sensitivity Relief pre citlivé zuby

znižuje citlivosť zubov - napr. po bielení

5% dusičnanu draselného na zníženie citlivosti

Balenie: 12x 133 g, 24x 28 g

Original 12x133 g	118,80 €	132,00-€
Sensitivity 12x133 g	129,60 €	144,00-€
Original 133 g	11,00 €	
Sensitivity 133 g	12,00 €	

10%
zľava

iba pri objednaní
orig. balenia 12 ks



Jediné MTA, ktoré pretečie kanylou NaviTip 29ga.

ENDO-EZE™
Ultradent Endodontics

MTA FLOW WHITE

Opravný mineral-trioxid- aggregate cement pre endodontické ošetrenie. Vhodný aj pre aplikáciu **nad klinickou líniou**. Nezafarbuje.



- ultrajemný zrnitý prášok a proprietárne **gélové médium**
- hladká konzistencia pre každú procedúru
- odolný proti vymývaniu
- presné dávkovanie až k apexu pomocou kanyly
- **NaviTip 29ga Single port/ NaviTip 29ga**
- bioaktívny, podporuje hojenie

Kit: 8-10 aplikácií

- 1× MTAFlow White prášok (2g)
- 1× MTAFlow White gél (2ml)
- 1× odmerka s 2 odmernými koncami
- 20× kanyla Black Micro
- 10× striekačka Skini
- 10× uzáver Luer Lock
- 1× sprievodca technikou miešania,
- 1× návod

505980 MTAFlow White kit **207,90 €** 231,00€

NaviTip® Single SidePort 29ga®

Aplikačná kanyla na nanášanie UltraCal XS, MTAFlow, MTAFlow White

1 otvor po strane bráni pretlačeniu materiálu cez apex dĺžky 17, 21, 25 alebo 27 mm

20× kanyla **73,80 €** 82,00€



NaviTip® 29ga, 30ga

Aplikačná kanyla na endodontické ošetrenie v dĺžkach 17, 21, 25 a 27 mm

29ga (0,33mm): pre EndoRez, UltraCal XS, File-Eze a MTAFlow/ MTAFlow White

30ga (0,30mm): pre hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlórhexidínu, UltraEtch

20× kanyla **69,30 €** 77,00€
50× kanyla **153,90 €** 171,00€



NaviTip® Double SidePort 31ga®

Aplikačná ohybná kanyla 31ga (0,28mm) pre hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlórhexidínu, UltraEtch

2 otvory po stranách bránia pretlačeniu kvapaliny cez apex - dĺžky 21 mm alebo 27 mm

20× kanyla **78,30 €** 87,00€
50× kanyla **167,40 €** 186,00€



NaviTip FX 30ga®

Aplikačná kanyla pre Citric Acid

multifunkčná kanyla: čistí, oškrabuje a vyplachuje, pevná kanyla 30ga (0,30 mm)
dĺžky 17 alebo 25 mm

20× kanyla 17 mm **80,10 €** 89,00€
20× kanyla 25 mm **80,10 €** 89,00€



**ZĽAVA
10%**

U2
ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

**BIELIENIE NEVITÁLNYCH ZUBOV
TECHNIKOU WALKING BLEACH**
Opalescence™ Endo

- Viskózný lepkavý gél s 35% peroxidu vodíka.
- Pre techniku „walking bleach“ na 3-5 dní.
- Aplikácia zo striekačky do dreňovej dutiny zuba, ľahko sa odstráni.
- Dlhá trvanlivosť vybieleného odtieňa.
- **Pozor: iba na bielenie nevitálnych zubov!**
- Opalescence Endo Kit: 2x striekačka 1,2 ml, 20x kanyla BlackMini.
- Opalescence Endo Refill – 2x 1,2ml striekačky.


TIP

Na dočasné uzavretie kavity použite dočasný karboxylátový cement bez eugenolu UltraTemp Regular (kompatibilný s peroxidom vodíka) alebo provizórnu svetlom polymerizovateľnú živicu J-Temp.

Endo kit | obj. č. 501270 | **122,40 €****

136 €

Endo refill - 2x 1,2 ml | obj. č. 501323 | **116,10 €****

129 €

PROVIZORNÝ HYDROFILNÝ CEMENT BEZ EUGENOLU NA ŽIVIČNEJ BÁZE
UltraTemp™ REZ II

- Na fixáciu provizórnych náhrad, ak je požadovaná dlhšia retencia (2–4 týždne).
- RTG kontrastný.
- Fluorescenčný - dobre viditeľný pod UV svetlom.
- Výborne tesní.
- Odoláva žuvacím silám a slinám (protetika dobre drží).
- Zloženie bez eugenolu nebude narušovať vážobnú silu.
- **Nevhodný v kombinácii s peroxidovými prípravkami!**



Regular Set Kit | obj. č. 506060 | **92,70 €****

103 €

Fast Set Kit | obj. č. 506061 | **92,70 €****

103 €

**PROFESIONÁLNE ORDINAČNÉ BIELIENIE NA LIEČBU MEDICÍNSKYCH ZMIEN
ODTIEŇOV ZUBOV**
Opalescence Boost 40%

- Bieliaci gél s **40% peroxidu vodíka**.
- Iba na **2x20 min** pri jednej návšteve.
- **PH 6,9** po zmiešaní – šetrný ku sklovine.
- **20%** vody-minimálna dehydratácia pri bielení.
- Na bielenie celého čelustného oblúka alebo iba jednotlivých zubov.
- O použití Opalescence Boost rozhoduje **zubný lekár**.

- Viac informácií o produkte u Vášho obchodného zástupcu. Pred použitím si prečítajte návod na použitie.
- Balenie: Pacient kit (pre 1 pacienta), Intro kit (pre 2 pacientov), refill.
- **Certifikát CE platný do 2028.**



Intro kit | obj. č. 504750 | **253,80 €****

282 €

Pacient kit | obj. č. 504751 | **138,60 €****

154 €

refill - 20x 1,2 ml | obj. č. 504754 | **630 €****

700 €

PROVIZORNÁ SVETLOM TUHNÚCA ŽIVICA
J-Temp™

- Rádiopáka, svetlom tuhnúca, zatekavá provizórna živica na metakrylátovej báze.

KLINICKÉ INDIKÁCIE: 4 V 1


Dočasné výplne (endodontické, inlaye / onlaye, dostavba hrboľčiek, bielenie walking bleach).



Doplnenie zubnej štruktúry na upevnenie kofferdamovej spony a ako bariéry proti endodontickým irigantom.



Dlahovanie medzi viacerými kapkami implantátu, pri odtlačkoch na zamedzenie deformácií odtlačkovacieho materiálu.



Frontálne zhryzy a dočasné zhryzové valy počas ortodontickej liečby, dočasné oklúzne dostavby v ortodoncii



kit 4x 1,2 ml + 20 kanýl | obj. č. 504897 | **47,70 €****

53 €

SEKČNÝ MATRICOVÝ SYSTÉM

HALO™

Nitinolové krúžky

- Super-elastická zliatina niklu a titánu vydrží viac ako 1000 použití.
- Obrisy krúžkov s výstupkami bezpečne držia matricový pásik v prirodzenom anatomickom tvare.
- Prevedenie dovoľuje použitie pri výplniach MOD a iných dostavieb II. tr.

Matricové pásiky

- Anatomicky tvarované na dosiahnutie ideálneho bodu kontaktu.
- Zakrivenie okrajovej línie redukuje nutnosť dokončovacích operačných postupov.
- Hrúbka 0,038 mm originál a pevné 0,051 mm, nelepivé.

Klínky

- Stlačiteľný stred umožní anatomické prispôsobenie matrice.
- Jednoduché zavedenie klínku, v prípade potreby je možné použiť niekoľko klínkov naraz.
- Farebné značenie uľahčuje rozpoznanie veľkosti klínkov.

Karuselový zásobník:

- Prehľadný a šetrí čas.
- Ľahko sa dezinfikuje dezinfekciou na povrchy.

Halo™
SYSTÉM SEKČNÝCH MATRÍC



Originál Kit s nástrojmi obj. č. 504831 569,70 €**	633 €
Originál Kit bez nástrojov 426 € obj. č. 504832	264,10 €*
Firm nelepivý bez nástrojov 426 € obj. č. 504833	264,10 €*
HALO Firm bez nástrojov obj. č. 504834 383,40 €**	426 €
Original Minikit bez nástrojov 274 € obj. č. 504835	194,50 €*

RETRAKTOR ÚST, PIER A JAZYKA

Umbrella™

- Prirodzene a jemne pomáha držať ústa pacienta otvorené bez vyťahovania či roztahovania pier a namáhania TMJ.
- Chránič jazyka udržuje jazyk pohodlne opretý mimo pracovnú oblasť.
- Anatomické opierky dovoľujú lekárovi pracovať v ústach pacienta s maximálnou viditeľnosťou a komfortom pre pacienta.
- Umožňuje výborne odsávať počas výkonu, neprekáža v pracovnom poli.
- Nevyvoláva dáviaci reflex u pacientov.
- Pri kontrole zhryzu / odtlačku môže zostať v ústach.

Ako zvoliť veľkosť Umbrellu?

- Ak pacient potrebuje veľkosť odtlačkovej lyžice 2–3, zvolte Umbrellu Medium.
- Ak pacient potrebuje veľkosť odtlačkovej lyžice 4–6, zvolte Umbrellu Large.
- Ak si nie ste veľkosťou istí, zvolte Umbrellu Large.



Skontrolujte, či jazyk pacienta pohodlne leží za chráničom, čo zaisťuje ľahký prístup.



Nedávajte chránič jazyka na hornú stranu jazyka pacienta.

Stredný roztvárač Umbrella, 40 ks obj. č. 505162 122,40 €**	136 €
Veľký roztvárač Umbrella, 40 kusov obj. č. 505258 122,40 €**	136 €
Stredný roztvárač Umbrella, 20 kusov obj. č. 504871 64,80 €**	72 €
Veľký roztvárač Umbrella, 20 kusov obj. č. 505257 64,80 €**	72 €
Stredný roztvárač Umbrella, 5 kusov obj. č. 504870 18 €**	20 €
Veľký roztvárač Umbrella, 5 kusov obj. č. 505256 18 €**	20 €

TIP

Bezpečná pri ordináčnom bielení, neskľazava, neprekáža.



* Ponuka platí do vypredania zásob.

CHCETE PORADIť S PRODUKTMI
ULTRADENT?

Kontaktujte našu produktovú špecialistku,
Ing. Janu Smilkovú
+420 777 779 705, jsmilkova@hufa.cz

ULTRADENT v HŮ-Fa
ÚSMEVOCH VÝHODNEJŠIE!

**Vždy získate minimálne
ZĽAVU 10%
pri nákupe aspoň troch výrobkov

SEALER KOREŇOVÝCH KANÁLIKOV
EndoREZ™

- Hydrofilný self-priming živcový sealer koreňových kanálikov (UDMA).
- Biokompatibilný.
- 3D plnenie, dôkladné utesnenie.
- Zatekavý do apikálnej tretiny aj do tubulov - aplikácia kanylou.
- RTG kontrastný.



Plnenie kanálka pomocou kanyly NaviTip.



Predvídateľný výsledok, dobre kontrolovateľný na rtg snímku, umožňuje opätovné ošetrovanie aj vloženie koreňového čapu.



8 g + 20 kanylí | obj. č. 505900 | **174,60 €**** **194 €**
 akcelerator, 20 ks | | obj. č. 500399 | **77,40 €**** **86 €**

KOMPOZIT NA UTEŠNENIE A ĽAHKÚ INDIKÁCIU VSTUPU DO ENDODONTICKY OŠETRENÝCH KOREŇOVÝCH KANÁLIKOV
PermaFlo™ Purple

- Flow kompozit.
- Na zapečatenie a identifikáciu endodonticky ošetrovaných kanálikov alebo dna pulpy.
- Bráni mikropriesakom.
- **Nepresvitá cez výplne.**
- Balenie: 2x 1,2 ml striekačka, 20x kanyly micro 20ga.



Purple - 2x 1,2 ml + 4 kanyly | obj. č. 500962 | **88,20 €****

98 €
35 % PASTA HYDROXIDU VÁPENATÉHO
UltraCal™ XS

- **Možno dávkovať kanylou NaviTip 29 ga – doporučené.**
- Vysoké pH 12,5.
- Lieči infikované kanáliky, podporuje hojenie kosti.
- Použite vždy, keď nemôžete kanálik vysušiť (mokvanie, krvácanie).

TIP

Upchala sa Vám niekedy kanyla NaviTip 29ga UltraCal XS? Pred použitím UltraCal XS prepláchnite kanylu roztokom hypochloridu sodného alebo chloryhexidínu. Problém týmto vyriešite.



mini kit | **37 €** | obj. č. 501024

27,80 €

refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 505145 | **54,90 €****

61 €

refill - 20x - 1,2 ml | obj. č. 505149 | **187,20 €****

208 €
ROZTOK KYSELINY CITRÓNEVEJ NA ČISTENIE A KONDICIOVANIE KOREŇOVÝCH KANÁLIKOV
Citric Acid™ 20%

- Rozpúšťa a odstraňuje hydroxid vápenatý a smear layer.
- Otvára dentínové tubuly a lubrikuje



30 ml | obj. č. 500329 | **52,20 €****

58 €
TIP


Aplikujte pomocou kanyly NaviTip FX zo striekačky Ultradent 1,2 ml.

DUÁLNE TUHNÚCA KOMPOZITNÁ FIXAČNÁ A DOSTAVBOVÁ ŽIVICA
PermaFlo DC

- Viacnásobné použitie vrátane cementácie čapu, dostavby jadra a fixácia protetiky.
- Najmenšia hrúbka filmu 8 µm.
- Odolný proti oteru.
- Maximálna pevnosť.
- RTG-kontrastný.
- Nízke polymerizačné zmrštenie.
- Zmiešanie v miešacej kanyle.
- Pracovný čas 2,5 minúty, doba chemického tuhnutia 5–8 minút.
- Kompatibilný s technikou totálneho leptania aj samoleptania.

VIAC MOŽNOSTÍ

Zlyhanie nie je ani jednou z nich

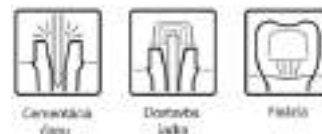

refill - 12 g + 40 kanylí | obj. č. 505913 | **108,90 €****

121 €

INDIKÁTORY KAZU A KALCIFIKOVANÝCH VSTUPOV DO KANÁLIKA

Sable™ Seek™ a Seek™

- Indikátor zubného kazu.
- Zeleno-čiernou farbou označí kariézny dentín a vstupy do koreňových kanálikov.
- Vhodný aj na prácu blízko pulpy.
- **Sable Seek Intro Kit (zelený) obsahuje:** 4x striekačka 1,2 ml, 20x kanyla Brush Mini.
- **Seek Intro Kit (červený) obsahuje:** 4x striekačka 1,2 ml, 20x kanyla Brush Mini.
- **Refill balenie obsahuje:** 4x 1,2 ml striekačka.
- **Econo Refill balenie obsahuje:** 20x 1,2ml striekačka.



1. Demineralizovaný dentín po aplikácii Seek/Sable Seek.



2. Odstránenie kariézneho dentínu (zeleno/červeno-čierna farba).



3. Kontrola odstránenia kazu pomocou Seek/ Sable Seek.



Seek/Sable Seek intro kit - 4x 1,2 ml + 20 kanýl | obj. č. 500209 | **99,90 €**** **111 €**

Sable Seek mini kit - 2x 1,2 ml + 10 kanýl | obj. č. 501021 | **52,20 €**** **58 €**


Seek/Sable Seek refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500234 | **75,60 €**** **84 €**

Sable Seek econo refill - 20x 1,2 ml | obj. č. 501805 | **278,10 €**** **309 €**

LUBRIKANT KOREŇOVÝCH NÁSTROJOV PRI ENDODONTICKOM OŠETRENÍ

File-Eze™ EDTA Lubrikant

- 19% EDTA viskózný gél.
- Rozpustný vo vode: ľahko sa vyplachuje.
- **NEOBSAHUJE** peroxid vodíka - vhodný pri následnom použití svetlom tuhnutých živcových plnín (napr. Endo-REZ).
- Aplikácia tiež priamo do kanálika kanylou Navi Tip.
- **Balenie** 500682: IndiSpense 30 ml.
- 501075: Intro Kit 4x 1,2 ml striekačka, 20x kanyla Black Mini.
- 500297: Refill: 4x 1,2 ml striekačka.

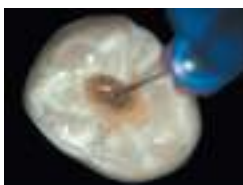

1. Naneste File-Eze pomocou kanyly NaviTip do kanálika. Môžete naniesť File-Eze priamo na nástroj. Opracujte kanálik.



TIP

Používajte pri opracovaní kanálika a tvarovaní V-zón. Nepretláčajte materiál cez apex. Nepoužívajte miesto roztoku EDTA (posledný výplach na otvorenie dentínových tubulov).

intro kit | obj. č. 501075 | **110,70 €**** **123 €**

refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500297 | **65,70 €**** **73 €**

IndiSpense - 30 ml | obj. č. 500682 | **156,60 €**** **174 €**




2. File-Eze vypláchnite z kanálika roztokom hypochloridu sodného. Keď sa hypochlorid sodný zmieša so zvyškami File-Eze, vzniká šumivá zmes, ktorá má prídavný čistiaci účinok a odstráni z kanálika prebytočný materiál.


VÝPLACHOVÁ KVAPALINA NA OTVORENIE DENTÍNÝCH TUBULOV PO OPRACOVANÍ KANÁLIKA

EDTA 18% roztok

- Posledná výplachová kvapalina pred použitím chlórhexidínu
- Ponechať v kanáliku 30-60 sekúnd, potom opláchnuť fyziologickým roztokom alebo sterilnou vodou
- **Balenie obsahuje:** IndiSpense 30 ml

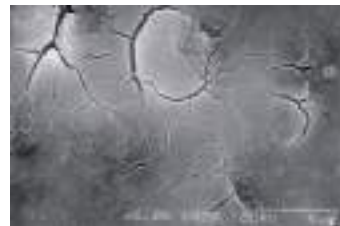

1. Kanálik po opracovaní pred použitím EDTA.

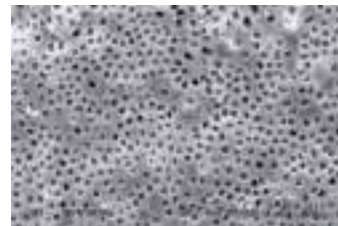

2. Kanálik s otvorenými dentínovými tubulmi po výplachu roztokom EDTA



30 ml | obj. č. 500162 | **29,70 €****

33 €

SVETLOVODNÉ KOREŇOVÉ ČAPY ZO SKLENENÝCH VLÁKIEN PRE POST-ENDO

UniCore™

- Farebné značenie pre ľahké odlišenie veľkosti.
- Mikroporézny povrch zaisťuje mikromechanickú retenciu.
- Nevyžaduje žiadne chemické ošetrovanie/kondicionovanie pred použitím.
- RTG-kontrastné podľa najvyšších noriem ISO.
- Priesvitný čap prenáša svetlo v celej hĺbke preparácie.
- Konicita zodpovedá prirodzenej anatómii zuba.
- Možno ho dobre odstrániť, pokiaľ je nutné opakované endodontické ošetrovanie.

- Veľkosť 0 (apikálny priemer 0,6 mm)
- Veľkosť 1 (apikálny priemer 0,8 mm)
- Veľkosť 2 (apikálny priemer 1 mm)
- Veľkosť 3 (apikálny priemer 1,2 mm)
- Veľkosť 4 (apikálna priemer 1,5 mm)



Hlavný čap na mieste.



Dodatočné príslušenstvo pre čapy.



Konečný stav.



starter kit | obj. č. 507132 | **195,30 €**** **217 €**

čapy veľkosť 0 - 5 ks | obj. č. 507135 | **70,20 €**** **78 €**

čapy veľkosť 1 - 5 ks | obj. č. 507125 | **70,20 €**** **78 €**

čapy veľkosť 2 - 5 ks | obj. č. 507126 | **70,20 €**** **78 €**

čapy veľkosť 3 - 5 ks | obj. č. 507127 | **70,20 €**** **78 €**

čapy veľkosť 4 - 5 ks | obj. č. 507128 | **70,20 €**** **78 €**

CHCETE PORADIť S PRODUKTMI ULTRADENT?

Kontaktujte našu produktovú špecialistku,
Ing. Janu Smilkovú
+420 777 779 705, jsmilkova@hufa.cz

ULTRADENT v HŮ-Fa
ÚSMEVOCH VÝHODNEJŠIE!

****Vždy získate minimálne ZĽAVU 10% pri nákupe aspoň troch výrobkov**

IZOLÁCIA PRI DENTÁLNYCH VÝKONCH
DermaDam™

- Kofferdam na izoláciu, nepudrovaný, vysoko odolný proti pretrhnutiu.
- DermaDam medium 0,20 mm 15 x 15 cm, 36 ks.
- DermaDam heavy 0,25 mm 15 x 15 cm, 36 ks.


 medium - 36 ks | obj. č. 500311 | **55,80 €****
62 €

 heavy - 36 ks | obj. č. 500314 | **65,70 €****
73 €
VÝPLACHOVÁ KANYLA NA ENDODONTICKÉ OŠETRENIE
Endo-Eze Irrigator 27G

- Ohybná kanyla s unikátnym zakončením.
- Zaisťuje ideálny dosah a súčasne znižuje riziko vytlačenia chemikálií ku stene kanálíka.
- Znižuje tlak pôsobiaci priamo na apex.
- Dĺžka 25 mm.

- Pozn. Kanyly sú **NESTERILNÉ!**


 Endo-Eze Irrigator 27G - 20 ks | obj. č. 500207 | **23,40 €****
26 €
TESNENIE A TMEL POD KOFFERDAM
OraSeal™

- Efektívne prilne k vlhkému kofferdamu, tkanivám, zubom a kovu.
- Prilne aj pod vodou a slinami – oprava pretrhnutého kofferdamu pri ošetrení.
- Chráni pred kontaktom gingívy/orálneho tkaniva s chemikáliami (peroxid vodíka, kyselina fluorovodíková a i.)

- OralSeal Kit 500352: 2x1,2 ml OraSeal Tmel, 2x1,2 ml OraSeal tesnenie, 20x kanyla White Mac Mini.


 OraSeal kit | obj. č. 500352 | **60,30 €****
67 €

 OraSeal tesnenie - 4x 1,2 ml | obj. č. 500351 | **47,70 €****
53 €

 OraSeal tmel - 4x 1,2 ml | obj. č. 500353 | **47,70 €****
53 €
Kanyly Endo Eze™

- Jednorazové ohybné endodontické kanyly pre endodontické výkony (fixácia čapu a dostavby jadra, odsávanie vzduchu/vody z kanálíka).
- Pružná, pevná ihla sa ľahko ohne.
- Dĺžka: 19 mm.
- Balenie:
- 5034xx: 18ga, 19ga, 20ga alebo 22ga, balené po 20
- 5014xx: 18ga, 19ga, 20ga alebo 22ga, balené po 100 ks


 Endo-Eze kanyly - 20 ks | | obj. č. 500345 | **22,50 €****
25 €

 Endo-Eze kanyly - 100 ks | obj. č. 501430 | **93,60 €****
104 €
Ultradent™ Luer Vacuum Adapter + Capillary Tips

- Odsatie irigantov a debritu.
- Capillary Tips v priemeroch 0,014" (fialová) a 0,019" (zelená).


 Luer adaptér - 10 ks | obj. č. 500230 | **35,10 €****
39 €

 Capillary tips 0,35 mm - 20 ks | obj. č. 500341 | **27,90 €****
31 €

 Capillary tips 0,48 mm - 20 ks | obj. č. 500186 | **27,90 €****
31 €

 Capillary tips 0,35 mm - 50 ks | obj. č. 503099 | **58,50 €****
65 €

 Capillary tips 0,48 mm - 50 ks | obj. č. 501425 | **58,50 €****
65 €

Rozrezávač koruniek ED

- Ideálne na rezanie kovových koruniek, mostíkov a konštrukcií.
- Balenie 5 ks, dĺžka do turbíny (FG), odporúčané otáčky: max. 160 000 ot/min.



570H31RPC10 / 12 - Ideálny na rezanie kovových koruniek, mostíkov a konštrukcií. Rozrezávač je veľmi aktívny a práca s ním rýchla. Super dlhá životnosť (Ø10 a Ø12).

H31RPC.314.010 - 5 ks | **4,40 €** | obj. č. 570H31RPC10 **3,80 €**

H31RPC.314.012 - 5 ks | **4,40 €** | obj. č. 570H31RPC12 **3,80 €**

Rozrezávač koruniek Edenta

- Ideálny pre všetky typy kovových zliatin, titán, nízkotavitelnú keramiku a kompozitné fazety.
- Balenie 5 ks, dĺžka do turbíny (FGL).
- Odporúčané otáčky: 120 000 - 160 000 ot/min.



570C4AKL2 - Ideálny pre všetky typy kovových zliatin, titán, nízkotavitelnú keramiku a kompozitné fazety (Ø12).

C4AKL - 6 ks | **6,50 €** | obj. č. 570C4AKL2

5,50 €

Endostar EndoSTOPPER

- Žltý pomocník na sledovanie počtu použitých endodontických nástrojov.
- Balenie obsahuje 100 kusov.



EndoSTOPPER žltý, 100 ks | **17 €** | obj. č. 59118011

15,40 €

H-File

- Kvalitné oceľové rozširovače pre ručné opracovanie koreňových kanálikov.
- Zaisťujú rýchle a efektívne prístupenie a vyčistenie koreňového kanálika.
- Dostupné v rozmeroch: 21 mm, 25 mm, 28 mm a 31 mm.



6 ks | **10,30 €** | obj. č. 5974008

8,80 €

SurgiFlexo savky

- Koncovka EM45 SurgiFlexo je flexibilná sterilná savka vhodná pre chirurgickú aspiráciu, najmä pre apektómie, gingiválne štepy a implantologické operácie s obmedzeným operačným priestorom.
- Ideálne v ťažko prístupných oblastiach, napríklad pri operáciách distálnych zubov - osmičiek.
- Možnosť ohýbania savky a odskrutkovania hrotu umožňuje jej prispôbenie rôznym potrebám aspirácie počas rôznych fáz operácie.



20ks + 2 adaptéry | **40 €**

34,70 €

Ten správny partner pre Váš koreňový nástroj

X-Smart® Pro+

Endodontický motor s integrovaným apexlokátorom

X-Smart Pro+ umožňuje rozsah krútiaceho momentu až 7,5 N·cm a rozsah rýchlostí 3 000 ot./min. Špeciálne navrhnutý pre použitie s endodontickými systémami nástrojov Dentsply Sirona v režime reciprokácie aj kontinuálnej rotácie.

Integrovaný apexlokátor zaisťuje presnosť pri dosiahnutí apexu. X-Smart Pro+ disponuje s kolienkovým násadcom s integrovaným 10-Im LED svetlom, autoklárovateľným plášťom, dotykovým rozhraním umožňujúcim ľahký prístup k nastaveniam pre zvolené nástroje a aktualizovateľným firmware-om.

Viac informácií nájdete na: www.dentsplysirona.com/Xsmart

JEDINÝ, skutočný a pôvodný ORIGINAL

- neuveriteľne flexibilný
- tkané pomocou patentovanej krížovej (záмок-steh) väzby
- super jednoduché použitie
- výnimočné výsledky

Ribbond je dlahovacia páska vyrobená z rovnakých, vysoko pevných polyetylénových vlákien používaných na výrobu nepriestrelných viest.



Klinický prípad /Dr. E.T.Carlson Ribbond mostík počas jednej návštevy



Použitie Ribbond pre vytvorenie mostíka



Hotový Ribbond mostík

Ribbond THM Hrúbka: 0,18 mm, dostupný v troch šírkach - 2 mm, 3 mm a 4 mm.
 Starter kit | obj. kód: 588030

3 × 22 cm vlákien o šírkach 2, 3 a 4 mm,
 Ribbond nožnice a mäkkú cínovú fóliu na meranie v ústach
 (68 cm vystačí na cca. 20 dláh očný zub-očný zub).

288,40 € 339,00 €

Mini kit | obj. kód: 588031

1 × 22 cm vlákna šírka 3 mm,
 Ribbond nožnice a mäkkú cínovú fóliu na meranie v ústach.

157,10 € 182,60 €

Refill kit

3 × 22 cm vlákna v jednej šírke. (šírky 2, 3 alebo 4 mm)

243,40 € 270,00 €



Najviac zrejmy rozdiel medzi Ribbond a inými vláknovými výstužami je jeho ovládateľnosť. Ribbond nemá prakticky žiadnu pamäť a nestrápa sa, keď je prispôbovaný na zubu.

Viac informácií o produkte:

Enzymatická exkavácia infikovaného kariézneho dentínu

BRIX3000®



Enzymatická exkavácia infikovaného kariézneho dentínu s **BRIX3000®**

- navrhnutý špeciálne pre atraumatické a bezbolestné odstraňovanie zubného kazu z dentínu
- neinvazívny produkt na vodnej báze, ktorého hlavnou zložkou je enzým PAPAIN

Je to také ľahké!

Po aplikácii do kavity sa gél nechá pôsobiť 2 minúty, počas tejto doby sa spustí proteolýza na devitalizovanom dentíne, ktorá ho zmäkčí. Zmäknutý kariézny dentín sa odstráni jemným kyvadlovým pohybom neostrým exkavátorom.

Prečo používať enzymatický gél **BRIX3000®** vo vašej ordinácii?

- úspešne odstraňuje infikovaný dentín bez toho, aby zasiahol zdravý dentín v kariéznej lézii
- funguje úplne v súlade s modernou koncepciou minimálne invazívnej stomatológie
- bez bolesti, prehriatia, vibrácií, hluku pri vŕtaní a zároveň biologické a šetrné pôsobenie na zubnú dreň
- antibakteriálne vlastnosti gélu umožňujú prevenciu sekundárnych recidivujúcich a mnohopočetných kariéznych lézií

Viac sa dozviete v odbornom článku na tému **Chemicko-mechanické odstránenie infikovaného dentínu pri liečbe zubného kazu, ktorý vyšiel v časopise Stomateam č. 1/2023, načítajte si QR kód.**

obj. kód: 530383 3 ml **70,90 €** 74,80 €



bit.ly/BrixST2301



Všestranné pohyby

Systém elements Connect ponúka osvedčený Kerrov adaptívny pohyb, ako aj recipročné a rotačné pohyby v jednom motore, čo lekárom umožňuje zachovať existujúce techniky a protokoly.

Prednastavenie

Predvoľby pre 9 Kerrových nástrojov, 1 nastavenie pre vzájomný pohyb a 4 prispôsobiteľné nastavenia.

Žiadne zbytočné prerušenia



Súčasťou balenia sú dve vymeniteľné batérie, aby ste mali vždy jednu nabitú a mohli bezpečne dokončiť postup bez prerušenia.

Zabudovaná presnosť

Presnosť merania zabezpečuje funkcia automatickej kalibrácie Apex Connect, ktorá sa aktivuje pri každom zapnutí prístroja.

Dôvera v správne opracovanie

Počas postupu môžete sledovať údaje o pracovnej dĺžke v reálnom čase pomocou inteligentného svetelného indikátora meniaceho farbu, ako aj pomocou zvukových indikátorov pri dosiahnutí vrcholu.

elements™ Connect a Apex Connect

Bezdrôtový endodontický motor a elektronický apexlokátor

Bezproblémové pripojenie. Viac dôvery.

Tvarujte s istotou vďaka intuitívnym prvkom Connect a Apex Connect. Prepojený systém, ktorý je navrhnutý tak, aby bez problémov spolupracoval, podporuje bezpečnosť pacientov a zároveň zjednodušuje vaše postupy.

Požiadajte svojho obchodného zástupcu spoločnosti Kerr o špeciálnu ponuku.

SimpliShade Bulk Fill

- Jednoduchosť vďaka jednému odtieňu a jednému kroku.
- S materiálom SimpliShade™ Bulk Fill je teraz ešte jednoduchšie vytvárať krásne výplne, získate adaptabilitu, odolnosť, hĺbku vytvrdenia a jednoduchosť, ktorú potrebujete.
- Vďaka jednému odtieňu, ktorý pokryje všetkých 16 klasických odtieňov VITA® môžete vynechať kryciu vrstvu s jednokrokovým umiestnením a znížiť svoje skladové zásoby.

AKCIA
1 + 1



4 g obj. č. 5263121	67,20 €
20x 0,25 g obj. č. 5263122	89,10 €
2x 2 g obj. č. 5263123	67,20 €
20x 0,25 g obj. č. 5263124	89,10 €

Vertise Flow

- Samoadhézyvny flow kompozitný materiál pre malé výplne I. a II. triedy, liner, pečatenie fisúr a opravy keramiky.
- Dostupné odtiene:** A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, U0, XL a T.



ZĽAVA
36%

refill - 2x 2 g | **110,90 €** | obj. č. 5261A1 **70,60 €**

OptiShade

- Kompozitný výplňový materiál.
- Dostupné odtiene:**
- light - zodpovedá: A1, B1, B2, C1 a D2,
- medium - zodpovedá: A2, A3, C2, D3 a D4,
- dark - zodpovedá: A3.5, A4, B3, B4, C3 a C4,
- bleach white - pre bielené zuby,
- universal opaque.

ZĽAVA
33%



striekačka - 4 g 72,10 € obj. č. 5263111	48,30 €
kompule - 10 ks 57,60 € obj. č. 5263119	43,20 €
kompule - 20 ks 86,50 € obj. č. 5263116	64,90 €

Elements Connect

- Elements Connect** bezdrôtový endodontický motor sa dodáva s dvoma vymeniteľnými batériami pre spoľahlivé napájanie na bezpečné a neprerušované vykonávanie zákrokov.
- Vďaka adaptívnym, recipročným a rotačným pohybom v jednom motore nemusíte meniť svoje zabehnuté techniky a protokoly.
- Navrhnuté so 14 pamäťovými slotmi; 9 prednastavených systémov koreňových nástrojov Kerr, 1 nastavenie pre reciprok a 4 prispôsobiteľné nastavenia.
- Apex Connect** - elektronický Apex lokátor so svetelnými aj zvukovými indikátormi, samokalibrácia pri každom zapnutí.
- Motor aj apexlokátor môžu fungovať samostatne, spoločne však tvoria prepojený systém pre spoľahlivú endodonciu.

TIP

Uľahčíte si prácu a ušetríte -
objednajte si endomotor a apex
lokátor dohromady



Elements Connect endo motor 2 740,40 € obj. č. 59730601	1 645 €
Apex Connect apex lokátor 1 304 € obj. č. 59730602	782,30 €

Drevené klinky Hawe

- Optimálne anatomicky tvarované drevené klinky pre perfektnú adaptáciu matric k zubu.
- Farebné kódovanie uľahčuje identifikáciu veľkosti.
- Veľkosti: mini (č. 05), oranžové (č. 06), biele (č. 07), zelené (č. 08), žlté (č. 10), modré (č. 11), červené (č. 12), biele široké (č. 13) a sortiment (č. 14)



ZĽAVA
22%


100 ks 19,40 € obj. č. 521014	15,70 €
1000 ks 121,60 € obj. č. 521015,xx	94,30 €

OptiDisc

- Disky na tvarovanie, dokončovanie a leštenie kompozit, keramiky, živice, skloionomérov, amalgámu a kovov.
- Priemery:** 9,6 mm, 12,6 mm a 15,9 mm.
- Hrúbky:** hrubý (80 ks) a stredný, jemný, extra jemný (á 100 ks).



ZĽAVA
34%

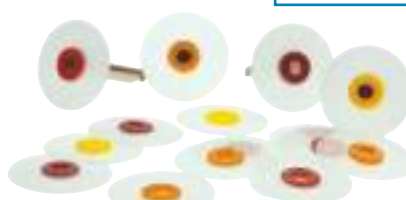

refill - 80 / 100 ks | **46,70 €** | obj. č. 58017C **31 €**

MaxCem Elite

- Dvojzložkový, samoleptací, duálne tuhnúci kompozitný fixačný cement typu pasta-pasta v duálnej striekačke.
- Na fixáciu keramických, kompozitných a kovových náhrad.
- Odtiene:** biely, opákný, číry a žltý.



ZĽAVA
38%

refill - 2x 5 g | **151 €** | obj. č. 53006B **93,30 €**

EndoMatic

Bezdrôtový endomotor a apexlokátor v jednom pre ešte bezpečnejšie endodontické ošetrovanie.

- Poloha koreňového nástroja je zobrazovaná na displeji.
- Pri priblížení k apexu sa chod endomotora automaticky spomalí a pri dosiahnutí apexu endomotor automaticky zastaví nástroj alebo zapne opačný chod.
- Automatické spustenie pri zasunutí nástroja do kanálika a vypnutie pri jeho vytiahnutí.
- Vďaka širokému rozsahu krútiaceho momentu a voľby rýchlosti je kompatibilný s rôznymi systémami koreňových nástrojov dostupných na trhu.
- Pracuje ako v rotačnom režime, tak recipročnom.
- Automaticky prepína medzi týmito režimami s ohľadom na zaťaženie nástroja.
- Odolný povrch endomotora pre ľahkú údržbu, kolienko môže byť autoklávané.
- Krútiaci moment: 0,4 Ncm - 5,0 Ncm,
- Rýchlosť: 100 ot/min ~ 1 000 ot/min.

592614 EndoMatic motor **894,10 €** 1-016,10-€



Detailné informácie nájdete TU: bit.ly/EndomaticS

Endo Radar Plus

Bezdrôtový endo motor so základňou pre ľahké ovládanie a nabíjanie.

Bezuhlíkový, rýchlosť: 100 - 1 200 ot./min, krútiaci moment: 0,4-5,0 N.cm.
Super malinké endokolienko 6:1 pre ľahký prístup v distálnom úseku.
Možnosť 11 užívateľsky definovaných režimov - naprogramujete si presne podľa požiadaviek výrobcu Vašich koreňových nástrojov. Prednastavených viac ako 30 najrozšírenejších systémov koreňových nástrojov. Dlhá výdrž batérie.

Vstavaný apexlokátor na bezpečné a rýchle endodontické ošetrovanie. Zobrazuje polohu nástroja v kanáliku v reálnom čase. Automaticky nástroj zastaví alebo otočí späť, akonáhle nástroj dosiahne apexu, aby sa zabránilo perforácii. Poskytuje tiež funkciu automatického spustenia a zastavenia v prípade, že sa nástroj dostane do/z kanálika.

Obj. kód: 592611 **853,50 €** 975,50-€



Detailné informácie nájdete TU: bit.ly/EndoradarS

Apexlokátor Dpex V

Multifrekvenčný apexlokátor s presnými výsledkami merania aj v znečistenom koreňovom kanáliku.

Jasný LCD displej pre zreteľný obraz a rôzne farby pre prehľadné vykreslenie polohy nástroja v koreňovom kanáliku.
Akustický signál ešte viac uľahčuje orientáciu v kanáliku.
Multifrekvenčná technológia prináša presné meranie za všetkých okolností.
Presné meranie aj v prípade prítomnosti krvi a iného znečistenia.
Meranie nie je ovplyvnené typom zuba.
Automatická kalibrácia.
Autoklávovateľný klip na nástroj, háčik na pery aj sonda.

592606 Woodpecker DTE Apexlokátor Dpex V **324,90 €** 365,60-€



Detailné informácie nájdete TU: bit.ly/DpexVS



BioRoot RCS

- Bioaktívny sealer pre trvalé koreňové výplne.
- Vynikajúca priľnavosť k dentínu a gutaperčovým čapom.
- **Hydrofilný** – BioRoot RCS hermeticky zapečatí aj v prítomnosti vlhkosti.
- Bioaktívna obturácia – stimuluje regeneráciu kosti a podporuje periapikálne hojenie.
- **Antimikrobiálny** – pH >11, uvoľňuje hydroxid vápenatý.
- Čisté minerálne zloženie – nezafarbí zuby.
- Bez živice = nulové zmrštenie - vyrobený z čistého kremičitanu vápenatého.
- **Skvelá zatekavosť** – utesní aj všetky vedľajšie kanáliky.
- Výška rádiopacity 5 mm Al pre jasnú viditeľnosť na röntgenových snímkach.
- **Balenie obsahuje:**
15g prášku a 35 ks pipiet s tekutinou.


15 g + 35 pipiet | **314,60 €** | obj. č. 530392

240 €

BioRoot Flow

- NOVÝ biokeramický tmel na báze čistého tricalcium fosfátu na koreňové kanáliky v injekčnej striekačke, vďaka ktorému je obturácia jednoduchá a úspešná pri plnení za studena aj za tepla.
- Striekačka pripravená na použitie.
- Optimálna hrúbka a tekutosť.
- Studené a teplé techniky.
- Pracovný čas >60 min.
- Doba tuhnutia 5 - 6 hod.
- Antibakteriálny pH 11,5.
- Vysoké uvoľňovanie vápnika. 1718 mg/l

NEW


Striekačka 2g | **180 €** | obj. č. 5303913

145 €

CanalPro

CanalPro CHX 2%

- 2% roztok chlórhexidín-diglukonátu na preplachovanie a čistenie systému koreňových kanálikov.
- Ideálny ako finálny výplach pred plnením kanálika.
- Dezinfikuje kanálik účinný hlavne proti baktériám E.fekális a hubám.

CanalPro EDTA

- 17% roztok EDTA (Ph 8,5) na ošetrovanie koreňového kanálika.
- Zvyšuje účinok dezinfekčných roztokov.
- Zlepšuje adhéziu koreňových výplňových materiálov.


CHX 2% - 500 ml | **76,50 €** | obj. č. 530525

57,40 €*

EDTA 17% - 500 ml | **99 €** | obj. č. 530530

74,30 €*

DC Kältespray

- Mraziaci spray na zisťovanie vitality zubov, dosahuje teplotu -45 °C.


200 ml | **4,50 €** | obj. č. 530322

4,10 €

5x 200 ml | **20,80 €** | obj. č. 530322x

17,20 €

Endostar E3 Azure

- Ponúka efektívne a jednoduché použitie, rýchle a bezpečné opracovanie kanálika.
- Sú veľmi flexibilné - sledujú aj najkrivšiu cestu kanálikom a minimalizujú tým riziko perforácie alebo via falsa.

ZADARMO

pri nákupe balenia 6 kusov, získate zadarmo nástroje v balení po 3 kusoch
ALEBO bezpečnostné endostopéry (100 ks - 59118011) na značenie počtu použitých nástroja*



3 ks | obj. č. 59112100

43,10 €

6 ks | obj. č. 59112125

63,80 €

* Ponuka platí do 31.3.2025 a potom do vypredania zásob.

TheraCal LC®

LINER A PREKRYTIE PULPY. THERA SPÔSOB.

TheraCal LC je svetlom tuhnutí, živcou modifikovaný kalciumsilikátový podložkový materiál, určený na použitie pri priamom a nepriamom krytí pulpy, ako ochranná vložka pod kompozity, amalgámy, cementy a ďalšie výplňové materiály. Možno ho použiť ako náhradu za hydroxid vápenatý, skloionomér, RMGI, IRM/ZOE a ďalšie materiály.

TheraCal LC funguje ako izolátor/bariéra a ochrana pulpy.

Aplikácia prípravku TheraCal LC priamo zo striekačky ponúka kontrolované a presné umiestnenie vo všetkých hlbokých kavitách. S prípravkom TheraCal LC sa ľahko manipuluje bez toho, aby dochádzalo k jeho stekaniu alebo zosúvaniu, a jeho schopnosť polymerizovať svetlom umožňuje okamžité umiestnenie definitívneho výplňového materiálu.

Tekutý apatit na dosah ruky

Ochranný liner: TheraCal LC je možné použiť ako liner pod výplňové materiály, cementy alebo iné výplňové materiály.

Prípravok na prekrytie pulpy: TheraCal LC je možné po dosiahnutí hemostázy umiestniť priamo na pulpálne expozície. Je indikovaný pre všetky pulpálne expozície, vrátane kariéznych, mechanických alebo spôsobených traumatom.

Vedeli ste, že?

Patentované hydrofilné zloženie prípravku TheraCal LC sa skladá z častíc trikalcium silikátu v hydrofilnom monomére, ktorý zaisťuje významné uvoľňovanie vápnika, vďaka čomu je jedinečne stabilný a trvanlivý ako liner aj na prekrytie exponovanej pulpy.



Výhody produktu Thera

Uvoľňovanie vápnika stimuluje tvorbu hydroxyapatitu a sekundárneho dentínového mostíka



Výrazné uvoľňovanie vápnika vedie k ochrannému tesneniu



Alkalické pH 10-11 podporuje hojenie, vitalitu pulpy a tvorbu apatitu



Vytvára ochrannú bariéru, ktorá izoluje pulpu, čo vedie k tomu, že po ošetrení prakticky nevzniká citlivosť



Toleruje vlhkosť, neresorbuje a je RTG kontrastný

Rýchle tipy k prípravku TheraCal LC

Aplikujte na viditeľne vlhký dentín.



Aplikujte vo vrstvách <1 mm.



Polymerizujte svetlom po dobu 20 sekúnd.



530189 TheraCal LC 1 g + 15 kanýl

43,10 € 48,00 €

530188 TheraCal LC set 4x 1 g + 50 kanýl

135,00 € 150,80 €

Jedna injekčná striekačka s 1 g prípravku TheraCal LC vystačí na cca 15 aplikácií.



Zoznámte sa s Rodinou Thera

Jedinečné materiály, ktoré riešia problémy a vyhovujú potrebám každého zubného lekára. Oceňovaný rad výrobkov, ktorý lekárom zjednodušuje postupy a zároveň poskytuje veľkú výhodu - uvoľňovanie vápnika.



- TheraCal LC®** - materiál na uzatváranie pulpy a liner
TheraCal PT® - materiál na ošetrovanie pulpotómie
TheraBase® CA - samoadhezívna báza / podložka uvoľňujúca vápnik

Therapeutické vlastnosti



RADIOOPÁKNE

Jednoduchá identifikácia na röntgenových snímkach.



ALKALICKÉ PH

Podporuje hojenie, vitalitu pulpy a tvorbu apatitu.



ODOLNÝ VOČI VLHKOSTI

Nízka rozpustnosť vo vode a časom sa nevymýva.



UVOĽŇOVANIE VÁPNIKA

Uľahčené unikátnym hydrofilným zložením.



NIE JE NUTNÉ RUČNÉ MIEŠANIE

Jednoduché a priame dávkovanie priamo zo striekačky.


TheraBase® CA

Samoadhezívna báza / podložka uvoľňujúca a dobíjajúca ióny vápnika.

- Obsahuje adhéziu podporujúcu monomér MDP, ktorý zaisťuje spoľahlivú a optimálnu väzbu k dentínu.
- V porovnaní so skloionomérmi a živcou modifikovanými skloionomérmi má TheraBase CA väčšiu pevnosť v tlaku, čo zaisťuje pevnejší základ pre priame kompozitné výplne.
- Samoadhezívna, nie je nutné používať žiadne adhezíva.
- Duálne tuhnúca, polymerizuje aj v hlbokých kavitách, kam svetlo nedosiahne.

530061 - TheraBase Ca 8 g + 15 kanyl a špičiek

153,40 € +69,90-

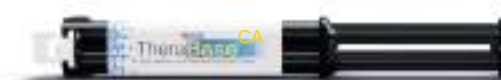

TIP:

8 g striekačka TheraBase vystačí až na 29 aplikácií ako báza.

TheraCal PT®

Biokompatibilná živica na ošetrovanie obnaženej pulpy a tiež pri čiastočnom alebo úplnom odstránení koronárnej pulpy.

- Primárne je určená na ošetrovanie pulpotómie.
- Možno ju použiť aj ako prostriedok na uzáver pulpy a ochrannú podložku.
- Biokompatibilný, živcou modifikovaný kalcium silikátový materiál.
- Umožňuje kompletne dokončenie výplne počas 1 návštevy ordinácie s rýchlou dobou spracovania a tuhnutia.
- Aplikácia striekačkou Automix - nikdy nie je nutné ručné miešanie.
- Unikátna hydrofilná matrica uľahčuje uvoľňovanie vápnika.

530065 - TheraCal PT 4 g + 15 kanyl

100,10 € +111,00-



TIP:

Striekačku TheraCal PT s hmotnosťou 4 g možno použiť až na 15 pulpotómií.

CORE-FLO™ DC

Duálne tuhnúci tekutý materiál pre stavbu jadra a náhradu dentínu

Univerzálny duálne tuhnúci materiál dávkovaný pomocou aplikačnej pištole v pomere 1:1. Je ideálny na dostavbu jadra, cementovanie koreňových čapov a náhradu dentínu. Core-Flo DC je RTG kontrastný a je k dispozícii v dvoch estetických odtieňoch: Natural/A1 a Opaque White, aby spĺňal všetky vaše požiadavky na priame aj nepriame náhrady.

520307x - 8 g + kanyly 69,40 € 77,30-



CORE-FLO DC

CORE-FLO™ DC LITE

Samonivelačný duálne tuhnúci materiál na dostavbu jadra

Duálne tuhnúci materiál, ktorý sa dávkuje a aplikuje z duálnej striekačky pomocou miešacej kanyly. Optimálna samonivelačná viskozita materiálu Core-Flo DC Lite umožňuje vynikajúcu adaptáciu, ktorej výsledkom sú okraje bez medzier pri nahradzovaní prirodzených zubných štruktúr. Okrem toho môžete cementovať koreňový čap a dostávať jadro zuba v jednom kroku. Core-Flo DC Lite je k dispozícii v odtieňoch Natural/A1 a Opaque White.

520307Lxx - 8 g + kanyly 69,40 € 77,30-



CORE-FLO DC LITE

Farebné striekačky

- Farebne označené striekačky na výplachové a iné roztoky.
- Štandardné luer-lock zakončenie.
- Neobsahujú latex.
- Farby: červená, modrá alebo žltá.
- Objem: 5 ml.



striekačky 5 ml - 100 ks | **24,20 €** | obj. č. 5305181

21,80 €

Endo Clean stojanček

- Stojančeky na nástroje s hubkou na odstránenie nečistôt počas preparácie koreňového kanálika.



stojanček plastový s hubkou | **10,10 €** | obj. č. 5307562

8,90 €

náhradné hubky - 50 ks | **13,10 €** | obj. č. 530757

11,40 €

Calasept Plus

- Hydroxid vápenatý v striekačke s vysokým obsahom kalcia > 41% (pH 12,4).
- Balenie obsahuje 4x 1,5 ml a 20 elastických plastových aplikátorov.

ZĽAVA

25%



4x 1,5 ml + 20 aplikátorov | **73,10 €** | obj. č. 52109100

54,80 €

Flexibilné kanyly 100 ks | **127,40 €** | obj. č. 52109107

114,70 €

Calasept CHX

- 2% chlórhexidín diglukonát s vynikajúcou antimikrobiálnou aktivitou, účinný proti gramnegatívnym aj grampozitívnym baktériám a má vysokú mieru účinnosti proti E faecalis, vo fľaši opatrenej uzáverom luer lock na viečku.



ZĽAVA

15%

250 ml | **66,40 €**
obj. č. 52109101

56,20 €

MD-Chelcream

- Lubrikačný gél s 19% EDTA na uľahčenie ošetrovania koreňových kanálikov.
- Je veľmi vhodný pri ošetrovaní kalcifikovaných kanálikov alebo zúžených kanálikov v distálnom úseku.
- Šetrí koreňové nástroje a uľahčuje plnenie kanálikov.



MD-Chelcream 2x 7 g | **21,80 €** | obj. č. 5304522

17,60 €

Forendo Paste

- Hydroxid vápenatá pasta obsahujúca jodoform a bázu silikónového oleja na liečbu koreňového kanálika.



2,2 g + 20 kanýl | obj. č. 531250

42 €

Gutta Cut GP

- Bezdrôtový guttacutter v modernom ergonomickom dizajne.
- Flexibilný dizajn hrotu pre hladký rez.
- Jednoduché ovládanie len pomocou jediného tlačidla.
- Okamžité zahriatie a schladenie rezacieho hrotu počas menej ako 1 sekundy.
- K dispozícii tri veľkosti hrotu - veľký 2,0 mm; stredný 1,2 mm a malý 0,5 mm.
- Napájaný dvoma AA batériami.

ZĽAVA
20%

Gutta Cut GP | **186,60 €** | obj. č. 540067

150 €

Gutta Cut GP náhradná koncovka

16,20 €

Úplne flexibilný dizajn hrotu, môžete si ho predtvarovať bez rizika zlomenia! Dodávaný s tromi rôzne veľkými koncovkami.

Biodentine XP

- Oblúbený bulk-fillový biokompatibilný a bioaktívny materiál na náhradu dentínu v korunkovej aj koreňovej časti zuba. V kapsuliach na pohodlnú aplikáciu.

Indikácia:

- v koreni: prekrytie perforácií koreňa a pulpálnej dutiny, vnútorná/vonkajšia resorpcia zuba, apexifikácia,
- v korunke: hlboké/rozsiahle kavity, trvalé dentínové výplne, priame prekrytie pulpy, pulpotomie,
- ošetrovanie klinických chýb: via falsa, perforácia cavuum pulpae.
- BiodentineXP Starter pack obsahuje: 10 kapsúl veľkosť 200, 10 kapsúl veľkosť 500, kliešte a mixér pre aktiváciu a miešanie kapsúl.


Biodentine XP Starter Pack | **1 090,90 €** | obj. č. 5303875

945 €

Biodentine XP 500, 10 ks | **329,60 €** | obj. č. 5303872

269 €

Biodentine XP 200, 10 ks | **280,90 €** | obj. č. 5303871

229 €

Prvých **20** kupujúcich XP Starteru získa **1 ks balenia XP 200 zadarmo**

Biodentine

- Oblúbený bulk-fillový biokompatibilný a bioaktívny materiál pre náhradu dentínu v korunkovej aj koreňovej časti zuba.
- ROZŠÍRENÁ INDIKÁCIA: Teraz Biodentine™ zachová pulpu, aj pri výskyte symptómov ireverzibilnej pulpitídy!


15x 0,7 g | **355,90 €** | obj. č. 530387

286 €

5x 0,7 g | **138 €** | obj. č. 530395

111 €

Adseal plus

- Inovovaný röntgenkontrastný materiál na plnenie koreňových kanálikov na báze epoxidovej živice vo veľmi praktickej striekačke pre jednoduché namiešanie v presnom pomere.
- Vysoká biokompatibilita, kvalitný hermetický uzáver.
- Nezafarbuje zub, nie je rozpustný.
- Balenie obsahuje: 13,5 g materiálu v duálnej striekačke, miešaciu podložku, špachtľu, dávkovacie špičky a viečko


13,5 g + príslušenstvo | **34,90 €** | obj. č. 530451

32,60 €

Endomethasone N

- RTG kontrastná koreňová výplň bez obsahu paraformaldehydu a dexametazónu.
- Set obsahuje: 14 g prášku a 10 g tekutiny.


set | **139,10 €** | obj. č. 530236

116,40 €

prášok - 42 g | **202,10 €** | obj. č. 530235

168,40 €

prášok - 14 g | **107,60 €** | obj. č. 530237

89,90 €

tekutina - 10 ml | **46,50 €** | obj. č. 530241

39,20 €

Root Canal Sealer

- Rádiopákný, baktériostatický materiál na definitívne plnenie koreňových kanálikov.
- Sada obsahuje: 15 g prášku a 7,5 ml tekutiny.


sada | **95,60 €** | obj. č. 530250

86,10 €

tekutina 7,5 ml | **36,40 €** | obj. č. 530251

34,50 €

Päť odtieňov, ktoré sa prispôbia všetkým ostatným!



**IDS
2025**

Navštívte nás v Kolíne nad Rýnom
25. – 29.03.2025
hala 10.2: Stánek N10/O19 + N20/O29
hala 5.2: Stánek C60



Admira Fusion 5 – Jednoducho rýchlejšia. Jednoducho estetická.

Pokrýva všetkých 16 VITA® classical odtieňov s iba 5 klastrovými odtieňmi.

- Univerzálna: Pre vysoké estetické nároky frontálneho aj distálneho úseku
- Rýchla: 10 sekundová svetelná polymerizácia všetkých odtieňov
- Excelentne biokompatibilná: Bez klasických monomérov
- Prvotriedna: S ďaleko najnižšou polymerizačnou kontrakciou 1,25 % v/v



Retraction paste

- Retrakčná pasta na rozšírenie a izoláciu sulků.
- Balenie obsahuje:** kompula 0,3 g v počte 25 ks alebo 100 ks.



25 ks | obj. č. 5200301

76,10 €*

100 ks | **304,40 €** | obj. č. 5200302

228,30 €*

Admira Fusion

- Nanohybridný výplňový materiál na báze keramiky.
- Výborná estetika, jednoduché leštenie do vysokého lesku a vysoká povrchová tvrdosť.
- Kompatibilný so všetkými konvenčnými väzobnými prostriedkami.
- K dispozícii v odtieňoch: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA1, OA2, OA3.5, BL, 2x Incizálna mixed, GA3.25 a GA5.
- Sady obsahujú:** striekačky 5x 3 g alebo kompule 75x 0,2 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion X-tra Univerzálny odtieň), Futurabond U SingleDose 20x a vzorkovník odtieňov.



AF sada striekačky - 5x 3 g | **385,40 €** | obj. č. 52221S

269,50 €*

AF sada kompule - 75x 0,2 g | **385,40 €** | obj. č. 52222S

269,50 €*

AF striekačka - 3 g | obj. č. 52222A2

80,30 €*

AF kompule 15x 0,2 g | obj. č. 52222A1

80,30 €*

Admira Fusion Flow

- Zatekavý svetlom tuhnúci nanohybridný výplňový materiál typu ORMOCER
- Sada striekačiek:** 5x 2g (A1, A2, A3, A3.5, WO), vzorkovník odtieňov.



AF Flow sada - 5x 2g | **240,40 €** | obj. č. 5222FS

163,90 €*

AF Flow striekačky - 2x 2 g | obj. č. 5222FA2

92 €*

Admira Fusion x-tra

- Výplňový materiál na báze keramiky.
- Univerzálny odtieň s chameleón efektom.



AF x-tra striekačka univerzálna - 3 g | obj. č. 522251U

80,30 €*

AF x-tra kompule 15x 0,2 g | obj. č. 522252U

80,30 €*

Admira Fusion 5

- Univerzálny nanohybridný výplňový materiál (ormocer) so zjednodušeným systémom odtieňov.
- Inovatívny, čisto keramický výplňový materiál ORMOCER® Admira Fusion.
- Teraz je možné pokryť všetky klasické odtiene VITA® iba 5 odtieňmi Cluster Shades.

Balenie Trial pack obsahuje:

- 10x 0,2 g materiálu v kompuliach (2 ks od každého odtieňa – A1, A2, A3, A3.5, A4),
- 10x Futurabond U SingleDose a vzorkovník odtieňov a ďalšie príslušenstvo.

Balenie set v striekačkách obsahuje:

- 5x 3 g (A1, A2, A3, A3.5, A4) a vzorkovník odtieňov.

Balenie set v kompuliach obsahuje:

- 75x 0,2 g (15 ks od každého odtieňa – A1, A2, A3, A3.5, A4) a vzorkovník odtieňov.

set striekačky 5x 3 g | **401,50 €** | obj. č. 52223KS

321,20 €*

striekačka 3 g | obj. č. 52223A1

80,30 €*

set kompule 75x 0,2 g | **401,50 €** | obj. č. 52223KK

321,20 €*

kompule 15x 0,2 g | obj. č. 52224A1

80,30 €*

trial kit | obj. č. 52223TK

56,90 €*



FuturaBond U

- Duálne tuhnúce univerzálny adhezívum v jednotlivých dávkach určené pre všetky techniky leptania, univerzálny pre všetky druhy kompozít.



50 ks | obj. č. 530356U

126,80 €*

200 ks | obj. č. 530355U

443,20 €*

Filtek Easy Match Universal

- 3M™ Filtek™ Easy Match Universal Restorative je zjednodušený systém výberu odtieňov, ktorý je navrhnutý tak, aby od začiatku zefektívnil rekonštrukcie použitím jedného odtieňa a zároveň poskytol potrebnú flexibilitu, aby ste našli vhodný odtieň pre väčšinu pacientov.
- Jeho body opacita znamená, že pre estetické frontálne výplne nepotrebuje opáker a získava priehľadnosť podobnú sklovine tam, kde ju potrebujete: na fazete a na incízálnej hrane.
- Kapsule je možné zahrievať až na 70 °C po dobu až jednej hodiny, čím sa zníži nutná sila pri vytlačení bez toho, aby sa zmenili fyzikálne vlastnosti.
- Dostupné odtiene: Bright, Natural, Warm.

ZĽAVA
30%

 komplete 20x 0,2g | **86,80 €** | obj. č. 52864B **59,90 €***

 striekačka 4 g | **86,80 €** | obj. č. 52865B **59,90 €***

Clinpro Clear Fluoride lízanky L-Pop

- 3M™ Clinpro™ Clear Fluoride Treatment je čirý prípravok na vodnej báze bez obsahu rosinu (kalafuny), ktorý je pripravený na aplikáciu a poskytuje ochranu povrchu skloviny a dentínu.
- Toto riešenie vo forme lízaniek je pripravené na použitie a umožňuje efektívnu absorpciu fluoridu s minimálnou dobou kontaktu iba 15 minút, čo uľahčuje vašim pacientom rozhodnúť sa pre toto ošetrenie.
- Príchute: mäta, vodný melón, bez príchute.

NEW
ZĽAVA
30%

 Clinpro Clear Fluoride lízanky L-Pop 50ks | **185,10 €** | obj. č. 5403818F **129,60 €***

 Clinpro Clear Fluoride lízanky L-Pop 100ks | **334,60 €** | obj. č. 5403818FF **234,20 €***

Filtek Supreme Flow / Filtek Bulk Fill Flowable

Filtek Supreme Flow

- Svetlom tuhnúci, RTG kontrastný zatekavý nanokompozit s nízkou viskozitou a výbornými estetickými vlastnosťami.
- Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3 opakny, B1, B2, C2, D2, W - biely, XW - extra biely.

ZĽAVA
23%

Filtek Bulk Fill Flowable

- Zatekavý výplňový materiál s jednoduchou a rýchlou aplikáciou.
- 4 mm hĺbka polymerizácie – redukuje potrebu vrstvenia.
- Zatekavá viskozita zaisťuje ľahkú adaptáciu - menej práce s nástrojmi.
- Až o 50 % vyššia pevnosť.
- Odtiene: A1, A2, A3, Univerzálny.


 2x 2 g -Filtek Supreme Flow | **76,30 €** | obj. č. 5283A1 **58,90 €***

 2x 2 g - Filtek Bulk Fill Flowable | **90,40 €** | obj. č. 5287A1 **69,80 €***

Filtek Universal

- Filtek Universal nanotechnológia zaisťuje odolnosť proti oteru, skvelú lešiteľnosť a dlhodobú stálosť naleštenia.
- Kompule môžu byť bezpečne nahrievané.
- Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, D3, XW a PO.

ZĽAVA
23%

 striekačka 4 g | **86,80 €** | obj. č. 52862A1 **67,10 €***

Filtek Z550

- Univerzálny mikrohybridný svetlom tuhnúci kompozit pre všetky rekonštrukcie.
- Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA2 a OA3.

ZĽAVA
23%


 4 g | **46 €** | obj. č. 5200A1 **35,60 €***

Adper Single Bond 2

- Zlepšená adhézia k dentínu poskytuje vyššiu väzbovú silu, ktorá zabezpečí vysokú spoľahlivosť a pevnosť väzby.
- Nanoplnivo je stabilné a nesedimentuje - odpadá nutnosť pred použitím pretrepať.
- Kompatibilný so všetkými svetlom tuhnúcimi kompozitami.

ZĽAVA
23%

Pevnosť väzby v (MPa) na sklovinu a dentín.

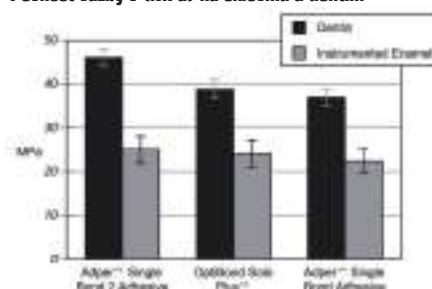
 6 g | **69,80 €** | obj. č. 530222 **54 €***


GC EQUIA Forte HT

- Bulkfillový sklohybridný výplňový systém, ktorý kombinuje sklenené čiastočky s vysoko naplneným živicovým ochranným lakom.
- Najpevnejší a úplne nelepivý materiál, vhodný aj pre zaťažované výplne II. triedy.
- Odtiene Fill: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4.
- Uvoľňuje fluoridy, má vysokú toleranciu voči vlhkosti.



Fill 50 ks | **684,60 €** | obj. č. 5335221A2 **537,10 €**

Intro pack - 20 ks | **207,40 €** | obj. č. 533522A1 **149 €**

Promopack, 100 ks | **116,80 €** | obj. č. 5335224A2 **67,10 €**

GC Gradia Direct

- Oblúbené mikrohybridné kompozitum do frontálneho úseku s pozoruhodnou estetickou a vynikajúcimi vlastnosťami.
- Špeciálna štruktúra plniva a výrazný chameleon efekt umožňuje dosiahnuť tzv. neviditeľné výplne.
- 95% výplní môžete zhotoviť z 1 odtieňa, odpadá zložitá vrstvenie.
- Indikovaný pre výplne III. IV a V. triedy, klinové defekty a krčky, uzavretie diastom pomocou faziet.
- Vysoká odolnosť proti ulomeniu a nízky modul elasticity, prijateľná odolnosť proti abrázii.
- Široká paleta odtieňov: Standardné - XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD; Vnútorne špeciálne - A02, A03, A04; Vonkajšie špeciálne - DT, CT, GT, NT, WT, CVT. Gradia Direct Posterior
- Odtiene štandardné: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, odtiene vonkajšie špeciálne: P-WT, P-NT.
- Inovované odtiene X: odolnejšie, RTG kontrastnejšie, viac naplnené a transparentné, X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5 a X-A02.



Gradia Direct - rôzne odtiene | **72,60 €** | obj. č. 5247XA02 **43,10 €**

GC Premio Bond

- Jednozložkový univerzálny bond, kompatibilný so všetkými režimami leptania.
- Určený na priamy bonding, na vykonávanie opráv a riešenie hypersenzitivity.



5 ml | **124,10 €** | obj. č. 5211462 **94,20 €**

3x 5 ml | **317,40 €** | obj. č. 5211464 **237,20 €**

G-AENIAL FLO / G-AENIAL UNIVERSAL FLO

G-AENIAL FLO

- Rádioopákny tekutý kompozit s vylepšenou zmáčavosťou a pružnosťou pre lepšiu adaptáciu k stenám kavít.
- Ideálny pre lining a odblokovanie podbiehavých miest, tunelové preparácie, výplne malých defektov, pečatenie fisúr.
- Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, A02, A03 a CV.

G-AENIAL UNIVERSAL FLO

- Na priame výplne kavit I. až V. triedy, na minimálne invazívne ošetrovanie kavit, na dlahovanie.
- Veľmi vysoká miera lesku a jeho zachovanie.
- Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, A02, A03, BW, CV, JE a AE.
- Promo kit obsahuje: 4 x 3,4 g v odtieňoch A2 a A3.



Flo - X 3,6 g | **86,50 €** | obj. č. 5284A02 **58,90 €**

Universal Flo - 3,4 g | **88,50 €** | obj. č. 5279A1 **60 €**

G-Bond

- Jednozložkové, samoleptacie, svetlom tuhnúce adhezívum, ktoré využíva princípy ako chemickej, tak mikromechanickej väzby.
- **Starter kit obsahuje:** 5 ml bondu, 50 mikroštetčiekov, 1 mikro-aplikátor a miešaciu misku.



starter kit - 5 ml | **166,70 €** | obj. č. 521147 **94,20 €**

everX Flow

- Zatekavý kompozit zosilnený krátkymi sklenenými vláknami určený pre náhradu dentínu.
- Pre všetky priame kompozitné výplne, vrátane veľkých posteriorných kavit, hlbokých kavit a endodonticky ošetrovaných zubov.
- Bulkový odtieň (hlbka polymerizácie 5.5 mm) je optimálny pre hlboké posteriorné kavity a rýchlu aplikáciu.
- Dentínový odtieň (hlbka polymerizácie 2.0 mm) je optimálny pre dostavu pahýľa a estetické výsledky.



bulk, 2 ml | **74,90 €** | obj. č. 52880B **59,30 €**

dentín, 2 ml | **74,90 €** | obj. č. 52880D **59,30 €**

Tetric PowerFill

- Svetlom tuhnúci bulkfill kompozit pre priame výplne v distálnom úseku.
- Odtiene: IVA, IVB, IVW.

ZADARMO

Pri nákupe 3 ks Tetric PowerFill získate
zadarmo 1x TetricPowerFill Refill 2g. Odtieň podľa vlastného výberu.***



striekačka IVA - 3g | obj. č. 52128IVA

69,70 €

striekačka IVB, IVW - 3 g | obj. č. 52128IVB

74,20 €

Tetric Prime

- **Tetric Prime** je nový kompozitný materiál s krémovou konzistenciou (možno ľahko tvarovať) pre výplne III. triedy, IV. triedy a V. triedy.
- Znížená lepiivosť **TetricPrime** uľahčuje vytváranie anatomických štruktúr.
- Má len **12 odtieňov** - *Univerzálny*: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2 a C2. *Dentínový*: A2D a A3.5D. *Translucentný*: T a Bielený: BLL.

ZADARMO

K nákupe 3 ks Tetric Prime Refill získate
zadarmo 1x Tetric EvoFlow Refill 2g. Odtieň podľa vlastného výberu.***



striekačka - 3 g, ostatné odtiene | obj. č. 52127A1

74,20 €

striekačka - 3 g, A2, A3 | obj. č. 52127A2

67,50 €

Evetric Assortment kit

- Svetlom tuhnúci kompozit pre zhotovovanie estetických výplní vo frontálnom aj distálnom úseku.
- **Assortment kit obsahuje:** 8 x 3,5 g vo farbách A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T a A3.5D.

ZADARMO

K nákupe kitu získate
zadarmo 2x Evetric Flow, 2g. Odtieň podľa výberu.***

ALEBO

ZADARMO

K nákupe získate navyše **2x Evetric Bulk Flow, 2g, v odtieni IVA.*****



Assortment kit - 8x 3,5 g | obj. č. 528501

176,20 €

Optragate

- Roztvárač pier a úst napomáha udržať suché pracovné pole.
- Pery sú úplne zakryté a tým dobre chránené.
- Trojrozmerná pružnosť (3D) umožňuje všetky pohyby čelustami a je pohodlná pre pacientov.
- Bez obsahu latexu z extra mäkkého materiálu.
- **Velkosti:** stredný (M), malý (S) a junior.

ZADARMO

K nákupe 2 balení OptraGate (Assortment/Regular/Small) získate
zadarmo 1x Tetric PowerFill Refill, 3g. Odtieň podľa vlastného výberu.***



Optragate, 80 ks | obj. č. 594084

183,10 €

Variolink Esthetic DC

- Estetický, duálne tuhnúci, fixačný kompozit pre náročné keramické a kompozitné náhrady.
- Ideálny pre definitívne cementovanie sklokeramických, lítium disilikátových sklokeramických a kompozitných náhrad (inlejí, onlejí, čiastočných koruniek, koruniek, mostíkov).
- **Odtiene:** light, light+, warm, warm+, neutral.
- **Nový odtieň:** white opaque.

ZADARMO

K nákupe Variolink Esthetic DC Refill 9g získate **zadarmo Variolink Esthetic LC 2g.** Odtieň podľa vlastného výberu.***



9 g - refill | obj. č. 52451N

258,40 €

Skyce

- Kamienky z kryštálového skla, ktoré sa pribodujú na labiálne plochy horných frontálnych zubov bez predchádzajúcej preparácie. K dispozícii v čirej transparentnej farbe vo veľkostiach 1,8 mm alebo 2,5 mm.

ZADARMO

K nákupe 2 kusov Skyce Refill 5 ks, získate **zadarmo 1x OptraStick 48 ks.*****



Skyce 1,9 / 2,5 mm, 5 ks | obj. č. 5940361

104,10 €



Charisma Bulk Flow ONE

- Jednoodtieňový bulk fill flow kompozit na každodenné použitie.
- Nízka kontrakcia, vysoká pevnosť v ohybe a odolnosť proti opotrebovaniu zaisťujú dlhú životnosť náhrad, ktoré vydržia záťaž v distálnom úseku.
- V balení ku každej striekačke dostanete 5 aplikačných kanýl.



2 g + 5 kanýl | **37,10 €** | obj. č. 528013

27,80 €*

10x 2 g kit + 2x 2g | **311,30 €** | obj. č. 528014

295,70 €*

Gluma 2Bond

- **Gluma 2Bond** obsahuje nanofilné plnivo, zaisťuje priming a bonding pri aplikácii jedinej vrstvy v jednom kroku po naleptaní skloviny a dentínu.
- Má desenzitizujúci účinok.



4 ml | **69,40 €** | obj. č. 521041

55,50 €

ZĽAVA

20%

Charisma Classic / Charisma Opal

Charisma Classic

- Mikrohybridné kompozitum pre monochromatické rekonštrukcie.
- Odtiene: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3 a OA3,5.

Charisma Opal

- Sub-mikrohybridné univerzálne kompozitum pre výplne vo frontálnom i laterálnom úseku nadväzujúce na veľmi obľúbený materiál Charisma.
- Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BL, C2, CO, OD, OL a OM.



Classic - 4 g | **26,30 €** | obj. č. 5202A1

21 €*

Classic Syringe Combi Set 8x4g + Assortment set 4x 4 g | **304,50 €** | obj. č. 52005X

228 €*

Opal - 4 g | **39,40 €** | obj. č. 5267A1

32,60 €*

Starlight Pro

- Starlight Pro je vytvrdzovacie LED svetlo pre polymerizáciu dentálnych materiálov ako adhezív, alebo výplní, vytvrdzovaných svetlom.
- Primárny účel svetelnej polymerizácie so Starlight Pro je konzistentne vytvárať vysoko kvalitné a bezpečné opravy.

AKCIA

Kúpte si ľubovoľné produkty z tejto strany **za 996 € (v akciových cenách)** a získate **Starlight Pro**.



Starlight Pro | obj. č. 593136

839,80 €*

* Ponuka platí do 31.3. 2025 a potom do vypredania.

SDI Stela

- **Stela je inovatívny vysoko účinný, samotuhnúci kompozit. Stela poskytuje neobmedzenú hĺbku vytvrdnutia a polymerizácie s nízkym napätím a rozhraním bez škár.**
- Nie je potrebné vykonávať leptanie kyselinou ani vytvrdnutie svetlom.
- Materiál Stela dosahuje svojich prelomových vlastností prostredníctvom prispôbenej kombinácie monomérov živice bez BPA, optimalizovaných plnív ionglass™ (bioaktívne patentované hybridné sklo spoločnosti SDI) a špeciálne povrchovo modifikovaného amorfného oxidu kremičitého.
- Vynikajúce mechanické vlastnosti materiálu Stela sú dané rýchlou polymerizačnou reakciou.
- Stela je k dispozícii v dvoch aplikačných systémoch: Kapsule Stela a striekačka Stela Automix.



Automix Intro Kit	212,50 €	obj. č. 5100952	119,60 €
Kapsule Intro Kit	129,20 €	obj. č. 5100951	63,40 €
Kapsule č.3 - 50 ks	256,90 €	obj. č. 5100955	168,40 €
Primer 5ml	58,40 €	obj. č. 5100954	44,60 €



SDI Riva Star Aqua

- SDI pokračuje s inováciou SDF roztokov predstavením novej generácie roztoku fluoridu strieborného na báze vody, Riva Star Aqua, ktorý je tiež účinný na zastavenie tvorby kariéznych lézií a ďalšími prínosmi pre pacienta.
- Podobne ako Riva Star (SDF), tak aj Riva Star Aqua (AgF) je dvojdielny neinvazívny patentovaný systém liečby na znečistenie bolesti zubov v len niekoľkých kvapkách.
- Riva Star Aqua je vodnatý roztok fluoridu strieborného bez použitia amoniaku.



tekutina silver 1,5 ml / green 3 ml | 175,40 € | obj. č. 53378SA

119,60 €

SDI Riva LC

- Svetlom tuhnúci, živcou modifikovaný výplňový skloionomérny materiál.
- Ponúka skutočnú estetiku pre výplne I, II a III, výplne triedy V, výplne mliečnych zubov, geriatrické výplne atď.
- Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a oteru, väčšia pevnosť povrchu.
- Dostupné odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4 a Bleach.



LC set prášok 15g + 7,2 ml | 80,10 € | obj. č. 5337A2

63,40 €

SDI Riva LC kapsule, 45 ks | 171,60 € | obj. č. 5347A2

112,10 €

SDI Riva LC HV

- Svetlom tuhnúci, živcou modifikovaný výplňový skloionomérny materiál.
- Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a oteru, väčšia pevnosť povrchu.
- **Riva LC/HV**
- **Balenie obsahuje:** 45× kapsula.
- Odtiene: A2, A3.
- **Balenie obsahuje:** 15 g prášok/7.2 ml tekutina.
- Odtiene: A1, A2, A3, A3.5.



45 kapsúl | 171,60 € | obj. č. 5348A2

112,10 €

SDI Riva SC

- Samotuhnúci skloionomérny výplňový cement.
- Ľahko sa aplikuje, žiadna polymerizačná zmršivosť.
- Vysoká pevnosť povrchu, väčšia odolnosť proti abrázii.
- Kapsule k dispozícii - štandardne tuhnúce (6:00 min) alebo rýchlo tuhnúce (4:30 min).
- Odtiene: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2 a B3.



45 kapsúl norm. tuhnúce - A2, A3 | 172,80 € | obj. č. 5336A2

112,10 €

Set tekutina/prášok 15 g + 7ml | 58,60 € | obj. č. 53371A1

52,10 €

SDI Riva SC HV

- Rádioopákny chemicky tuhnúci skloionomérny výplňový materiál s vysokou viskozitou, ktorá je štyrikrát vyššia ako u Riva SC.
- Vďaka vynikajúcej adhézii k zubu, uvoľňovaniu fluoridov, vysokej tlakovej pevnosti a vynikajúcej estetike je odporúčaný pre širokú škálu klinických aplikácií.
- Používa sa ako náhrada dentínu, ART techniku, pre podložky, antistresové výplne I. a II. triedy, abrazívne lézie, cervikálna erózia, výplne koreňového povrchu, dočasné výplne a výplne mliečnych a geriatrických zubov. Má výborný marginálny uzáver, zanedbateľné zmrštenie, a je preto vhodný pre veľké výplne.
- Nelepí sa, má vynikajúce tvarovacie a modelovacie vlastnosti.
- Dodáva sa iba vo forme kapsúl.



SC HV 45 kapsúl | 172,80 € | obj. č. 5336HA2

112,10 €

dxp
CLAVE

Výkonný a spoľahlivý autokláv triedy B s nerezovou komorou s kapacitou 24 l (5 táčok, náplň až 7 kg materiálu). Intuitívna obsluha a ovládanie pomocou dotykového displeja uľahčuje prácu. Rýchle vytváranie pary a zlepšený proces sušenia poskytuje najlepší výkon a najrýchlejšie pracovné cykly vo svojej kategórii. Záznam dát na USB alebo vstavnou tlačiarňou. Automatický update firmware len vložení USB. Kompletné ovládanie v češtine.



593123 DXPClave **4 594,00 €** 4 875,30 €
593123T DXPClave s tlačiarňou **4 716,00 €** 5 024,70 €

kapacita 24 litrov
dotykový displej
vysoký výkon
rýchle cykly



NSK

Detailné informácie nájdete tu: bit.ly/DXPClave24S



**ŠPECIÁLNA
PONUKA**

platí do
31. 3. 2025



extra zľava 120 €
z uvedených akciových cien



**predĺžená záruka
na 36 mesiacov
alebo 2 500 cyklov**



**pridáme Vám zadarmo
250 ks Helix testov
v hodnote 202,90 €**

BioStamp zväračka

Moderný a ľahko ovládateľný prístroj na pečenie sterilizačných rolí pre parné autoklávy.

- Splňa požiadavky a kvalitatívne štandardy najnáročnejších užívateľov.
- Zväračka je vybavená ohrevom zväracej kazety, pákou s pritlačiacim mechanizmom a automatickou časovou kontrolou.
- Zaisťuje rovnomerný ohrev, účinné prilnutie a zabraňuje spáleniu papiera.

Obj. kód: 910381 **528,20 €** 548,50 €



bit.ly/4b2YWEJ



Destilátor Drink

Destilačný prístroj na výrobu destilovanej vody z bežnej vodovodnej vody.

- Nerezová komora s vysokou účinnosťou (96%).
- Tichý a spoľahlivý prístroj s jednoduchou obsluhou.
- Výkon: 1,2 l destilovanej vody za 1 hodinu.


Obj. kód: 592277 **312,70 €** 345,20 €



bit.ly/4b5nQU8



Nekolabujúca, plne syntetická náhrada kosti

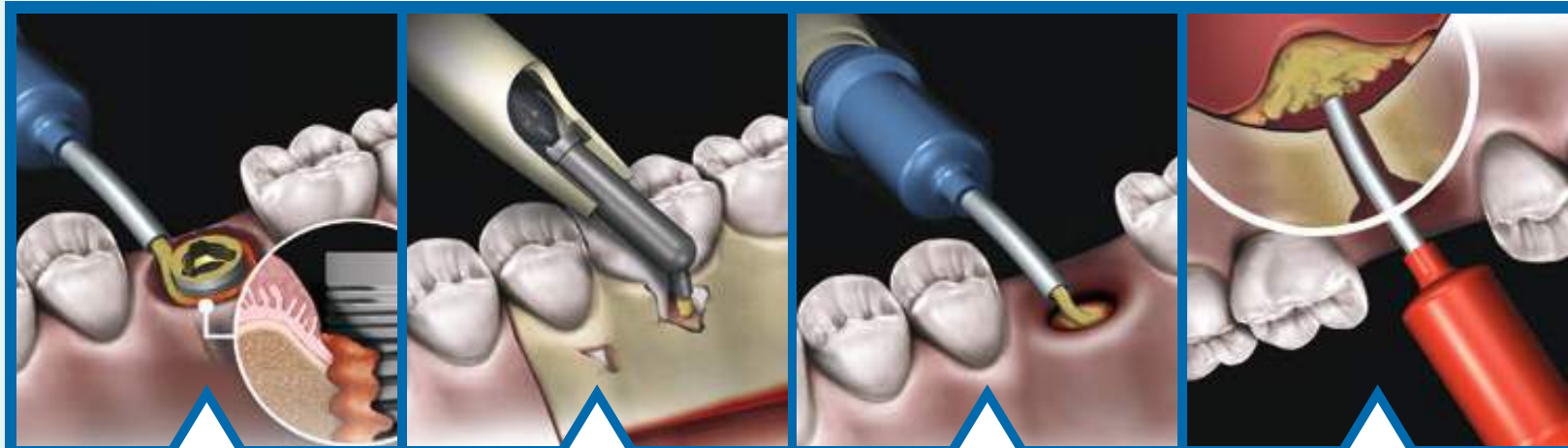

STABILIZÁCIA IMPLANTÁTU

PERIOAPIKÁLNE DEFEKTY

POEXTRAKČNÁ VÝPLŇ ZUBNÉHO LÔŽKA

SINUS LIFT OPERÁCIA

- chemickým základom je kalcium fosfosilikát – CPS zložený z minerálov bežne prítomných v ľudskom tele
- obsahuje väzobnú zložku, ktorá uľahčuje revaskularizáciu, rast tkanív a kostnú regeneráciu
- bioaktívny regeneračný materiál, ktorý poskytuje aj osteostimulačný efekt
- Indikácie: stabilizácia implantátu, perioapikálne defekty, poextrakčná výplň lôžka, sinus lift

5303905	striekačka	1 x 0,5	cm ³	120,00-€	102,00 €
5303901	striekačka	2 x 0,5	cm ³	240,00-€	178,50 €
5303925	kompule	2 x 0,5	cm ³	225,00-€	191,30 €
5303922	kompule	4 x 0,5	cm ³	405,00-€	344,60 €

**ZĽAVA
15%**



Striekačka
- tmel v jednorazovej striekačke
s objemom 0,5 cm³.

Kompula - umožňuje nanášanie
materiálu priamo do defektu,
dve veľkosti
- 0,5 cm³ a 1 cm³.



Intraorálny skener

HELIOS 500

Odteraz je digitálna technológia dostupná pre každého stomatológa! Už žiadne nepohodlie pri robení odtlačkov, využite digitalizáciu hneď teraz.

Presný
Rýchly
Nízka hmotnosť
Dve veľkosti koncoviek
Veľký záber skenovanej oblasti

Skvelý pomer cena x výkon
Popredajný servis
Softvér v češtine
Záruka 2 roky

6 900,00 € 8 941,00-€



Pre detailné informácie: bit.ly/Helios500S



Vstrebateľná kolagénová membrána pre dentálnu chirurgiu**Kolagénna membrána**

T-Gen® kolagénová membrána živočíšneho pôvodu, typu I

- pre riadenú kostnú regeneráciu v dentálnej chirurgii
- na liečbu paradontálnych defektov kostnej drene
- pre defekty kostí a periimplantitídy

T-Gen®

- porézna štruktúra poskytuje vynikajúcu priepustnosť krvi
- rýchla adaptácia vďaka hydrofilným vlastnostiam
- ľahká manipulácia
- bariérová funkcia 3-5 mesiacov, po 4-6 mesiacoch je plne absorbovaná
- veľkosti 15×20 mm a 20×30 mm

ZĽAVA**15%**

15 x 20 mm | **59,60 €** | obj. č. 5361319 **50,60 €**

20 x 30 mm | **100,90 €** | obj. č. 5361320 **85,90 €**

30 x 40 mm | **187,10 €** **159 €**

**Hemocollagene**

- Sterilné hubky s kolagénom na zastavenie krvácania po chirurgických zákrokoch.
- Kompletne vstrebateľné, na prirodzenú regeneráciu tkanív.
- Možno implantovať a uložiť do lôžka.
- Kolagén zvyšuje priľnavosť trombocytov a agregáciu.
- Balené jednotlivo v sterilných blistroch.
- Rozmer: 15x15x8 mm.

ZĽAVA**16%**

24 ks | **106,90 €** | obj. č. 530240

80,70 €**Septoject ihly**

- Tradičné ihly pre karpulové striekačky alebo intraligamentárnu anestéziu.
- Rozmery: 27G – 21, 25, 35 a 42 mm, 30G – 10, 12, 16, 21 a 25 mm.



Septoject, 100 ks | **22,90 €** | obj. č. 300320

17,40 €**Scandonest 3%**

- Anestetikum na báze 3% mepivacainu, bez vazokonstriktora pre špecifické lekárske situácie.
- Neobsahuje metylparabén - bráni alergickým reakciám u citlivých pacientov.



50x 1,7 ml | obj. č. 460012

35 €**Septanest / Septanest Forte**

- Anestetikum na báze 4% articaínu dodávané v sklenených karpuliach.
- Koncentrácia 1: 200 000 pre klasické zákroky s dĺžkou anestézie do 45 minút.
- Koncentrácia 1: 100 000 pre hlbšiu anestéziu u náročnejších výkonov do 70 minút.



1:200 000 - 50x 1,7 ml | obj. č. 460003

33 €

1:100 000 - 50x 1,7 ml | obj. č. 460004

33 €**AKCIA**

Pre nových zákazníkov:

Pri objednaní **3 balení Septanest** dostanete **ZADARMO karpulovú striekačku ASA** na aplikáciu.

Supracain 4%

- Injekčný roztok obsahuje dve liečivá: artikaín a adrenalín.
- Osvedčené a veľmi obľúbené lokálne anestetikum.
- Má rýchly účinok (1-3 min. po aplikácii) a silné analgetické pôsobenie.



10x 2 ml | obj. č. 460000

14,40 €

DIRECTA CONTAC[®]EZ

IPR Strip System

Systém páskov na úpravy interproximálnych priestorov

Riešenie pre každý prípad – so systémom ContacEZ a Plus Strips máte k dispozícii presné a ľahko použiteľné nástroje, ktoré vyhovujú potrebám každého pacienta v oblasti interproximálnych priestorov.

Dokonale tvarované body kontaktu – kvalitné pásky z nerezovej ocele sú flexibilné, aby zachovali a prispôbili sa prirodzeným kontúram zubov. Sú tiež dostatočne napnuté, aby sa bez námahy dostali aj do tesných priestorov.

Presné – v spojení s meradlovým kľúčom veľkostí interproximálnych priestorov zaisťuje ContacEZ systematickú a presnú separáciu bez poranenia pier, ďasien alebo úst.

- 20 %



IPR meradlový kľúč medzizubných priestorov

Meradlový kľúč medzizubných priestorov ContacEZ efektívne a presne zmeria a potvrdí mieru vykonaného medzizubného zaleštenia či redukciu tesného interproximálneho kontaktu v priebehu ortodontickej terapie.



Ďalšie informácie získate naskenovaním kódu QR pomocou mobilu.

ContacEZ

IPR Strip System - Systém páskov na úpravy interproximálnych priestorov

Riešenie pre každý prípad - so systémom ContacEZ a IPR Strips máte k dispozícii presné a ľahko použiteľné nástroje, ktoré vyhovujú potrebám každého pacienta v oblasti interproximálnych priestorov.

- Dokonale tvarované body kontaktu sa prispôbia prirodzeným kontúram zubov.
- Nevytvárajú ostré rohy a hrany a bránia nadmernému odstraňovaniu skloviny.
- Sú tiež dostatočne napnuté, aby sa bez námahy dostali aj do tesných priestorov.
- Presné - v spojení s meradlovým kľúčom veľkostí interproximálnych priestorov zaisťuje ContacEZ systematickú a presnú separáciu bez poranenia pier, ďasien alebo úst.
- Najužšie veľkosti sú opatrené pílkou na reznej hrane pre ľahký vstup do tesných interproximálnych priestorov.
- Pre ľahkú orientáciu je na ergonomickom úchyte vyznačená hrúbka a skutočnosť, či ide o jednostranný (S) alebo obojstranný (D) pásik.

5832007 - IPR Malý kombinovaný set obsahuje:
veľkosti 0.07 mm až 0.30 mm, celkom 8 kusov.

(1 žltú, 1 čiru, 1 červenú, 1 tmavomodrú, 1 zelenú, 1 fialovú, 1 hnedú)

89,80 € 142,20 €

| Jednotlivé jednostranné pásiky 8 ks **80,50 €** 100,40 €

| Jednotlivé obojstranné pásiky 8 ks **89,80 €** 142,20 €



Kompletný prehľad všetkých dostupných hrúbok a hrubostí nájdete v odkaze bit.ly/4i6HZM6 alebo načítaním QR kódu



DIRECTA

TrollByte Kimera GC

prináša systém, ktorý uľahčuje a urýchľuje zhotovovanie röntgenových snímok.

Vlastnosti

- Pevné rameno pre ľahké umiestnenie do úst pacienta.
- Pružný držiak zaisťuje bezpečné uchytenie senzora bez rizika pretrhnutia ochranného návleku.
- Nastaviteľné, farebne odlíšené.
- Krúžok sa hodí ku všetkým trom držiakom a všetkým klinickým situáciám.
- Zhryzový blok poskytuje nielen pevné umiestnenie senzora v ústach, ale tiež rozšírenú oblasť záberu vo frontálnom úseku.
- Držiak je tvorený jediným kusom a všetky časti sú plne autoklárovateľné.
- Dostupné pre všetky svetové značky.

Súhrn týchto vlastností prináša ľahkú a plynulú prácu, bezpečnú manipuláciu a úsporu času.

Len 3 držiaky stačia pre všetky indikácie:

ČERVENÉ - pre horizontálne Bitewingy

MODRÉ - vertikálne Bitewingy a frontálne periapikálne

ŽLTÉ - horizontálne Bitewingy a distálne periapikálne

Balenie obsahuje:

3 držiaky, zhryzovú dosičku a pozičný krúžok.

Na objednanie je nutné oznámiť presný typ senzora a jeho veľkosť.

182,90 € 243,60 €

Pre detailné informácie a video načítajte QR kód
alebo sa pozrite na odkaz: bit.ly/4b8l04o



**ZĽAVA
25%**



Ideálna kombinácia skvelého úchopu a unikátnej technológie RFID. Nástroje ErgoSense® sú ergonomické, vysoko kvalitné a prirodzene padnú do ruky.

Užite si skutočnú nástrojovú ergonómiu so zľavou **30%***. Objednajte v priebehu 5 nástrojov s rukoväťou ErgoSense podľa vlastného výberu a k nim kazetu Servo 5 a na celý nákup Vám dáme **30% zľavu***.

Vyberať môžete v katalógu na webe: bit.ly/katalogLM
Cenník nájdete tu: bit.ly/CenikLM

*Platnosť akcie je 1. 3. - 31. 3. 2025, ceny uvedené v ceníku sú bez zľavy.

LM

feel the difference



LM LiftOut™

LM LiftOut™

ZĽAVA
15 %



114,80 € 135,00 €

Akcia platí od 1. 4. - 30. 4. 2025
na všetky extrakčné nástroje LM

Luxačné nástroje pre atraumatické extrakcie a rýchle hojenie, čo oceníte nielen pred implantáciou. Jemná, ostrá čepeľ nástroja sa zavádza do periodontálneho priestoru a pomaly sa posúva smerom k apexu koreňa za súčasného jemného pohybu nástroja zľava doprava.

LM SlimLift™

LM SlimLift™

ZĽAVA
15 %



114,80 € 135,00 €

Špeciálne navrhnuté pre veľmi úzke miesta, do ktorých sa nemožno dostať tradičnými luxátormi LM-LiftOut. Extrémne jemný hrot nástroja sa zavádza do veľmi úzkeho parodontálneho priestoru. Nástroj sa pomaly posúva smerom k apexu koreňa za súčasného jemného pohybu nástroja zľava doprava.

LM TwistOut™

LM TwistOut™

ZĽAVA
15 %



114,80 € 135,00 €

Elevátory pre namáhavé extrakcie, ideálne pre situácie, kedy je potrebné vyvinúť veľkú silu a krútiaci tlak.

Všetky extrakčné nástroje LM nájdete na internete v katalógu na stranách 54 - 56:



Speedex

- Povrchovo aktivovaný, veľmi dobre zateká a vykreslí aj jemné detaily.
- C-silikónová odtlačková hmota vhodná pre obe metódy odtlačkovania.
- Snap Set tuhnutia, možná regulácia rýchlosti tuhnutia.
- Dostupné varianty viskozít: putty alebo putty soft, light body alebo medium body.



putty , putty soft - 910 ml 53,10 € obj. č. 540032	37,10 €
light body / medium body - 140 ml 21,50 € obj. č. 540027	15,10 €
universal aktivátor - 60 ml 31,20 € obj. č. 540026	21,70 €

ZĽAVA
30%

Mikrozyd AF Liquid

- Prípravok na dezinfekciu postrekom na plochy a predmety.
- Účinný proti baktériám, mykobaktériám, mikroskopickým kvasinkovým aj vláknitým hubám a širokému spektru vírusov.
- Bez formaldehydu, ako účinné látky obsahuje alkoholy, glutaraldehyd a kvartérne amónne soli.



1 l 11 € obj. č. 410029	10,50 €
250 ml s rozprašovačom 6,50 € obj. č. 410372	6,10 €
5 l 46,80 € obj. č. 410066	44,30 €
10 l 87,80 € obj. č. 410065	83,40 €

Mikrozyd Universal Premium obrúsky

- Dezinfekčné obrúsky, s nízkym obsahom alkoholu, určené na dezinfekciu malých plôch a povrchov. Vysoká kompatibilita s materiálmi.
- Účinný podľa EN 16615 za 1 minútu.



100 ks 14,10 € obj. č. 4100658	11 €
---	-------------

CaviWipes

- Dezinfekčné obrúsky s nízkym obsahom alkoholu (17%), ktoré neškodia povrchom.
- Rozmer: 17,5 x 22,5 cm, ekologické, biologicky odbúrateľné.


ZĽAVA
20%

dóza - 160 ks 14 € obj. č. 100082	10,50 €
vrecko - 45 ks 9 € obj. č. 100089	6,80 €

Gigasept Instru AF

- Prípravok na dezinfekciu a čistenie všetkých druhov nástrojov, je obzvlášť vhodný pre ultrazvukové čističky.
- Neobsahuje aldehyd, fenol ani aktívny chlór.
- Má veľmi dobré čistiace schopnosti, široké spektrum účinnosti a príjemne vonia.



2 l 58,20 € obj. č. 410060	55,30 €
5 l 128,50 € obj. č. 410061	122 €

Mikrozyd AF obrúsky

- Alkoholová dezinfekcia - zdravotnícky prostriedok pre všetky oblasti so zvýšeným rizikom infekcie.
- Rýchly účinok, neotiera sa - iba zasychá, nezanecháva žiadne stopy, príjemne vonia.
- Účinnosť: baktérie (vr.Tb), mikroskopické huby, vírusy HBV, HIV, HCV, Adeno-vírusy, Rota-vírusy, Papova-vírusy, Polio-vírusy.
- **Obrúsky** - napustené dezinfekčným roztokom na okamžité použitie.
- **Rozmery obrúskov:** Štandard 14 x 17,5 cm a Jumbo 20 x 27 cm.



náhradné obrúsky - 150 ks 14,10 € obj. č. 410040	12,70 €
náhradné JUMBO - 200 ks 16,30 € obj. č. 410051	15,80 €

Dezinfekcia v spreji

CaviCide

- Postreková dezinfekcia kompatibilná s väčšinou povrchov, baktericídna a virucídna účinnosť.
- Používa sa neriedený.


ZĽAVA
15%

200 ml 8,30 € obj. č. 100021	6,60 €
700 ml 17,60 € obj. č. 100022	14,30 €
5 l 68,80 € obj. č. 100023	55,60 €

Poháriky THIENEL

- Papierové poháre s PE-vrstvou s obsahom 160 ml a s motívom medvedíka Ottu.
- Stabilné, pevné, odolné proti preliačeniu.
- Ideálne do detskej ruky.
- Farba:** modrá a ružová



160 ml, modré - 100 ks | **9,80 €** | obj. č. 300191

8,10 €

160 ml, ružové - 100 ks | **9,80 €** | obj. č. 300192

8,10 €

Headrest

- Krycie návleky (papier/PE-fólia) pre operadlá zubných súprav.
- Rozmer 27 x 28 cm, balené v rolke á 100 ks.
- Široká škála farieb:** biela, zelená, tmavo modrá, svetlo modrá, blankytná, svetlo oranžová, tmavo oranžová, orgovánová, vínová, žltá, šedá a ružová.



100 ks | **10,60 €** | obj. č. 3001831

9,60 €

Valčeky Richmond

- Vysoko flexibilné, mäkké, 100% bavlnené valčeky s neuveriteľnou absorpčnou schopnosťou, ktorá je teraz o 30% vyššia!



HIT

2 000 ks | **111,60 €** | obj. č. 300035

100,90 €

Prophytex

- Trojvrstvové rúška pre ochranu pacienta pri čistení zubov AirFlow technikou.
- Farby:** biela, svetlomodrá, sivobiela
- Rozmer:** 60 x 54 cm.



40 ks | **16,70 €** | obj. č. 3000300

15 €

Apron č. 3

- Pacientské prehozy vyrobené z polyetylénu a savej mäkkej celulózy.
- Farby: biela, zelená, tmavo modrá, svetlo modrá, blankytná, svetlo oranžová, tmavo oranžová, orgovánová, vínová, žltá a ružová.
- Rozmery:
60x54 cm – 80 ks
a 80x54 cm – 60 ks.



60 x 54 cm - 80 ks | **13 €** | obj. č. 3000242

11,80 €

80 x 54 - 60 ks | **13 €** | obj. č. 3001181

11,80 €

Nerezové tácky na nástroje ASA

- Nerezové tácky na odkladanie nástrojov.
- 2 veľkosti: 10 x 20 cm, 15 x 20 cm.



15 x 20 cm

10 x 20 cm | **15 €** | obj. č. 274741

13,40 €

15 x 20 cm | **17 €** | obj. č. 274740

15 €

Nerez kazety

- Nerezové kazety na odkladanie nástrojov s vekom.
- Veľkosť: 200 x 100 x 10 mm a spodný diel 200 x 100 x 30mm.



veko 200 x 100 x 10 mm | **24,40 €** | obj. č. 272700U


22,30 €

dno 200 x 100 x 30 mm | **26,40 €** | obj. č. 272700L

24,40 €

Elast-O-Loop

- Extrémne elastické a pevné gumičky, priemer 0,3 mm.
- Balenie: 1008 ks.

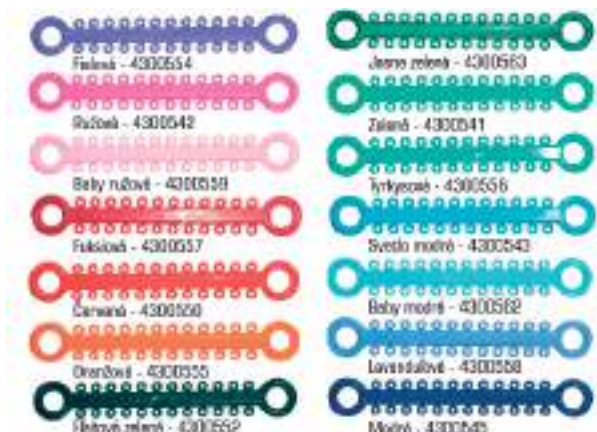


1 008 ks | **42,60 €** | obj. č. 4300550

35,10 €

Euroform Nikel-Titán

- Kvalitné nikel-titánové oblúky na ortodontické použitie.
- Vynikajúca flexibilita a ľahké vkladanie.
- Majú vysoko leštený povrch pre zníženie trenia a optimálne klzové schopnosti.
- **Okrúhle oblúky v 5-tich priemeroch:**
.012 / .014 / .016 / .018 / .020.
- **Oblúčnikové oblúky v 5-tich veľkostiach:** .016x.016 / .016x.022 / .017x.025 / .019x.025 / .020x.020.

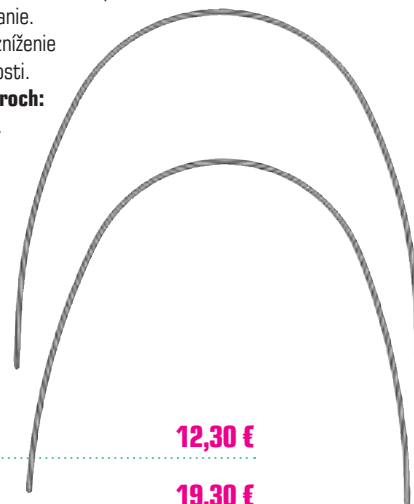

okružle oblúky - 10 ks | **14,50 €**
obj. č. 43001D1

12,30 €

oblúčnikové oblúky -10 ks | **22,80 €**
obj. č. 43002D1

19,30 €

Vosk pre pacientov v krabičke

- Vosk pre dočasné uvoľnenie od bolesti spôsobenej orto strojčkmi.
- Každá krabička obsahuje 5 prúžkov, balenie obsahuje 100 krabičiek.



100 krabičiek á 5 ks | **125,20 €** | obj. č. 430095

101 €

Fuji Ortho LC

- Svetlom tuhnúci skloionomérny cement pre fixáciu ortodontických krúžkov a brekiet.
- **Balenie 1-1 obsahuje:** 15 g prášku, 7 g tekutiny a príslušenstvo.



set 1-1 | **174,40 €** | obj. č. 530073

139,20 €

kapsule 50 ks | **233,50 €** | obj. č. 530079

188 €

Ceramchem Blue / Yellow

- Oblúbený chemicky tuhnúci **skloionomérny cement** pre fixáciu ortodontických krúžkov.
- Mieša sa s destilovanou vodou, rýchlo tuhne a ľahko sa odstraňuje.
- Uvoľňuje fluoridy - predchádza vzniku dekalifikácie.
- Verzia BLUE navyše vďaka modrej farbe uľahčuje prácu pri odstraňovaní a má vanilkovú príchuť príjemnú pre pacientov.
- **Balenie obsahuje:** prášok 30 g, dávkovač na vodu, miešaciu podložku a lopatku na cement.



blue / yellow set 30 g | **72 €** | obj. č. 4300491

58,10 €

set blue/ yellow - 200 g | **331,50 €** | obj. č. 4300763

266,20 €

Mouthguard boxes

- Kompaktné krabičky s hĺbkou 2,55 cm s ľahkým zatváraním.
- Každá krabička má štítok pre meno a adresu pacienta.
- Vzduchové diery na zlepšenie hygieny.
- Farby bežné: čierna (č.1), modrá (č.2), zelená (č.3), oranžová (č.4), ružová (č.5), fialová (č.6), červená (č.7) a žltá (č.8).
- Farby perleťové: neónová zelená (č.0), čierna (č.1), modrá (č.2), ružová (č.5), fialová (č.6) a červená (č.7).



perleťové - 10 ks | obj. č. 4300111

1,60 €

bežné farby - 10 ks | obj. č. 4300135

1,60 €

Injekčné ihly Medoject

- Injekčné ihly Medoject sú nerezové jednorazové sterilné ihly potiahnuté silikónom pre hladkú penetráciu.



0,40 x 20 mm šedé - 100 ks, exp. 8/2025 | ~~3,80 €~~

2,99 €*

ZĽAVA

21%

VacuSoft koncovky

- Vymeniteľné super mäkké koncovky modrej farby na kanylu VacuSoft.



koncovky náhradné sensitive - 50 ks, exp. 8/2025 | ~~60 €~~

31,50 €*

ZĽAVA

48%

Tetric PowerFlow

- Zatekavý svetlom tuhnúci rentgenokondenzný kompozit pre priame výplne v distálnom úseku.



IVA - 1x 2 g, exp. 10/2025 | ~~47,20 €~~

30,90 €*

ZĽAVA

35%

Dyract Flow / XP

- Dyract Flow:** Kompomerný dostavbový materiál s nízkou viskozitou pre minimálne invazívne zákroky.
- Dyract XP:** Kompomerný výplňový materiál. Krátka doba polymerizácie svetlom, 10 sekúnd.



Dyract Flow A3 - 2x 1,8 g, exp. 7/2025 | ~~96 €~~

69,90 €*

Dyract XP B1 - 20x 0,25 g, exp. 9/2025 | ~~97 €~~

72,90 €*

ZĽAVA

25%

VisCalor bulk

- Termoviskózný kompozitný materiál typu bulk-fill. Materiál sa nahriatím stáva zatekavým a lepšie tvarovateľným.



Caps A1 - 16x 0,25 g, exp. 10/2025 | ~~80,90 €~~

55,90 €*

ZĽAVA

31%

Futurabond M+ DCA

- Jednozložkové univerzálne adhezívum vo fľaštičkách.



Futurabond M+ DCA, exp. 08/2025 | ~~52,60 €~~

37 €*

ZĽAVA

30%

BioRoot RCS

- Bioaktívny sealer pre trvalé koreňové výplne.
- Vynikajúca priľnavosť k dentínu a gutaperčovým čapom.
- Hydrofilný, antimikrobiálny, skvelá zatekavosť.



15 g + 35 pipiet, exp. 9/2025 | ~~314,70 €~~

176,80 €*

ZĽAVA

44%

Structur 3 QuickMix

- Materiál s vylepšenými vlastnosťami pre optimálne provizórne náhrady.



A2 - 1x 5 ml, exp. 9/2025 | ~~42,10 €~~

24,90 €*

ZĽAVA

41%

Total Etch

- 37% kyselina fosforečná pre leptanie skloviny a dentínu.



2x 2 g, exp. 9/2026 | ~~30 €~~

17,90 €*

ZĽAVA

40%

Predlžovacie rameno

- Predlžovacie rameno** o dĺžke 20 cm, umožňuje otáčanie poličky a jej variabilné umiestnenie.



biele - 1 ks | ~~74,90 €~~

35,90 €*

ZĽAVA

52%

Nožnice rovné 12cm

- Nožnice z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele.



1 ks | ~~66,20 €~~

45,90 €*

ZĽAVA

31%

Super-snap

- Dokončovací a leštiaci systém pre rýchlejšie a efektívnejšie kontúrovanie a leštenie kompozitných výplní.



L502, červené x jemné - 50 ks | ~~21,90 €~~

10,90 €*

ZĽAVA

50%

DISPENSER - applicator brushes

- Dvojitý dávkovač na jednorázové aplikačné tyčinky.
- Dve samostatné komory umožňujú naplniť dvoma rôznymi typmi tyčiniek.


1 ks | **79 €** | obj. č. 582244

ZĽAVA
31%
54,90 €*

Petriho miska

- Tradičná sklenená Petriho miska od českého výrobcu.


1 ks - 20 x 50 mm | **22,90 €** | obj. č. 422516

ZĽAVA
44%
12,90 €*

Navigator Evo W-2

- Vylepšené rotačné nástroje na preparáciu koreňového kanálika.


6 ks, 31 mm | **79,90 €** | obj. č. 144501795

ZĽAVA
40%
48 €*

DiaGloss RA

- Unikátna diamantom-impregnovaná povrchová úprava na kontúrovanie a leštenie kompozitov do vysokého lesku.


ZĽAVA
55%

19035RA - 6 ks | **43,90 €** | obj. č. 8619035

19,90 €*

Chirurgická fréza

- Chirurgická kostná fréza v tvare kónusu s redukcí vibrácií.


C162A,317,016 - 3 ks | **75,30 €**
obj. č. 570162CA76

ZĽAVA
40%
44,90 €*

Nástroj Hu-Friedy Margin Trimmer

- Orezávač okrajov používaný na vytvorenie správneho skosenia okrajov.


MT29H - 1 ks | **70,30 €** | obj. č. 5911692

ZĽAVA
20%
55,90 €*

Nástroj Ortho Plier

- Kliešte pre orthodonciu.


ZĽAVA
30%

1 ks | **199 €** | obj. č. 430004

140 €*

Mini tray AL

- Veko na podnosy v striebornej farbe.
- Rozmer 18 x 14 cm.


veko, 1 ks | **8,50 €** | obj. č. 222004

ZĽAVA
42%
4,90 €*

Cervical matrice

- Anatomicky tvarované transparentné krčkové matrice pre výplne V. triedy.


ZĽAVA
40%

matrice 852S - 150 ks | **71,70 €**
obj. č. 580852S

42,90 €*

Vrtáček ED

- Finírovací vrták z karbidu voľfrámu kónusového tvaru.


TC300,314,014 - 6 ks | **43,90 €**
obj. č. 570TC3004

ZĽAVA
39%
26,90 €*

Protetický kahan

- Kahan s otvoreným plameňom používaný na ohrev s reguláciou vzduchu.


1 ks | **45,90 €** | obj. č. 910026

ZĽAVA
22%
35,60 €*

Kostná fréza

- Veľmi dlhá kostná fréza pre chirurgiu.


C161,316,016 - 3 ks | **45,90 €** | obj. č. 570161C16

ZĽAVA
37%
29 €*



Hľadáte únik z každodenného zhonu a túžite po nevšedných zážitkoch? Potom ste na správnom mieste! Ponúkame vám širokú škálu zájazdov, ktoré uspokojia aj tých najnáročnejších cestovateľov. Vyďte sa s nami do fascinujúcich destinácií a objavujte krásy sveta. A čo sme pre vás pripravili?

- **Kúzlo Alžírska:** Objavte historické mesto Algiers s jeho bohatou kultúrou, preskúmajte tajomstvo Ighir a Tikoubaouine a nechajte sa očarovať majestátnymi Hoggar Mountains, ktoré ponúkajú úchvatné scenérie a nezabudnuteľné dobrodružstvo.
- **Divočina a pobrežie Kene:** Zažite nezabudnuteľné safari v národných parkoch Amboseli a Tsavo West, kde môžete pozorovať veľkú pätku v ich prírodnom prostredí, a užite si nádherné pláže Diani s azúrovým morom, ideálnym pre šnorchlovanie a potápanie v koralových útesoch.
- **Čile a Patagónia:** Spoznajte divokú krásu Čile a Patagónie, krajiny ohňa a ľadu. Preskúmajte majestátnu Andy, navštívte národný park Torres del Paine s jeho ikonickými žulovými vežami a tyrkysovými jazerami a zažite nezabudnuteľné ľadovcové dobrodružstvo.
- **Madagaskarské dobrodružstvo:** Objavte národné parky Tsingy a Isalo s ich úchvatnými skalnými útvarmi a pozorujte lemury v Ranomafana. Nenechajte si ujsť ikonické baobaby a relaxujte pri kúpaní na plážach Toliara.
- **Himalájske kráľovstvo Nepál:** Nechajte sa uniesť do krajiny, kde sa sny stávajú skutočnosťou. Nepál, to sú zasnežené vrcholky Himalájí, tajomná atmosféra budhistických kláštorov a srdečnosť miestnych ľudí.





KEŇA

Safari a more

Termín: 23. novembra - 4. decembra 2025 (12 dní)
Ubytovanie: Ol Tukai Lodge, Kilaguni Serena Safari Lodge
Nenechajte si ujsť: Baobab Beach Resort 5*, garden room s All Inclusive safari v národnom parku Amboseli a Tsavo West, odpočinok na pláži Diani Beach s all inclusive

Strávte nezabudnuteľnú dovolenku v srdci Afriky! Naš 12-dňový zájazd vás zavedie na vzrušujúce safari do národných parkov Amboseli a Tsavo West, kde uvidíte levy, slony a žirafy s majestátnym Kilimandžárom v pozadí. Potom si oddýchnete na nádherných plážach Diani Beach v luxusnom hoteli s all inclusive.

Cena: 5 779 EUR (vrátane poplatkov)

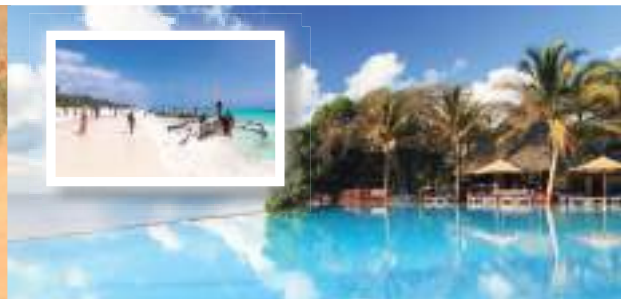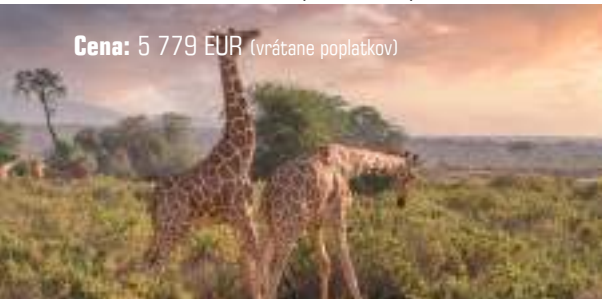

ALŽÍRSKO

Krajina Berberov a antických pokladov

Termín: 13. - 24. októbra 2025 (12 dní)
Doprava: letecky/jeepy
Ubytovanie: starostlivo vybrané hotely/kempy s polpenziou/plnou penziou
Nenechajte si ujsť: Cherrchell (Caesarea) a Tipas (UNESCO), Sahara a Ighir, Hoggar Mountains alebo dramatické scenérie v Assekrem

Cena: 3 329 EUR (vrátane poplatkov)

V srdci severnej Afriky leží fascinujúca krajina Alžírsko, domov bohatej kultúry Berberov a dávnej histórie, ktorá siaha až do antických čias. S nekonečnými piesočnými náosmi Sahary, malebnými horskými krajinami a pulzujúcimi mestami, Alžírsko slubuje neopakovateľné dobrodružstvo. Objavte skryté poklady ako historické rímske ruiny, tradičné dediny a živé trhy, ktoré vás preniesú do iných časov. Vydáme sa na cestu, ktorá oslní vaše zmysly a inšpiruje vašu dušu. Pripravte sa na nezabudnuteľný zážitok plný úžasných objavov a kultúr, ktoré čakajú na to, aby boli odhalené!



TAIWAN

Objavte skrytý klenot Ázie!

Termín: 21. mája - 1. júna 2025 (12 dní)
Ubytovanie: starostlivo vybrané hotely s polpenziou
Nenechajte si ujsť: Taipei - Národné múzeum, Lungsang chrám, Chiang Kaishek pamätná hala, Taipei 101, NP Taroko, NP Kenting, jazero Sun & Moon s krásnymi chrámami

Cena: 3 349 EUR (vrátane poplatkov)



MADAGASKAR

Tak krásny, že naň nezabudnete ani po návrate domov!

Termín: 9. - 25. septembra 2026 (17 dní)
Ubytovanie: starostlivo vybrané hotely a lodge s polpenziou
Nenechajte si ujsť: prales Kirindy, alej baobabov, národný park Ranomafana, údolie Tsaranovo, kúpanie v Ifaty

Cena: 5 309 EUR (vrátane poplatkov)

Madagaskar je ukážkou toho najlepšieho z nášho divokého, podivného, ale tak úžasného sveta. Biodiverzita, ktorá sa vyrovná Galapágam, historicky významné mestá, nádherné pláže so zlatistým pieskom a pozoruhodná kultúra ovplyvnená Európou, Afrikou a Východom - vzácne bohatstvo Madagaskaru stojí za objavenie. Vydajte sa do národných parkov a zažite hlboké okamihy v prírode, oddýchnite si na idylických ostrovoch, prejdite sa pamiatkovo chránenými mestami a vidíte zvláštnu divokú zver, ktorú nenájdete nikde inde na svete.



ČILE & PATAGÓNIA

Nezabudnuteľná expedícia za ľadovcami a horami!

Termín: 13. - 24. apríla 2026 (12 dní)
Doprava: letecky
Ubytovanie: kvalitné 3-4* hotely s polpenziou / plnou penziou
Nenechte si ujsť: Torres del Paine National Park, Los Glaciares National Park, Tierra del Fuego Island, King Penguin Park

Cena: 6 679 EUR (vrátane poplatkov)

Patagónia je úžasný kraj rozkladajúci sa v Čile a Argentíne. Nájdete tu mohutné ľadovce, krásne fjordy, sopky, žulové skaly a nádherné jazerá!

V Patagónii sa ocitnete najjužnejšie, ako je to len na zemeguli možné. A do Antarktídy je to odtiaľto čo by kameňom dohodil. Spája sa tu drsná realita s nevšednou krásou a ponúka nezabudnuteľnú dovolenku v krajine kontrastov a nádhernej divokej prírody. Patagónia je jednoducho splnený sen tých cestovateľov, ktorí majú radi drsnú a divokú prírodu. A tiež sa hovorí - kto sa tam raz pozrie, prepadne jej nadosmrť!



NEPÁL

Himalájske kráľovstvo a jeho divoká krása

Termín: 10. - 23. októbra 2026 (14 dní)
Doprava: letecky
Ubytovanie: 4-5* hotely & lodge s polpenziou/plnou penziou
Nenechajte si ujsť: nezabudnuteľné scenérie lemujúce celú trasu zájazdu


Cena: bude upresnená

Nechajte sa uniesť do zeme, kde sa sny stávajú skutočnosťou. Nepál, to sú zasnežené vrcholky Himalájí, tajomná atmosféra budhistických kláštorov a srdečnosť miestnych ľudí. Vydajte sa s nami na cestu, ktorá pohladí vašu dušu a zanechá vo vás hlboký dojem. Prejdite sa po trhoch s korením a ručne vyrábanými suvenírmi, ochutnajte tradičné nepálske špeciality a nechajte sa očariť krásou himalájskej prírody.



Diadisk Superflex 321.514.190HP

- Obojstranné, vysoko flexibilné diamantové disky najvyššej kvality na opracovanie keramiky, kompozit, živíc a sadry.
- Vhodné na úpravu medzizubných priestorov, na opracovanie povrchu a separáciu.
- Dodávajú sa v 3 hrúbostiach: Superjemné (žlté) – 0,12 mm (doplň č. 0) Jemné (červené) – 0,15 mm (doplň č. 1) Štandard (modré) – 0,25 mm (doplň č. 2).

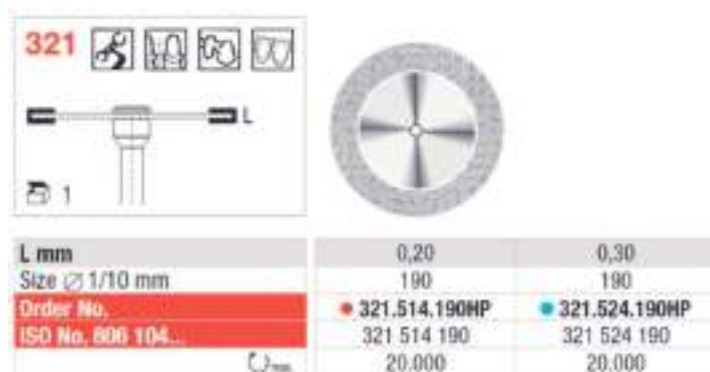


321.514.190HP | 18,30 € | obj. č. 8635013

15,80 €

Diadisk Superflex 361.514.080HP

- Obojstranné, vysoko flexibilné diamantové disky najvyššej kvality pre opracovanie keramiky, kompozit, živíc a sadry.
- Vhodné na úpravu medzizubných priestorov, na opracovanie povrchu a separáciu.
- Dodávajú sa v 3 hrúbostiach: Superjemné (žlté) – 0,12 mm (doplň č. 0) Jemné (červené) – 0,15 mm (doplň č. 1) Štandard (modré) – 0,25 mm (doplň č. 2).

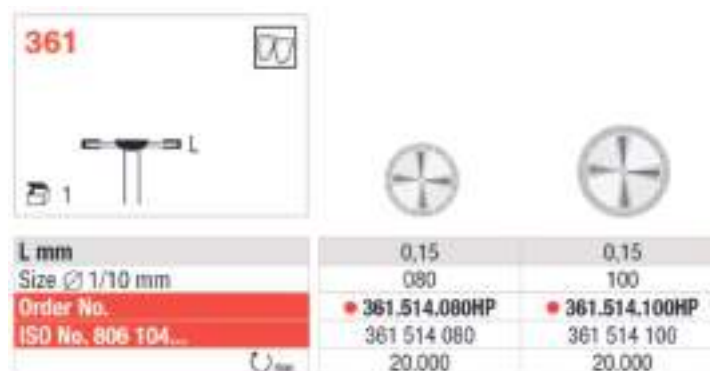

361.514.080HP | 16,60 € | obj. č. 8636180

14,20 €

Splint

- Fólie na výrobu bieliacich foriem, na výrobu tenkých dláh, na ortodontické použitie.
- Priehľadná, tenká fólia so živcovou materiálomou adhéziou, ak je prehriata, zľahka buble.
- Rozmery: 125 x 125 mm.
- Pracovný postup: Zahrejte, kým sa fólia neprehne o 12 mm. Vytvarujte vákuom a nožnicami upravte.



.020 (0,5 mm) - 25 ks | 47,20 € | obj. č. 541022x

42,70 €

.040 (1,0 mm) - 50 ks | 109,80 € | obj. č. 541038x

103,70 €

.060 (1,5 mm) - 50 ks | 147,20 € | obj. č. 541024x

132,20 €

.080 (2,0 mm) - 50 ks | 184,20 € | obj. č. 541025x

164,70 €

LUKACHrom FH

- **Nedrahokovová zliatina pre čiastočné náhrady chróm-kobaltových báz.**
- Vynikajúci pomer cena/výkon v porovnaní s inými produktmi
- **Zloženie:** Co 62,5%, Cr 30%, Mo 5% a Si 1%.

Skvelá
cena

1 000 g | 276,70 € | obj. č. 963520

232,80 €

SuperPeg II

- Žiaruvzdorná keramická pasta na stabilizáciu náhrady počas pálenia.
- Žiadne vyškrabávanie, pieskovanie po vypálení, čistení či schnutí.
- Jednoducho vytiahnite náhradu na stôl a očistite parou.



HIT

4x 12 ml | 92,30 € | obj. č. 968510

81,20 €

12 ml | 28,90 €

24,40 €

IV. trieda

Rocky Mountain

- Vynikajúca super tvrdá sadra IV. triedy v pieskovom odtieni - sahara.
- Rýchlejšia – za 25 minút môžete vybaviť hotový model z kvety.
- Presnejšia – minimálna expanzia 0,06%, po 2 aj 24 hodinách umožňuje vysokú presnosť modelov.
- Pevnejšia – vďaka vysokej pevnosti v ohybe (o 25% vyššia ako u konkurencie) nedochádza k odlamovaniu pahýľov.
- Pevnosť po 24 hodinách je 310 N/mm².



5 kg | 63,40 € | obj. č. 850061S

54,90 €





*krévké maslové sušienky
v plechovej dóze, 114 g
nad 160 €
9998695*

*praktická šnúra na
telefón cez rameno
nad 200 €
9999976*



*aplikačné mikroefky
nad 240 €
52114 1D - regular
521143D - fine*



*francúzske sprchové gély
s príjemnou vôňou
nad 280 €
9999936-8*



*bavlnené ponožky
pre stomatológov
nad 280 €
9999983-5*



*lahodné pyramídové čaje
mix druhov a príchuťí
nad 320 €
9999978*



*mobil
nie je
súčasťou*



*číre chranné okuliare
UV380, odolné proti poškrabaniu
nad 400 €
9999452*



*oranžové ochranné okuliare
UV525, odolné proti poškrabaniu
nad 600 €
9999451*

Darčeky sú dostupné do vypredania zásob.

Produkty uvedené v tomto časopise sú zdravotníckymi prostriedkami. Čítajte starostlivo návod na použitie a informácie o bezpečnom používaní, vrátane úplného určeného účelu, ktoré nájdete na stránkach www.hufa.sk.

obchodní zástupcovia SR



Košický a Prešovský kraj

Mária Vilmošová
obchodný zástupca
mob.: 0907 / 976 246
e-mail: vilmosovamaria@gmail.com



Nitriansky a Trnavský kraj

Ivan Brundlík
obchodný zástupca
mob.: 0903 / 534 688
e-mail: ibrundlik@gmail.com



Trenčiansky kraj

Martina Maras
obchodný zástupca
mob.: 0903 / 557 282
e-mail: martinka.borovska@gmail.com



Prešovský a Košický kraj

PaedDr. Miroslav Čorej
obchodný zástupca
mob.: 0905 / 663 828
e-mail: miro.corej@gmail.com



Žilinský kraj

MVDr. Janka Jedináková
obchodný zástupca
mobil: 0907 / 966 311
e-mail: jedinakova.jana@gmail.com



Banská Bystrica, Zvolen, Liptov

Erika Čísecká
obchodný zástupca
mob.: 0910 / 959 741
e-mail: cisecka.e@atlas.sk



Banská Bystrica, Zvolen, Liptov

Peter Čísecký
obchodný zástupca
mob.: 0911 914 667
e-mail: cisecky.p@atlas.sk



Telemarketing Čadca

Miroslava Hargašová
e-mail: hargasova@hufa.sk
tel.: 041 / 432 61 50
mob.: 0903 / 514 814
mob.: 0904 / 999 432



Mária Prengelová
e-mail: prengelova@hufa.sk



Telemarketing Bratislavský kraj

Andrea Vojvodíková
obchodný zástupca
mob.: 0948 / 335 190
e-mail: vojvodikova@hufa.sk

ERGO

Nové ergonomické lupové okuliare uspokojia potreby aj tých najnáročnejších používateľov. Prinášajú vlastnosti podobné mikroskopom - ešte lepšiu svetelnosť, špičkové optické vlastnosti a vylepšenú, prirodzenú ergonomiu práce.

- Prizmatické ergonomické binokuláre so špeciálnou konštrukciou a ľahším plášťom.
- Vylepšené optické vlastnosti ocenia všetci praktickí stomatológovia a obzvlášť špecialisti na endodonciu.
- Ikonický dizajn, precízne prevedenie obrúčok zo špeciálnej zliatiny titánu a leteckého hliníka.
- Dostupné vo zväčšeniach – 3,5X, 4,5X alebo 5,7X.
- Sklá umožňujú individuálnu úpravu dioptrií.
- Dostupné aj v exkluzívnej rade Black Edition, ktorá vyniká svojim luxusným prevedením vrátane extra odolnej povrchovej úpravy „Wrinkle paint“, ktorú používa aj napr. Ferrari alebo Lamborghini na svoje motory.

ŠPECIÁLNY BALÍČEK:

lupové okuliare ERGO 3,5 ITA



bezdrôtové osvetlenie EOS HP

3 862,40 €

Nový svetelný systém k lupovým okuliarom LYNX a LYNX PRO nastavuje nový štandard v oblasti profesionálneho osvetlenia. LYNX ponúka až 50 hodinovú výdrž batérie, čo je ideálne pre dlhé zákroky, zatiaľ čo LYNX PRO poskytuje presné a cieľné osvetlenie pre najjemnejšie detaily. Oba modely je možné diaľkovo ovládať hlasom alebo prostredníctvom aplikácie Univet Connect, čo umožňuje spoľahlivé ovládanie bez použitia rúk. Ľahká konštrukcia pre dokonalú rovnováhu a flexibilitu. Svetelný systém ponúka bezkonkurenčnú odolnosť vďaka komponentom odolným proti nárazom.

LYNX

50 hodín výkonu, presnosť, ktorá vydrží.

- V súlade s modrým svetlom
- Farebná teplota: 5700 K
- Jas: 38 000 luxov
- Životnosť batérie: 50 hodín / až 18 hodín pri plnom výkone
- Hmotnosť svetlometu: 10,5 g

LYNX 910282 **916,00 €**

WIRELESS

Vylepšené, exkluzívne bezdrôtové osvetlenie pre lupové okuliare.

910296 **1 482,00 €**

LYNX PRO

Bezkonkurenčná presnosť s najostrejším svetlom.

- V súlade s modrým svetlom
- Farebná teplota: 5700 K
- Jas: 50 000 luxov
- Životnosť batérie: 40 hodín / až 9 hodín pri plnom výkone
- Hmotnosť svetlometu: 15 g

LYNX PRO 910283 **1 554,00 €**

bit.ly/3Dzdoah



Pre výber lupových okuliarov a vhodného zväčšenia s osvetlením presne pre vás, kontaktujte obchodného zástupcu.

Rád Vám predvedie sortiment lupových okuliarov, vysvetlí prípadné Vaše otázky a vykoná odborné zameranie, ktoré predchádza každej objednávke lupových okuliarov.

Hu-Fa Dental,
Váš výhradný distribútor
značky Univet® pro ČR a SR

