

kity a doplňková balení

myQuickmat Hoop kit

obvodový
matricový systém



Obj. kód: 52132311 11 890 Kč 479 €

- 40 ks Quickmat hoop, přednapnuté obvodové matrice, sortiment (10x regular, 10x s křídélky)
- 2 ks myHooper napínací nástroj
- 100 ks myHoopy klínky, interdentální plastové klínky, sortiment



více
informací

myHooper napínací

Balení	Obj. kód
1 ks myHooper napínací	52132312



Quickmat Hoop

přednapnuté obvodové matrice

Balení	Velikost	Obj. kód
50 ks Quickmat hoop, regular	malé 5.5 mm	5213231
50 ks Quickmat hoop, regular	malé 6.5 mm	5213232
50 ks Quickmat hoop, regular	velké 5.5 mm	5213233
50 ks Quickmat hoop, regular	velké 6.5 mm	5213234



Balení	Velikost	Obj. kód
45 ks Quickmat hoop, s křídélky	malé 5.5 mm	5213235
45 ks Quickmat hoop, s křídélky	malé 6.5 mm	5213236
45 ks Quickmat hoop, s křídélky	velké 5.5 mm	5213237
45 ks Quickmat hoop, s křídélky	velké 6.5 mm	5213238
45 ks Quickmat hoop, s křídélky	23 malé, 22 velké 8.0 mm	5213239

myHoopy klínky

interdentální plastové klínky

Balení	Velikost	Obj. kód
100 ks myHoopy klínky	žlutá (S)	5213243
100 ks myHoopy klínky	zelená (M)	5213244
100 ks myHoopy klínky	tyrkysová (L)	5213245
100 ks myHoopy klínky	modrá (XL)	5213246
100 ks myHoopy klínky, sortiment	(30xS, 30xM, 20xL, 20xXL)	5213247



MKTC-0169-FL-EN-REV 01/06/2016

myQuickmat hoop

nové!

spolehlivé
obvodové matrice

VÝHODY

snadné nasazení podobné systému Tofflemire – bez jeho nevýhod

odnímatelný nástroj pro rychlé nasazení, utažení a přizpůsobení

anatomicky tvarovaný pásek pro těsné okraje bez převisů a přirozeně tvarované výplně

kompaktní konstrukce ideální pro stísněné prostory, včetně druhých a třetích molárů

35µm pevná tvarovaná matrice: tuhá, zachovává svůj tvar a snadno prochází těsnými body kontaktu

barevně rozlišená nastavitelná plastová cívka, která zůstává bezpečně upevněná bez povolování

otočné rameno cívky umožňující použití v kterémkoli kvadrantu chrupu



polydentia
swiss manufacture

obvodový
matricový systém

polydentia
swiss manufacture



ČR Moravni 909, 765 02 Otrokovice, hufa@hufa.cz
SR L. Podjavorinskej 1500, 022 01 Čadca, hufa@hufa.sk

www.hufa.cz
www.hufa.sk

Veškeré uvedené ceny jsou s DPH.

nové! myQuickmat hoop

obvodový
matricový systém

obvodové matrice, na které se můžete spolehnout



„Systém obvodových matric Quickmat Hoop je mimořádně uživatelsky přívětivý. I rozsáhlé kompozitní rekonstrukce lze zhotovit rychle a s vynikající předvídatelností konečného výsledku.“

Jsou zachovány aproximální kontakty i anatomický tvar zubu a čas potřebný k finálnímu opracování a leštění je vždy minimální.“

Dr. Thomas Casanova,
Švýcarsko

Klinický snímek s laskavým svolením
Dr. Perucchiho a Dr. Scognamiglia,
Švýcarsko.

Sada myQuickmat Hoop je systém obvodových matric, který zachovává známý pracovní postup nasazení matrice pomocí držáku typu Tofflemire, zároveň však odstraňuje řadu jeho tradičních omezení. Díky snadnému nasazení, anatomickému tvaru, kompaktní konstrukci, pevné matici a plně otočnému mechanismu nastavuje myQuickmat Hoop nový standard moderních obvodových matricových systémů.

Systém obsahuje výběr předem připravených obvodových matric v běžném i křídélkovém provedení, napínač a plastové interdentální klínky, které pomáhají stabilizovat matici a vytvářejí separaci sousedního zubu.

napínač

klínek

předpřipravené
obvodové matrice

Quickmat hoop



Předem sestavená matrice Quickmat Hoop jsou anatomicky tvarované obvodové matrice navržené pro přesnou práci a konzistentní klinické výsledky. Jejich odnímatelný napínač (myHooper) umožňuje rychlé a intuitivní nasazení technikou podobnou systému Tofflemire, avšak bez nutnosti ponechat v ústech pacienta objemný držák. Tím se eliminuje překážení měkkým tkáním a snižuje riziko posunutí matrice během ošetření.

Barevně rozlišená nastavitelná cívka zůstává bezpečně upevněná bez samovolného povolování, zatímco otočné rameno umožňuje použití ve všech kvadrantech chrupu.

Předpřipravené matrice Quickmat Hoop jsou dostupné v běžném i křídélkovém provedení, ve dvou obvodových velikostech (malá a velká) a ve třech výškách (5,5 mm, 6,5 mm a 8,0 mm).

Matrice Quickmat Hoop jsou k dispozici také ve verzi s křídélky, která usnadňují zhotovení rozsáhlých vícehrbolkových kompozitních rekonstrukcí. Integrovaná křídélka jsou speciálně navržena pro spolehlivé vytvoření těsných aproximálních kontaktů v situacích, kdy se matricový pásek neúmyslně odtáhne od sousedního zubu a vznikne otevřený kontakt.

regular ↗

s křídélky ↗

myHooper
napínač
odnímatelný nástroj


myHoopy
wedge

pevná, konturovaná
35um pásková matrice

barevně
kódovaná cívka

kompaktní
tvar

Tvar matrice v krčkové oblasti se nejprve zužuje a následně rozšiřuje. Napodobuje tak přirozený tvar zubu, který samozřejmě není rovný od krčku ke korunce.

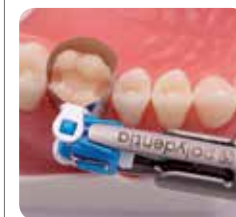

Pro zachování pevné adaptace matrice a zajištění těsných aproximálních kontaktů:

- **Možnost 1**
Během vytvrzování aproximální části kompozitu zatáhněte za křídélko matrice.
- **Možnost 2**
Pomocí flow kompozitu přichyťte křídélka k sousednímu zubu.



myHoopy klínky

myHoopy zajišťují spolehlivé oddělení, účinnou kompresi tkáně a bezpečné utěsnění matrice, které pomáhá předcházet prosakování. Jeho rovnoběžné stěny a postupně zvyšující se tuhost umožňují hladké zavedení a pevnou stabilizaci po zavedení.

umísťovací
otvor

vestavěná
zarážka

ergonomické
držátko
poskytuje precizní
kontrolu během manipulace

špička ve tvaru lyže
pomáhá chránit papilu



podívejte
se na
video