

Ultradent ŠP E C I Á L



2
2026

16. 3. - 17. 5. 2026



Vybielené zuby
pomôžu rozžiariť
váš svet



25%
zľava

Opalescence® PF

Bezpečné bielenie bez rizika poškodenia zubov:

- Opalescence má pH 6,9
- Dlhodobá výdrž vybieleného odtieňa (až niekoľko rokov)
- Zaručený bieliaci výkon po celú dobu životnosti gélu = predvídateľná doba bielenia a výsledky u väčšiny pacientov
- **20% vody** chráni pred dehydratáciou zubov a návratom k pôvodnému odtieňu
- **Formula PF** (fluorid sodný a dusičnan draselný) minimalizuje citlivosť pri a po bielení

Príchut': mäta, melón, bez príchute.

Doba bieliaceho cyklu: v priemere **5-10 aplikácií**.

1/3-1/2 striekačky na 1 nosič.

Nočné bielenie Opalescence® PF 10%
10% karbamidu peroxidu
Doba 1 aplikácie: **8-10 hodín/ noc**

Denné bielenie Opalescence® PF 16%
16% karbamidu peroxidu
Doba 1 aplikácie: **4-6 hodín/ deň**

Vybielené zuby s úžasne dlhou výdržou odtieňa (až niekoľko rokov) – nie je potrebné prebieľovať každý mesiac!

Pacient Kit **76,50 €** 402,00 €
8x 1,2 ml striekačka Opalescence® PF,
1x 25 ml bieliaca zubná pasta Opalescence, 1x krabička na nosiče,
1x kartička vzorkovník odtieňov

Doktor Kit **83,30 €** 411,00 €
8x 1,2 ml striekačka Opalescence® PF, 2x fólia Soft Tray,
1x 1,2 ml LC Block-Out Resin, 1x 25 ml bieliaca zubná pasta Opalescence,
1x krabička na nosiče, 1x kartička vzorkovník odtieňov

Refill 40x 1,2 ml striekačka Opalescence® PF **267,80 €** 357,00 €

505379 Opalescence PF 10% Dr.kit mäta exp. 31. 07. 2026* 61,00 €* 411,00 €

*Do vypredania zásob.

TIP

Bielenie doplňte Bieliacou zubnou pastou Opalescence Original alebo Opalescence Sensitivity Relief. Na výrobu bieliaceho nosiča používajte fólie s hrúbkou 0,9 mm, hrubšie fólie môžu byť príčinou citlivosti zubov pri bielení. Bieliaci nosič **MUSÍ MAŤ** rezervoáre! Bez nich je významne znížený účinok bielenia a predlžuje sa celková doba bielenia.



opalescence_czech_and_slovakia

Opalescence



- **jednoducho**
- **pohodlne**
- **s krátkou dobou aplikácie**

10%
zľava



Opalescence GO® 6 %

- univerzálny nosič so 6% peroxidu vodíka okamžite na použitie

„Bielenie za pochodu“: bez odtlačkovania, bez laboratórnej práce, bez čakania na zhotovenie bieliaceho nosiča. Nosič na jedno použitie sa po nasadení prispôsobí tvaru pacientovho chrupu tak, že gél zostáva v nosiči a nevyteká. Profesionálne vybielenie zubov vo frontálnom aj distálnom úseku chrupu. Dlhodobá výdrž vybieleného odtieňa (v priemere niekoľko rokov). Formula PF (dusičnan draselný a fluoridy) znižujú citlivosť. 20% vody znižuje dehydratáciu v priebehu bielenia a relaps k pôvodnému odtieňu. Doba 1 aplikácie: **60-90 minút/ deň**. Doba bieliaceho cyklu: 5-10 aplikácií.

Vhodné aj na oživenie a predĺženie trvanlivosti odtieňa po predchádzajúcom ordinačnom bielení alebo po profesionálnom čistení zubov. Vhodné aj pre pacientov so strojčekom.

Pacient kit 86,40 € 96,00-€
(10× dolný + 10× horný nosič + Opalescence zubná pasta 30 ml),
príchut': mäta, melón

Mini kit 40,50 € 45,00-€
(4× dolný + 4× horný nosič)
príchut': mäta



Opalescence™
whitening toothpaste



ZUBNÁ PASTA OPALESCENCE™ CHRÁNI ZUBY PRED KAZOM A PIGMENTÁCIOU. SKVELO UDRŽÍ BIELY ODTIEŇ. SKVELO CHUŤÍ.

- Jedinečná zmes tri-oxidu kremičitého aktívne odstraňuje povrchové škvrny.
- Odstránením povrchových škvŕn zosvetlí zuby o dva odtiene len za jeden mesiac¹.
- Bezpečná na každodenné, dlhodobé použitie, vhodná pre celú rodinu.
- Výnimočné vstrebávanie fluoridu sodného, pomáha lepšie chrániť pred kavitami a posilňuje sklovinu.
- Sladidlo Xylitol pomáha znižovať riziko zubného kazu.
- Nízkoabrazívna. 78 RDA zaisťuje maximálnu ochranu skloviny, dentínu a výplní³.
- **Vhodná aj na nebielené zuby.**
- Neobsahuje Triclosan ani oxid titaničitý.

Bieliaca zubná pasta Opalescence™ Original
4,8× väčšia absorpcia fluoridov sklovinou (spĺňa špecifikácie ADA)

500401 100 ml **9,90 €** 11,00-€

Bieliaca zubná pasta Opalescence™ Sensitivity Relief
5% dusičnanu draselného na zníženie citlivosti
znižuje citlivosť zubov – napr. pri a po bielení

503470 100 ml **10,80 €** 12,00-€

10%
zľava



Tip:

Chcete bieliť a máte citlivé zuby? Začnite používať Bieliacu zubnú pastu Opalescence™ Sensitivity už 14 dní pred bielením. Pomôže vám znížiť alebo odstrániť citlivosť!



UltraEZ™

Desensitizing Gel

STOP citlivosti zubov: s úsmevom aj po ordinačnom bielení

Jedinečný gél pre rýchlu úľavu pri citlivosti zubov.

Gél s 3% dusičnanu dreselného a 0,25% fluoridu sodného s postupným uvoľňovaním KNO₃. Okamžitý účinok.

Nosiče naplnené gélom sa v ústach prispôbia individuálnemu zubnému oblúku pacienta.

Dostupný aj v striekačkách - plnenie do individuálnych nosičov.

Použite pri citlivosti a obnažení zubných krčkov:

- pri citlivosti na zmeny tepla a chladu
- pri odstraňovaní zubného kameňa
- pred bielením (aj 1/2 hodiny bezprostredne pred bielením), v priebehu a po bielení

20%
zľava

UltraEZ™ Combo Kit 10× horný a 10× dolný nosič	72,00 €	90,00-€
UltraEZ™ Mini Kit 4× horný a 4× dolný nosič	32,00 €	40,00-€
UltraEZ™ striekačka: 4 × 1,2 ml	32,00 €	40,00-€



Tip:

Použite ako záverečné ošetrenie pri citlivosti po ordinačnom bielení.



Opalescence™ BOOST™ 40%



Profesionálne ordinačné bielenie na liečbu medicínskych zmien odtieňov zubov*.

- bieliaci gél s **40% peroxidu vodíka**
- patentované zloženie PF (dusičnan draselný + fluoridy)
- minimalizuje citlivosť pri a po bielení
- iba na **2×20 min** pri jednej návšteve
- **pH 6,9** po zmiešaní – šetrný k sklovine
- **20%** vody-minimálna dehydratácia pri bielení
- na bielenie celého čelustného oblúka alebo iba jednotlivých zubov
- o použití Opalescence Boost rozhoduje **zubný lekár**

pri objednaní ďalších
2 produktov Ultradent
10%***
zľava

Určený pre prípady hlbokých diskolorácií prevažne anorganického pôvodu, ktoré sú ťažko bieliteľné domácim (tzv. kozmetickým) bielením.**

Zdravotnícky prostriedok tr. IIa, CE platné do r. 2028.

Viac informácií o produkte u Vášho obchodného zástupcu. Pred použitím si prečítajte návod na použitie.

* pre-eruptívnych alebo post-eruptívnych endogénnych diskolorácií spôsobených ochorením, poranením alebo lekárske ošetrením a pigmenty anorganického pôvodu migrujúci zvnútra zuba hlboko do dentínu. Nie je alternatívou kozmetického bielenia Opalescence GF alebo Opalescencia GO.

** Indications and efficacy of tooth bleaching using high concentration of hydrogen peroxide: Prof. Dr. Olga Polydorou, University Medical Centre Freiburg, Germany, 2014.

504750 **Intro Kit – pre 2 pacientov:** **261,00 €**** 290,00 €
 4 × 1,2 ml striekačka Boost 40%
 2 × 1,2 ml OpalDam Green
 2 × IsoBlock
 20 × kanyla Black Mini
 2 × Luer Vac
 2 × kanyla SurgiTip

504751 **Pacient Kit - pre 1 pacienta:** **143,10 €**** 159,00 €
 2 × 1,2 ml striekačka Boost 40%
 1 × 1,2 ml Opalam Green
 1 × IsoBlock
 10 × kanyla Black Mini

504754 **Econo refill:** **648,90 €**** 721,00 €
 20 × 1,2 ml Boost 40%



PEAK™

UNIVERSAL ADHESIVE SYSTEM

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Peak™ Universal Bond – svetlom tuhnúce adhezívum s 0,2% chlórhexidínu

Peak™ SE Primer – samoleptací primer s pH 1,2

- Pre všetky dentálne materiály (dentín, sklovina, kov, keramika, kompozit aj **zirkón**).
- Najvyššia pevnosť väzby k dentínu (71,3 MPa) a ku sklovine (51,7 MPa)
- Pre techniku Total-Etch, aj Self-Etch.
- Nízky obsah plniva (7,5 %) a minimálna hrúbka filmu 2µm
- Na priame aj nepriame rekonštrukcie, bondovanie koreňových čapov a endodontických ošetrení
- Etylalkohol ako rozpúšťadlo

25%
zľava

504543 Peak Universal Bond 1×4 ml fľaštička

69,00 € 92,00 €

504553 Peak Universal Bond Refill 4× 1,2ml striekačka

94,00 € 125,00 €

505135 Peak SE Primer 4× 1,2ml striekačka

77,30 € 103,00 €


ULTRA-ETCH™

Samolimitujúce leptadlo pre minimalizáciu citlivosti

Leptadlo s 35% kyselinou fosforečnou

- samolimitujúca chémia leptá len do hl. **1,9µm**
- penetruje do najmenších fisúr, ale nesteká na vertikálnych povrchoch
- neobsahuje polyméry, nezanecháva rezíduá
- tixotropné, ľahko pretečie kanylou
- expiračná doba **48 mesiacov**

20%
zľava

500685 Ultra-Etch Indispense 30 ml

83,20 € 104,00 €

500163 Ultra-Etch Kit 4× 1,2 ml + 20× kanyla

49,60 € 62,00 €

500167 Ultra-Etch Econo kit 20× 1,2 ml + 40× kanyla

125,60 € 157,00 €

500164 Ultra-Etch Refill 4× 1,2 ml

42,40 € 53,00 €

500168 Ultra-Etch Refill 20× 1,2 ml

104,00 € 130,00 €



bit.ly/48ili4F

Viac balení vid'. Ultradent katalóg 2024 str. 58

Hu-Fa Výhradný dovozca v ČR a SR



Teraz aj v nových farebných variáciách



Kit 506xxx: **2 030,50 €** ~~2 265,00 €~~

1x VALO X LED COLOR lampa
1x externá difúzna šošovka
2x nabíjacia batéria
1x nabíjačka batérií
1x el. kábel pre napájanie nabíjačky alebo káblového adaptéra (adaptér nie je súčasťou balenia)
držačik na lampu
1x oranžový ochranný štítok proti modrému svetlu
1x vzorkové balenie ochranných návlékov.
NEOBSAHUJE 4x externú šošovku.

506539 VALO X Onyx Black
506519 VALO X Twilight Blue
506499 VALO X Nebula Green
506498 VALO X Stardust Gray
506497 VALO X Aurora Pink
506496 VALO X Horizon Red
506538 VALO X Galaxy Purple

VALO™ X

Širokospektrálna LED polymerizačná lampa.



Kit 505973: **2 331,00 €** ~~2 590,00 €~~

1x VALO X LED lampa (klasická)
5x externá šošovka (polymerizačná bodová, polymerizačná ProxiBall, diagnostická interproximálna, diagnostická transluminačná, diagnostické UV svetlo)
2x nabíjacia batéria
1x nabíjačka batérií
1x el. kábel pre napájanie nabíjačky alebo káblového adaptéra
1x káblový adaptér
držačik na lampu
1x oranžový ochranný štítok proti modrému svetlu
1x vzorkové balenie ochranných návlékov

10% zľava

- Priemer šošovky 12,5 mm.
- Výkonné **špeciálne LED diódy** (8 polymerizačných, 4 pre biele svetlo).
- Rozsah vlnových dĺžok 380–515 nm.
- Na polymerizáciu všetkých dentálnych materiálov vrátane bulk-fill materiálov.
- Horné a spodné podsvietené tlačidlo s farebnou indikáciou režimu.
- Štíhlejšie telo z leteckého hliníka vysoko odolné proti poškodeniu.
- Ergonomický dizajn s plochou hlavičkou s výborným dosahom do všetkých častí úst.
- **Funkcia Akcelerometer**-prepínanie medzi polymerizačnými a/alebo diagnostickými režimami pohybom zápästia.
- Možnosť jednoducho zmeniť napájanie VALO X z batériového na napájanie zo siete pomocou adaptéra, (adaptér **NIE JE** súčasťou balenia).

2 polymerizačné a 2 diagnostické režimy

Polymerizačný režim:

širokospektrálne LED diódy
2 polymerizačné výkony:
štandard (1100 mW/cm², 10 sekúnd),
extra vysoký pulzný (2 200 mW/cm²,
5 sekúnd 3x pulz s oneskorením)

Diagnostické režimy:

UV svetlo na detekciu fluorescenčných materiálov (napr. pečatidlá fisúr, výplne, indikátory plaku a i.).
Biele svetlo pre presnejší odpočet farby zuba, výplní, protetiky, určenie odtieňa pri bielení a i.
Kompatibilný s externými polymerizačnými a diagnostickými šošovkami VALO X (**NIE SU** súčasťou balenia).

10% zľava

ZÁRUKA 5 ROKOV!!

Tip:

Pri polymerizácii používajte ochranné návléky VALO X/ VALO Grand: chránite šošovku polymerizačnej lampy pred znečistením. Znečistená alebo poškodená šošovka = nižší polymerizačný výkon.

- Priemer šošovky 12,5 mm.
- Výkonné **špeciálne LED diódy** (8 polymerizačných, 4 pre biele svetlo).
- Rozsah vlnových dĺžok 380–515 nm.
- **Funkcia Akcelerometer**-prepínanie medzi polymerizačnými a/alebo diagnostickými režimami pohybom zápästia.
- Možnosť jednoducho zmeniť napájanie VALO X z batériového na napájanie zo siete pomocou adaptéra (**JE** súčasťou balenia).

2 polymerizačné a 2 diagnostické režimy

Polymerizačný režim:

širokospektrálne LED diódy
2 polymerizačné výkony: štandard (1100 mW/cm², 10 sekúnd),
extra vysoký pulzný (2 200 mW/cm², 5 sekúnd 3x pulz s oneskorením).

Diagnostické režimy:

UV svetlo na detekciu fluorescenčných materiálov (napr. pečatidlá fisúr, výplne, indikátory povlaku a i.).
Biele svetlo pre presnejší odpočet farby zuba, výplní, protetiky, určenie odtieňa pri bielení a i.
Externé polymerizačné a diagnostické šošovky VALO X, (**SU** súčasťou balenia - 5 ks celkom).

Jediné MTA, ktoré pretečie kanylou NaviTip 29ga.

ENDO-EZE[™]
Ultradent Endodontics

MTA FLOW[™] WHITE

Opravný mineral-trioxid- aggregate cement pre endodontické ošetrenie. Vhodný aj pre aplikáciu **nad klinickou líniou**.
Nezafarbuje.



- ultrajemný zrnitý prášok a proprietárne **gélové médium**
- hladká konzistencia pre každú procedúru
- odolný proti vymývaniu
- presné dávkovanie až k apexu pomocou kanyly **NaviTip 29ga Single port/ NaviTip 29ga**
- **bioaktívny**, podporuje hojenie

Kit: 8-10 aplikácií

- 1× MTAFlow White/ MTAFlow prášok (2 g)
- 1× MTAFlow White/ MTAFlow gél (2 ml)
- 1× odmerka s 2 odmernými koncami
- 20× kanyla Black Micro
- 10× striekačka Skini
- 10× uzáver Luer Lock
- 1× sprievodca technikou miešania
- 1× návod

505980 Kit MTAFlow White **218,70 €** 243,00-€

505980 Kit MTAFlow White **179,90 €*** 243,00-€
*expirácia 2026/10

NaviTip® Single SidePort 29ga®

Aplikačná ohybná kanyla na nanášanie UltraCal XS, **MTAFlow, MTAFlow White.**

1 otvor po strane bráni pretlačeniu materiálu cez apex, v dĺžkach 17, 21, 25 alebo 27 mm.

20× kanyla **73,80 €** 82,00-€



NaviTip® 29ga, 30ga


Aplikačná kanyla na endodontické ošetrenie, v dĺžkach 17, 21, 25 a 27 mm.

29ga (0,33 mm): pre EndoRez, UltraCal XS, File-Eze a **MTAFlow/ MTAFlow White.**

30ga (0,30mm): pre hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlórhexidínu, UltraEtch

20× kanyla **69,30 €** 77,00-€

50× kanyla **153,90 €** 174,00-€

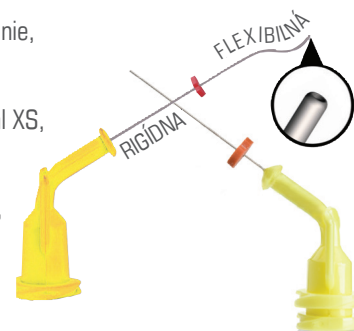

NaviTip® Double SidePort 31ga®

Aplikačná ohybná kanyla **31ga (0,28 mm)** pre hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlórhexidínu, UltraEtch.

2 otvory po stranách bránia pretlačeniu kvapaliny cez apex, v dĺžkach 21 mm alebo 27 mm.

20× kanyla **78,30 €** 87,00-€

50× kanyla **167,40 €** 186,00-€



NaviTip FX 30ga®

Aplikačná multifunkčná pevná kanyla **30 ga (0,30 mm)** pre Citric Acid.

Čistí, oškrabuje a vyplachuje, v dĺžkach 17 alebo 25 mm.

20× kanyla 17 mm **80,10 €** 89,00-€

20× kanyla 25 mm **80,10 €** 89,00-€




ZĽAVA
10%

UP[™]
ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

LEPTADLO A SILAN NA KERAMIKU
Ultradent™ PORCELAIN ETCH & SILANE


- Pufrovaná 9% kyselina fluorovodíková.
- Na intraorálne aj extraorálne leptanie keramiky.
- Nesteká.
- Nezafarbuje kompozity ani živicové cementy.
- 90 sekúnd leptanie, oplach, 60 sekúnd Ultradent® Silane.

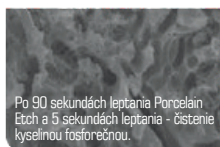

Silane refill - 2x 1,2 ml obj. č. 500410	35,10 €**	39 €
Porcelain Etch refill - 2x 1,2 ml obj. č. 500406	43,20 €**	48 €
Porcelain Etch + Silane - 2x 1,2 ml + 20 kanýľ obj. č. 501019	61,20 €**	68 €
Porcelain Etch Kit obj. č. 500405	117 €**	130 €
Porcelain Repair Kit obj. č. 501108	239,40 €**	266 €

VÝPLACHOVÁ KVAPALINA NA OTVORENIE DENTÍNŮVÝCH TUBULOV PO OPRACOVANÍ KANÁLIKA
Ultradent™ EDTA 18% roztok



- Posledná výplachová kvapalina pred použitím chlórhexidínu.
- Ponechať v kanáliku 30-60 sekúnd, potom opláchnuť fyziologickým roztokom alebo sterilnou vodou.
- **Balenie** 500162: IndiSpense 30 ml

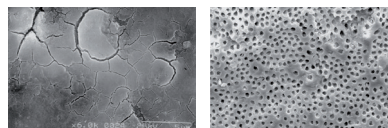

1. Kanálik po opracovaní pred použitím EDTA.
2. Kanálik s otvorenými dentínovými tubulmi po výplachu roztokom EDTA.


 30 ml | obj. č. 500162 | **31,50 €****
35 €
LUBRIKANT KOREŇOVÝCH NÁSTROJOV PRI ENDODONTICKOM OŠETRENÍ
File-Eze™ EDTA Lubrikant

- 19% EDTA viskózný gél.
- Rozpustný vo vode: ľahko sa vyplachuje.
- **NEOBSAHUJE** peroxid vodíka – vhodný pri následnom použití svetlom tuhnutých živicových plnív (napr. Endo-REZ).
- Aplikácia tiež priamo do kanálika kanylou Navi Tip.

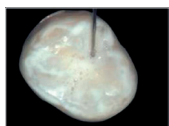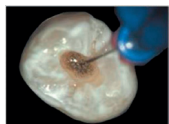

1. Naneste File-Eze pomocou kanyly NaviTip do kanálika. Môžete naniesť File-Eze priamo na nástroj. Opracujte kanálik.

2. File-Eze vypláchnite z kanálika roztokom hypochloridu sodného. Keď sa hypochlorid sodný zmieša so zvyškami File-Eze, vzniká šumivá zmes, ktorá má prídavný čistiaci účinok a odstráni z kanálika prebytočný materiál.



intro kit obj. č. 501075	116,10 €**	129 €
refill - 4x 1,2 ml obj. č. 500297	69,30 €**	77 €
IndiSpense - 30 ml obj. č. 500682	164,70 €**	183 €

TIP

Používajte pri opracovaní kanálika a tvarovaní V-zón. Nepretláčajte materiál cez apex. Nepoužívajte miesto roztoku EDTA (posledný výplach na otvorenie dentínových tubulov).

INDIKÁTORY KAZU A KALCIFIKOVANÝCH VSTUPOV DO KANÁLIKA
Sable™ Seek™

- Sfarbuje kazivý a demineralizovaný dentín.
- Umožňuje presné, bezproblémové dávkovanie.
- Tmavo zelená farba je ideálna pre prácu v blízkosti drene.


 Intro kit- 4x 1,2 ml + 20 kanýľ | obj. č. 500233 | **104,40 €****
116 €

 Refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500234 | **79,20 €****
88 €

 Econo refill - 20x 1,2 ml | obj. č. 501805 | **291,60 €****
324 €
UniCore™ čapy

- Farebné značenie pre ľahké odlišenie veľkosti.
- Mikroporézny povrch zaisťuje mikromechanickú retenciu.
- Nevyžaduje žiadne chemické ošetrovanie/kondicionovanie pred použitím.
- RTG-kontrastné podľa najvyšších noriem ISO.
- Priesvitný čap prenáša svetlo v celej hĺbke preparácie.
- Konicita zodpovedá prirodzenej anatómii zuba.
- Možno ho dobre odstrániť, pokiaľ je nutné opakované endodontické ošetrovanie.

Balenie – po 5 ks:

- Čapy veľkosti 0 (apikálny priemer 0,6mm)
- Čapy veľkosti 1 (apikálny priemer 0,8mm)
- Čapy veľkosti 2 (apikálny priemer 1 mm)
- Čapy veľkosti 3 (apikálny priemer 1,2mm)
- Čapy veľkosti 4 (apikálny priemer 1,5mm)

čapy veľkosť 0 - 5 ks obj. č. 507135	73,80 €**	82 €
čapy veľkosť 1 - 5 ks obj. č. 507125	73,80 €**	82 €
čapy veľkosť 2 - 5 ks obj. č. 507126	73,80 €**	82 €
čapy veľkosť 3 - 5 ks obj. č. 507127	73,80 €**	82 €
čapy veľkosť 4 - 5 ks obj. č. 507128	73,80 €**	82 €



BIELIENIE NEVITÁLNYCH ZUBOV TECHNIKOU WALKING BLEACH

Opalescence™ Endo

- Viskózný lepkavý gél s 35% peroxidu vodíka so zaručenou koncentráciou, nesteká.
- Technika „walking bleach“ na 3–5 dní.
- Pohodlne aplikujte zo striekačky do dreňovej dutiny zuba, ľahko sa odstráni.
- Rýchle výsledky s väčšou trvanlivosťou vybieleného odtieňa.
- **Pozor: iba na bielenie nevitálnych zubov**



Endo kit | obj. č. 501270 | **126,90 €**** **141 €**
Endo refill - 2x 1,2 ml | obj. č. 501323 | **120,60 €**** **134 €**

TIP

Na dočasné uzavretie kavity použite dočasný karboxylátový cement bez eugenolu UltraTemp Regular (kompatibilný s peroxidom vodíka) alebo provizórnu svetlom polymerizovateľnú živicu J-Temp s peroxidom vodíka

POLYKARBOXYLÁTOVÝ CEMENT BEZ EUGENOLU PRE PROVIZORNÉ FIXÁCIE / VYPLNE

UltraTemp™

- Pre **krátkodobé** provizórne fixácie (korunky, inlaye): **1-2 týždne**.
- Dočasné zatvorenie kavity.
- **Dočasné uzavretie kavity pri endo bielení do dutiny zuba.**
- **Hydrofilný**-nespôsobuje citlivosť.
- **Bez eugenolu** - šetrný k pulpe - nedráždi.
- Výborne tesní - bráni prieniku baktérií.
- Pracovný čas: 2-3min.
- Ľahko ho odstránite.



1x 5 ml + 20 kanýľ | obj. č. 505916 | **97,20 €****

108 €

PROVIZÓRNY HYDROFILNÝ CEMENT BEZ EUGENOLU NA ŽIVICOVEJ BÁZE

UltraTemp™ REZ II

- Na fixáciu provizórnych náhrad, ak je požadovaná dlhšia retencia (2–4 týždne).
- RTG kontrastné.
- Fluorescenčné-dobre viditeľný pod UV svetlom.
- Výborne tesní.
- Odoláva žuvacím silám a slinám (protetika dobre drží).
- Zloženie bez eugenolu nebude narušovať vážobnú silu.
- Doba tuhnutia 1 až 2 minúty.
- **Nevhodný v kombinácii s peroxidovými prípravkami!**



UltraTemp REZ II Fast Set Kit | obj. č. 506061 | **97,20 €****

108 €

PROVIZORNÁ SVETLOM TUHNÚCA ŽIVICA

J-Temp™

- Rádiopáka, svetlom tuhnúca, zatekáva provizórna živica na metakrylátovej báze.

KLINICKÉ INDIKÁCIE: 4 V 1



Dočasné výplne (endodontické, inlaye / onlaye, dostavba hrboľčiek, bielenie walking bleach).

Doplnenie zubnej štruktúry na upevnenie koferdamovej spony a ako bariéry proti endodontickým irigantom.

Dlahovanie medzi viacerými kapkami implantátu, pri odtlačkoch na zamedzenie deformácií odtlačkovacieho materiálu.

Frontálne zhrzy a dočasné zhrzyové valy počas ortodontickej liečby, dočasné oklúzne dostavy v ortodoncii.



kit: 4x 1,2 ml + 20 kanýľ | obj. č. 504897 | **48,60 €**** **54 €**

ZDRAVOTNÍCKE BIelenIE S KARBAMIDOM PEROXIDU DO ČAKÁRNE

Opalescence™ Quick PF 45 %

- 45% gél karbamid peroxidu
- obsahuje PF (dusičnan draselný a fluorid) ku zníženiu citlivosti pri a po bielení
- obsahuje 20% vody, bráni dehydratácii
- pH 6,9 nedemineralizuje sklovinu
- na intenzívne ošetrovanie vnútorných zmien sfarbenia
- aplikácia na 30 minút, výsledky už po 1. aplikácii
- **Na účinnejšie bielenie závažnejších diskolorácií zubov. Je nutné zhotoviť individuálny bieliaci nosič.**
- **Iba na indikáciu zubného lekára!**
- **Certifikát CE platný do 2028.**



4x 1,2 ml | obj. č. 505346 | **63 €**** **70 €**
20x 1,2 ml | obj. č. 505348 | **259,20 €**** **288 €**



Pred bielením (nedostatočný vývoj dentínu).

Po 4 aplikáciách Opalescence Quick (bieliaci gél s 45% karbamidu peroxidu = cca 15% peroxidu vodíka).



30 - 35 % PASTA HYDROXIDU VÁPENATÉHO
UltraCal™ XS

- **Možno dávkovať kanylou NaviTip 29ga - doporučené.**
- Vysoké pH 12,5.
- Lieči infikované kanáliky, podporuje hojenie kosti.
- Použite vždy, keď nemôžete kanálik vysušiť (mokvanie, krvácanie).

Balenie:

- 4x 1,2ml striekačka, 20x kanyla NaviTip - sortiment
- 20x 1,2ml striekačka


TIP

Upchala sa Vám niekedy kanyla NaviTip 29ga UltraCal XS? Pred použitím UltraCal XS prepláchnite kanylu roztokom hypochloridu sodného alebo chlorhexidínu. Problém týmto vyriešite.

mini kit 2x 1,2 ml + NaviTip kanyly
obj. č. 501024 | **34,20 €****

38 €

kit | obj. č. 505144 | **102,60 €****

114 €

refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 505145 | **56,70 €****

63 €

refill - 20x - 1,2 ml | obj. č. 505149 | **193,50 €****

215 €
ROZTOK KYSELINY CITRÓNEVEJ NA ČISTENIE A KONDICIOVANIE KOREŇOVÝCH KANÁLIKOV
Citric Acid™ 20%

- Rozpúšťa a odstraňuje hydroxid vápenatý a smear layer.
- Otvára dentínové tubuly a lubrikuje


TIP

Aplikujte pomocou kanyly NaviTip FX zo striekačky Ultradent 1,2 ml.

30 ml | obj. č. 500329 | **54,90 €****

61 €
KOMPOZIT NA UTEŠENIE A ĽAHKÚ INDIKÁCIU VSTUPU DO ENDODONTICKY OŠETRENÝCH KOREŇOVÝCH KANÁLIKOV
PermaFlo™ Purple


- Flow kompozit fialovej farby.
- Na zapečatenie a identifikáciu endodonticky ošetrených kanálikov alebo dna pulpy.
- Bráni mikropriesakom.
- **Nepresvitá cez výplne**



Purple - 2x 1,2 ml + 4 kanyly | obj. č. 500962 | **92,70 €****


103 €
SEALER KOREŇOVÝCH KANÁLIKOV
EndoREZ™

- **Hydrofilný self-priming živcový sealer koreňových kanálikov** (UDMA).
- Biokompatibilný.
- 3D plnenie, dôkladné utesnenie.
- Zatekavý do apikálnej tretiny aj do tubulov - aplikácia kanylou.
- RTG kontrastný.

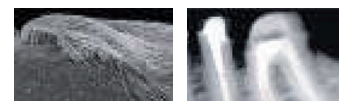

EndoREZ preniká hlboko do dentínových tubulov a vďaka obsahu nanočastic sa adaptuje do stien kanálika.

Predvídateľný výsledok, dobre kontrolovateľný na rtg snímku, umožňuje opätovné ošetrovanie aj vloženie koreňového čapu.

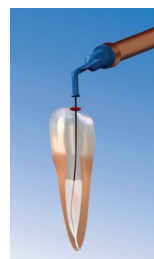

Plnenie kanálikov pomocou kanyly NaviTip.



5 ml + 20x miešacia kanyla | obj. č. 505900 | **183,60 €****

204 €
DUÁLNE TUHNÚCA KOMPOZITNÁ FIXAČNÁ A DOSTAVBOVÁ ŽIVICA
PermaFlo™ DC®

- Viacnásobné použitie vrátane cementácie čapu, dostavby jadra a fixácia protetiky.
- Najmenšia hrúbka filmu 8 μm.
- Odolný proti oteru.
- Maximálna pevnosť.
- RTG-kontrastný.
- Nízke polymerizačné zmrštenie.
- Zmiešanie v miešacej kanyle.
- Pracovný čas 2,5 minúty, doba chemického tuhnutia 5–8 minút.
- Kompatibilný s technikou totálneho leptania aj samooleptania.
- Odtiene: A2, A3.5, Translucent a Opáčna biela.




refill - 12 g + 40 kanýl | obj. č. 505913 | **114,30 €****

127 €
VIAC MOŽNOSTÍ

Zlyhanie nie je ani jednou z nich



Cementácia čapu

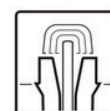

Dostavba jadra



Fixácia

SEKČNÝ MATRICOVÝ SYSTÉM

Halo™

Nitinolové krúžky

- Super-elastická zliatina niklu a titánu vydrží viac ako 1000 použití.
- Obrysy krúžkov s výstupkami bezpečne držia matricový pásik v prirodzenom anatomickom tvare.
- Prevedenie dovoľuje použitie pri výplniach MOD a iných dostavieb II. tr.

Matricové pásiky

- Anatomicky tvarované na dosiahnutie ideálneho bodu kontaktu.
- Zakrivenie okrajovej línie redukuje nutnosť dokončovacích operačných postupov.
- Hrúbka 0,038 mm originál a pevné 0,051 mm, nelepivé.

Klinky

- Stlačiteľný stred umožní anatomické prispôsobenie matrice.
- Jednoduché zavedenie klinku, v prípade potreby je možné použiť niekoľko klinkov naraz.
- Farebné značenie uľahčuje rozpoznanie veľkosti klinkov.

Karuselový zásobník:

- Prehľadný a šetrí čas.
- Lahko sa dezinfikuje dezinfekciou na povrchy.

Balenie:

- **504831–HALO Originál Kit s nástrojmi:** 2 x– universal krúžky, 5x 25 originál matrice: 3,5mm; 4,5mm; 5,5mm; 6,6mm; 7,7mm. 3x 25 klinkov (veľké, stredné, malé), 1 – kliešte, 1 – pinzeta, 1x Halo otočný zásobník

- **504832–HALO Originál Kit bez nástrojov:** 2 x– universal krúžky, 5x 25 originál matrice: 3,5mm; 4,5mm; 5,5mm; 6,6mm; 7,7mm. 3x 25 klinkov (veľké, stredné, malé), 1x Halo otočný zásobník
- **504833–HALO Firm nelepivý bez nástrojov:** 2x Univerzálne krúžky, 5x 20 ks pevných nelepivých matric 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 3x 20 ks klinkov - malé, stredné a veľké, 1 Halo otočný zásobník
- **504834–HALO Firm bez nástrojov:** 2x Univerzálne krúžky, 5x 25 ks pevných matric 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 3x 25 ks klinkov - malé, stredné a veľké, 1 Halo otočný zásobník
- **504835–HALO Original Minikit bez nástrojov:** 2x Univerzálne krúžky, 4x 5 ks original matric 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 3x 5 ks klinkov - malé, stredné a veľké, 1 Halo otočný zásobník

Halo™ SYSTÉM SEKČNÝCH MATRÍC



Originál Kit s nástrojmi obj. č. 504831	584,10 €**	649 €
HALO Firm bez nástrojov obj. č. 504834	395,10 €**	439 €
Original Minikit bez nástrojov obj. č. 504835	254,70 €**	283 €
Originál Kit bez nástrojov obj. č. 504832	395,10 €**	439 €
Firm kit, nelepivý bez nástrojov 439 € obj. č. 504833	395,10 €**	243,60 €*

RETRAKTOR ÚST, PIER A JAZYKA

Umbrella™

- Prirodzene a jemne pomáha držať ústa pacienta otvorené bez vyťahovania či roztahovania pier a namáhania TMJ.
- Chránič jazyka udržuje jazyk pohodlne opretý mimo pracovnú oblasť.
- Anatomické opierky dovoľujú lekárovi pracovať v ústach pacienta s maximálnou viditeľnosťou a komfortom pre pacienta.
- Umožňuje výborne odsávať počas výkonu, neprekáža v pracovnom poli.
- Nevyvoláva dáviaci reflex u pacientov.
- Pri kontrole zhryzu / odtlačkovaní môže zostať v ústach.

Ako zvoliť veľkosť Umbrelly?

- Ak pacient potrebuje veľkosť odtlačkovej lyžice 2-3, zvolte Umbrellu Medium.
- Ak pacient potrebuje veľkosť odtlačkovej lyžice 4-6, zvolte Umbrellu Large.
- Ak si nie ste veľkosťou istí, zvolte Umbrellu Large.



Skontrolujte, či jazyk pacienta pohodlne leží za chráničom, čo zaisťuje ľahký prístup.



Nedávajte chránič jazyka na hornú stranu jazyka pacienta.

Stredný roztvárač Umbrella, 40 ks obj. č. 505162	122,40 €**	136 €
Stredný roztvárač Umbrella, 20 ks obj. č. 504871	64,80 €**	72 €
Stredný roztvárač Umbrella, 5 ks obj. č. 504870	18 €**	20 €
Veľký roztvárač Umbrella, 40 ks obj. č. 505258	122,40 €**	136 €
Veľký roztvárač Umbrella, 20 ks obj. č. 505257	64,80 €**	72 €
Veľký roztvárač Umbrella, 5 ks obj. č. 505256	18 €**	20 €



TIP

Bezpečný pri ordináčnom bielení, neskľava, neprekáža.

* Ponuka platí do vypredania zásob.


IZOLÁCIA PRI DENTÁLNYCH VÝKONCHOCH
DermaDam™

- Kofferdam na izoláciu, nepudrovaný, vysoko odolný proti pretrhnutiu.
- DermaDam medium 0,20 mm 15 x 15 cm, 36 ks.
- DermaDam heavy 0,25 mm 15 x 15 cm, 36 ks.


 medium - 36 ks | obj. č. 500311 | **58,50 €****
65 €

 heavy - 36 ks | obj. č. 500314 | **69,30 €****
77 €
TESNENIE A TMEL POD KOFFERDAM
OraSeal™

- Efektívne prilne k vlhkému kofferdamu, tkanivám, zubom a kovu.
- Prilne aj pod vodou a slinami – oprava pretrhnutého kofferdamu pri ošetrení.
- Chráni pred kontaktom gingívy/orálneho tkaniva s chemikáliami (peroxid vodíka, kyselina fluorovodíková a iné).

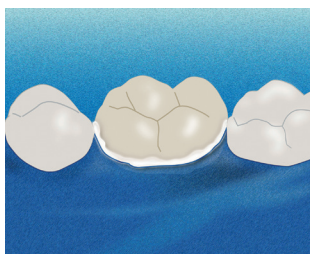
 OraSeal kit | obj. č. 500352 | **61,20 €****
68 €

 OraSeal tesnenie refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500351 | **49,50 €****
55 €

 OraSeal tmel refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500353 | **49,50 €****
55 €
Ultradent™ Luer Vacuum Adapter + Capillary Tips

- Odsatie irigantov a debritu.
- Rýchlo a účinne odsaje iriganty a debritu.
- Šetrí čas a znižuje spotrebu papierových čapov.
- Optimálna s Capillary Tips – kónickými, pružnými kanylami, s ktorými sa dostanete hlboko do kanálika.
- Capillary Tips v priemeroch 0,014" (0,35 mm - fialová) a 0,019" (0,48 mm - zelená).


 Luer adaptér - 10 ks | obj. č. 500230 | **36,90 €****
41 €

 Capillary tips 0,35 mm - 20 ks | obj. č. 500341 | **27,90 €****
31 €

 Capillary tips 0,35 mm - 50 ks | obj. č. 503099 | **58,50 €****
65 €

Kanyly Endo Eze™

- Jednorazové ohybné endodontické kanyly pre endodontické výkony (fixácia čapu a dostavby jadra, odsávanie vzduchu/vody z kanálika).
- Pružná, pevná ihla sa ľahko ohne.
- Dĺžka: 19 mm.

Balenie:

- 5034xx: 18ga, 19ga, 20ga alebo 22ga, balené po 20
- 5014xx: 18ga, 19ga, 20ga alebo 22ga, balené po 100 ks


 Endo-Eze kanyly - 20 ks | | obj. č. 500345 | **22,50 €****
25 €

 Endo-Eze kanyly - 100 ks | obj. č. 501430 | **93,60 €****
104 €
VÝPLACHOVÁ KANYLA NA ENDODONTICKÉ OŠETRENIE
Endo-Eze Irrigator 27G

- Ohybná kanyla s unikátnym zakončením.
- Zaisťuje ideálny dosah a súčasne znižuje riziko vytlačenia chemikálií ku stene kanálika, znižuje tlak pôsobiaci priamo na apex.
- Dĺžka 25 mm. Balenie po 20 ks.
- Pozn. Kanyly sú **NESTERILNÉ!**


 Endo-Eze Irrigator 27G - 20 ks | obj. č. 500207 | **24,30 €****
27 €