

Ultradent ŠP E C I Á L

3

UP
ULTRADENT
PRODUCTS, INC

2026

18. 5. - 2. 8. 2026



Dokonalý úsmev
začína tu

Opalescence



3 kroky k spokojným pacientom

1. Ukážte vašim pacientom, aké ľahké je použitie Opalescence Go.
2. Ponúknite im bielenie Opalescence Go vo vašej ordinácii.
3. Nechajte ich vybieliť Opalescenciou Go.

Zľava
25%



1. Vyberte z balenia.



2. Vycentrujte na zubný oblúk.



3. jemne prisajte alebo prehltnite.



4. Odstráňte vonkajší nosič.



5. Ak je potrebné, jemne upravte.



6. Nechajte pôsobiť 60-90 minút.

Pacient kit 72,00 € 96,00 €
(10× dolný + 10× horný nosič + Opalescence zubná pasta 30 ml)
minikit (4x dolný + 4x horný nosič), príchuť: mäta, melón

Mini kit 33,80 € 45,00 €
(4× dolný + 4× horný nosič) / príchuť: mäta, melón
minikit (4x dolný + 4x horný nosič), príchuť: mäta, melón

Opalescence GO 6%

Opalescence GO 6% - univerzálny nosič
s 6% peroxidu vodíka okamžite na použitie.

„Bielenie za pochodu“: bez odtlačku, bez laboratórnej práce,
bez čakania na zhotovenie bieliaceho nosiča.

Nosiče na jedno použitie sa po nasadení prispôbia tvaru pacientovho
chrupu tak, že gél zostáva v nosiči a nevyteká.

Profesionálne vybielenie zubov vo frontálnom aj distálnom úseku chrupu.
Dlhodobá výdrž vybieleného odtieňa (v priemere niekoľko rokov).
Formula PF (dusičnan draselný a fluoridy) znižujú citlivosť.
20% vody znižuje dehydratáciu v priebehu bielenia a relaps k pôvodnému
odtieňu.

Doba 1 aplikácie: **60-90 minút/ deň.**

Doba bieliaceho cyklu: **5-10 aplikácií.**

Vhodné aj na oživenie a predĺženie trvanlivosti odtieňa po predchádzajúcom
ordináčnom bielení alebo po profesionálnom čistení zubov.

Vhodné aj pre pacientov so strojčekom.

Genovo dostupné.

Vybílené zuby pomôžu rozšíriť váš svet

Opalescence™ PF

Bezpečné bielenie bez rizika poškodenia zubov:

- Opalescence má pH 6,9
- Dlhodobá výdrž vybieleného odtieňa (až niekoľko rokov)
- Zaručený bieliaci výkon po celú dobu životnosti gélu* predstavujúca roba bielenia
- a výsledky u väčšiny pacientov
- 20% vody chráni pred dehydratáciou zubov a návratom k pôvodnému odtieňu
- formula PF (fluorid sodný a kyselina chlorovodíková) minimalizuje citlivosť pri a po bielení

Doba bieliacého cyklu: v priemere 5-10 aplikácií. 1/3-1/2 strekačky na 1 nosič

Vybílené zuby s úložnou dĺžkou výdržou odtieňa (až niekoľko rokov)
- nie je potrebné prebafovať každý mesiac

Pacient Kit 91,80 € ~~110,00 €~~

- 8x 1,2 ml striekačka Opalescence™ PF
- 1x 25 ml bieliaca zubná pasta Opalescence
- 1x aplikácia na nosič
- 1x kartička vzorkovník odtieňa

Doktor Kit 99,90 € ~~110,00 €~~

- 8x 1,2 ml striekačka Opalescence™ PF
- 2x Wite-Silf Toy
- 1x 1,2 ml LC-Block-Out Resin
- 1x 25 ml bieliaca zubná pasta Opalescence
- 1x aplikácia na nosič
- 1x kartička vzorkovník odtieňa

Refill 321,30 € ~~330,00 €~~

- 10x 1,2 ml striekačka Opalescence™ PF



Zľava
10%

Denné bielenie Opalescence™ PF 16%
16% karbamidu peroxidu
Doba 1 aplikácie: 4-6 hodín/ deň

Nočné bielenie Opalescence™ PF 10%
10% karbamidu peroxidu
Doba 1 aplikácie: 8-10 hodín/ noc

Tip

Bielenie dopĺňte Bieliacou zubnou pastou Opalescence™ Original alebo Opalescence™ Sensitivity Relief. Na výrobu bieliacého nosča použite fólie s hrúbkou 0,9 mm, hrubšie fólie môžu byť príčinou citlivosti zubov pri bielení. Bieliaci nosič **MUSÍ MAŤ** rezervoáre! Bez nich je významne znížený účinok bielenia a predlžuje sa celková doba bielenia.

Opalescence™ whitening toothpaste

ZUBNÁ PASTA OPALESCENCE™ CHRÁNI ZUBY PRED KAZOM A PIGMENTÁCIOU.
SKVELO UDRŽÍ BIELY ODTIEŇ. SKVELO CHUTÍ.

- Jedinečná zmes tri-oxidu kremičitého aktívne odstraňuje povrchové škvrny.
- Odstránením povrchových škvŕn zosvetlí zuby o dva odtiene len za jeden mesiac.
- Bezpečná na každodenné, dlhodobé použitie, vhodná pre celú rodinu.
- Výnimočné vstrebávanie fluoridu sodného, pomáha lepšie chrániť pred kavitami a posilňuje sklovinu.
- Sladidlo Xylitol pomáha znižovať riziko zubného kazu.
- Nizkoabrazívne. 78 RDA zaisťuje maximálnu ochranu skloviny, dentínu a výplní.
- Vhodná aj na nebielené zuby.
- Neobsahuje Triclosan ani oxid titaničitý.

Zľava
10%
Na bielenie 100 ml

Bieliaca zubná pasta Opalescence™ Original
4,8x väčšia absorpcia fluoridov sklovinou (splňa špecifikácie ADA)

500401 100 ml 9,90 € ~~11,00 €~~
500402 20 ml 4,00 €

Bieliaca zubná pasta Opalescence™ Sensitivity Relief
5% dusičnanu draselného na zníženie citlivosti
znižuje citlivosť zubov – napr. pri a po bielení

503470 100 ml 10,80 € ~~12,00 €~~
503472 20 ml 4,20 €



Tip

Chcete bieliť a máte citlivé zuby? Začnite používať Bieliacu zubnú pastu Opalescence™ už 14 dní pred bielením. Pomôže vám znížiť alebo odstrániť citlivosť.

Profesionálne ordinačné bielenie na liečbu medicínskych zmien odtieňov zubov*.

**Zľava
20%**

- bieliaci gél s **40% peroxidu vodíka**
- patentované zloženie PF (dusičnan draselný + fluoridy)
- minimalizuje citlivosť pri a po bielení
- iba na **2x20 min** pri jednej návšteve
- **pH 6,9** po zmiešaní – šetrný k sklovine
- **20% vody**-minimálna dehydratácia pri bielení
- na bielenie celého čelustného oblúka alebo iba jednotlivých zubov
- o použití Opalescence Boost rozhoduje **zubný lekár**

Určený pre prípady hlbokých diskolorácií prevažne anorganického pôvodu, ktoré sú ťažko bieliteľné domácim (tzv. kozmetickým) bielením. Možno použiť na ošetrovanie zubov pre nasledujúce indikácie**:

zafarbenie zubov v dôsledku endodontického ošetrovania, zafarbenie v dôsledku pulpálneho krvácania (materiály, ošetrovanie, nekróza pulpy), resorpcia koreňa, tetracyklínové a minocyklínové zuby, amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta, fluoróza, alkaptonúria, vrodená erythropetická porfýria, vrodená hyperbilirubinémia, Turnerova hypoplázia a i.

Zdravotnícky prostriedok tr. IIa, CE platné do r. 2028.

Viac informácií o produkte u Vášho obchodného zástupcu.

Pred použitím si prečítajte návod na použitie.

* pre-erupčných alebo post-erupčných erodovaných diskolorácií spôsobených ochorením, poranením alebo lekársym ošetrovaním a pigmentmi anorganického pôvodu migrujúcich zvnútra zuba hĺboko do dentínu. Nie je alternatívou kozmetického bielenia Opalescence PF alebo Opalescence GO.
** Indications and efficacy of tooth bleaching using high concentration of hydrogen peroxide: Prof. Dr. Olga Polydzova, University Medical Centre Freiburg, Germany, 2014.



504750 Intro Kit – pre 2 pacientov:	232,00 €	290,00 €
4x 1,2 ml striekačka Boost 40%		
2x 1,2 ml OpalDam Green		
2x IsoBlock		
20x kanyla Black Mini		
2x Luer Vac		
2x kanyla SurgiTip		
504751 Pacient Kit – pre 1 pacienta:	127,20 €	159,00 €
2x 1,2 ml striekačka Boost 40%		
1x 1,2 ml Opalam Green		
1x IsoBlock		
10x kanyla Black Mini		
504754 Econo Refil:	576,80 €	721,00 €
20x 1,2 ml Boost 40%		



UltraEZ™ jedinečný gél pre rýchlu úľavu pri citlivosti zubov

Desensitizing Gel

Gél s 3% dusičnanu draselného a 0,25% fluoridu sodného s postupným uvoľňovaním KNO₃. Okamžitý účinok.

Nosiče naplnené gélom sa v ústach prispôbia individuálnemu zubnému oblúku pacienta. Dostupný aj v striekačkách - plnenie do individuálnych nosičov.

Použite pri citlivosti a obnažení zubných krčkov:

- pri citlivosti na zmeny tepla a chladu
- pri odstraňovaní zubného kameňa
- pred bielením (aj ½ hodiny bezprostredne pred bielením) a/alebo po bielení (možno použiť aj pri domácom bielení medzi jednotlivými aplikáciami)

**Zľava
10%**

** pri objednaní ďalších 2 produktov Ultradent

UltraEZ™ Combo Kit: 10x horný a 10x dolný nosič	81,00 €**	90,00 €
UltraEZ™ Mini Kit: 4x horný a 4x dolný nosič	36,00 €**	40,00 €
UltraEZ™ striekačka: 4x 1,2 ml	36,00 €**	40,00 €
UltraEZ™ striekačka: 20x 1,2 ml	126,00 €**	140,00 €

Tip

Použite ako záverečné ošetrovanie pri citlivosti po ordinačnom bielení.



Teraz aj v nových farebných variáciách



Kit 506xxx: **1 812,00 €** ~~2 265,00 €~~

1 × VALO X LED COLOR lampa
1 × externá difúzna šošovka
2 × nabíjacia batéria
1 × nabíjačka batérií
1 × el. kábel pre napájanie nabíjačky alebo káblového adaptéra (adaptér nie je súčasťou balenia)
držačik na lampu
1 × oranžový ochranný štítok proti modrému svetlu
1 × vzorkové balenie ochranných náplekov.
NEOBSAHUJE 4 × externú šošovku.

506539 VALO X Onyx Black
506519 VALO X Twilight Blue
506499 VALO X Nebula Green
506498 VALO X Stardust Gray
506497 VALO X Aurora Pink
506496 VALO X Horizon Red
506538 VALO X Galaxy Purple

VALO™ X

Širokospektrálna LED polymerizačná lampa.



Kit 505973: **2 072,00 €** ~~2 500,00 €~~

1 × VALO X LED lampa (klasická)
5 × externá šošovka (polymerizačná bodová, polymerizačná ProxiBall, diagnostická interproximálna, diagnostická transluminačná, diagnostické UV svetlo)
2 × nabíjacia batéria
1 × nabíjačka batérií
1 × el. kábel pre napájanie nabíjačky alebo káblového adaptéra
1 × káblový adaptér
držačik na lampu
1 × oranžový ochranný štítok proti modrému svetlu
1 × vzorkové balenie ochranných náplekov

20% zľava

- Priemer šošovky 12,5 mm.
- Výkonné **špeciálne LED diódy** (8 polymerizačných, 4 pre biele svetlo).
- Rozsah vlnových dĺžok 380–515 nm.
- Na polymerizáciu všetkých dentálnych materiálov vrátane bulk-fill materiálov.
- Horné a spodné podsvietené tlačidlá s farebnou indikáciou režimu.
- Štíhlejšie telo z leteckého hliníka vysoko odolné proti poškodeniu.
- Ergonomický dizajn s plochou hlavičkou s výborným dosahom do všetkých častí úst.
- **Funkcia Akcelerometer**-prepínanie medzi polymerizačnými a/alebo diagnostickými režimami pohybom zápästia.
- Možnosť jednoducho zmeniť napájanie VALO X z batériového na napájanie zo siete pomocou adaptéra, (adaptér **NIE JE** súčasťou balenia).

2 polymerizačné a 2 diagnostické režimy

Polymerizačný režim:

širokospektrálne LED diódy
2 polymerizačné výkony: štandard (1100 mW/cm², 10 sekúnd), extra vysoký pulzný (2 200 mW/cm², 5 sekúnd 3× pulz s oneskorením)

Diagnostické režimy:

UV svetlo na detekciu fluorescenčných materiálov (napr. pečatidlá fisúr, výplne, indikátory plaku a i.).
Biele svetlo pre presnejší odpočet farby zuba, výplní, protetiky, určenie odtieňa pri bielení a i.
Kompatibilný s externými polymerizačnými a diagnostickými šošovkami VALO X (**NIE SÚ** súčasťou balenia).

20% zľava

ZÁRUKA 5 ROKOV!!

Tip:

Pri polymerizácii používajte ochranné nápleky VALO X/ VALO Grand chránite šošovku polymerizačnej lampy pred znečistením! Znečistená alebo poškodená šošovka = nižší polymerizačný výkon

- Priemer šošovky 12,5 mm.
- Výkonné **špeciálne LED diódy** (8 polymerizačných, 4 pre biele svetlo).
- Rozsah vlnových dĺžok 380–515 nm.
- **Funkcia Akcelerometer**-prepínanie medzi polymerizačnými a/alebo diagnostickými režimami pohybom zápästia.
- Možnosť jednoducho zmeniť napájanie VALO X z batériového na napájanie zo siete pomocou adaptéra (**JE** súčasťou balenia).

2 polymerizačné a 2 diagnostické režimy

Polymerizačný režim:

širokospektrálne LED diódy
2 polymerizačné výkony: štandard (1100 mW/cm², 10 sekúnd), extra vysoký pulzný (2 200 mW/cm², 5 sekúnd 3× pulz s oneskorením).

Diagnostické režimy:

UV svetlo na detekciu fluorescenčných materiálov (napr. pečatidlá fisúr, výplne, indikátory povlaku a i.).
Biele svetlo pre presnejší odpočet farby zuba, výplní, protetiky, určenie odtieňa pri bielení a i.
Externé polymerizačné a diagnostické šošovky VALO X, (**SÚ** súčasťou balenia - 5 ks celkom).

GEMINI EVO™

DIÓDOVÝ LASER 810÷980

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.



100
WATTS



GEMINI™ EVO – DIÓDOVÝ LASER 810÷980 na mäkké tkanivá

- **superpulzný výkon v špičke 100 W (peak)**
- tri vlnové dĺžky 810 nm, 980 nm, duálny 810–980 nm pre optimálnu absorpciu melanínu a vody
- rýchlejší hladký rez, vysoká termálna relaxácia, tkanivo sa neškvarí
- Gemini špičky iniciované 5 mm (rezacie) a neiniciované 7 mm (dezinfekčné, dekontaminačné)
- silnejšie podsvietenie špičky - lepšia viditeľnosť v mieste zákroku
- bezdrôtový nožný pedál a prevádzka na nabíjaciu batériu

16 predvolených procedúr v 3 prehľadných kategóriách zákrokov:

- chirurgické – úprava a odstránenie orálnych tkanív
- nechirurgické – dezinfekčné, dekontaminačné (dekontaminácia parodontálnych chobotov, sulkov, koreňových kanálikov)
- úľava od bolesti / podpora hojenia s PBM adaptérmí

3 fotobiomodulačné adaptéry PBM:

1 extraorálna (25 mm),

2 intraorálne (3 mm, 7 mm)

aktualizácia a vyhradená technická podpora cez Wi-Fi pripojenie, Dashboard

Vhodný pre každodennú stomatológiu aj pre špecializácie

(čelútnú chirurgiu, parodontológiu, ortodonciu, dentálnu hygienu a i.)

FOTOBIMODULAČNÉ INTRAORÁLNE A EXTRAORÁLNE ADAPTÉRY rozširujú využitie lasera v každodennej praxi o terapiu/ liečbu bolesti a podporu hojenia, napr.:

- Liečba paralýzy tvárových nervov (poklesnuté kútiky, porucha hybnosti mimických svalov)
- Zníženie hypersensitivity dentínu u rezákov, očných zubov, premolárov, molárov
- Úľava od bolesti po extrakcii tretieho molára
- Urýchlenie posunu zubov pri ortodontickej liečbe („speed orthodontics“)
- Myogénne aj artrogénne poruchy TMJ
- Prevencia a liečba zápalov sliznice
- Prevencia a liečba herpesov, podpora hojenia a úľava od bolesti pri vredoch, áft, herpesov



509121 Gemini EVO laser Kit:

- 1x napájací zdroj
- 1x nožný pedál + batéria + USB kábel
- 10x 5mm špička rezacia
- 3x ochranné okuliare
- 3x adaptéry PBM (25 mm, 7 mm, 3 mm)

11 104,00 € 43 880,00 €

20%
zľava

Prečo by ste mali mať vo svojej ordinácii laser?

Čo sa s ním dá všetko robiť? Príďte na prednášku:

Diódové lasery: Otvorte dvere novým možnostiam liečby

Kedy: utorok 19. mája 2026

Kde: Brno



bit.ly/4ek1Arj

**POZOR,
ZMENA MIESTA
KONANIA!**



Prednášajúci:
Dr. Sergio A. Velasquez

Zubný lekár z univerzity
v Manizales v Kolumbii.

Kedy: streda 20. mája 2026

Kde: Košice



bit.ly/3VfwkRH

Gemini špičky:

508993 iniciovaná špička 5 mm (rezacia) 25 ks 331,20 € 368,00 €

508994 neiniciovaná špička 7 mm
(dezinfekčná, nerezacia) 25 ks 331,20 € 368,00 €



10%
zľava

■ 508995 ochranné okuliare Gemini EVO 311,00 €



- Fluoridový lak s 5 % fluoridu sodného (2,26 % fluoridových iónov).
- Účinná ochrana proti demineralizácii skloviny a zubnému kazu, posilňuje sklovinu (podľa ADA¹).
- Vysoká miera uvoľňovania = množstvo fluoridu dosiahnuteľné pri každom ošetroaní.
- Nadpriemerné vstrebávanie = účinnosť absorpcie fluoridových iónov.
- Nedávivé zloženie umožní ošetrovanie problematických pacientov.
- **Xylitol** ako sladidlo, dodatočná ochrana proti baktérii streptococcus mutans.
- Patentovaná adhézia = lepšia retencia, na zuboch zostáva až 48 hodín.
- Neobsahuje farbivá ani lepkú.
- Jednoduchá a rýchla aplikácia počas minúty – kefkou alebo kanylkou.
- **Jediný fluoridačný prípravok určený aj pre deti mladšie ako 1 rok.**

Čo ocenia Vaši pacienti:

- Rýchla, jednoduchá aplikácia: osušiť zuby – naniesť Enamelast™, aktivovať slinou.
- Rýchla **úľava od citlivosti**: ošetrovanie zubov alebo zubných krčkov (napr. pri bielení).
- Ošetrovanie **demineralizáciou v medzizubných priestoroch** – prevencia zubných kazov.
- **Doplnok ortodontickej liečby** – predchádzanie alebo ošetrovanie demineralizácie.

Vynikajúce príchute:

Niekoľkonásobne účinnejšie oproti iným fluoridovým prípravkom.



chladivá mäta karamel pomarančový krém zúvačka lesné ovocie pána Waltera neutrálna

blister	50 × 0,4 ml	128,70 €	143,00 €
blister	200 × 0,4 ml	452,70 €	503,00 €
striekačky	2 × 1,2 ml	14,40 €	16,00 €
striekačky	20 × 1,2 ml	117,00 €	130,00 €

striekačky kit 2×1,2 ml+ kanyla Soft Eze **alebo** Ekono kit 20×1,2 ml striekačky bez kanylí – iba v príchuti Walterberry

1. American Academy of Pediatric Dentistry, Policy statement on the use of fluoride. Adopted 1967; Reaffirmed 1977; Revised 2018. Frequently Asked Questions on Community Water Fluoridation. American Dental Association. Wexler RL, Tracy SL, Amelino T, et al. Topical fluoride for caries prevention. J Am Dent Assoc. 2013;144(11):1276-1291.

UltraSeal XT hydro™

Jediné hydrofilné živcové pečatidlo fisúr a jamiek.

- fixotropné pečatidlo na báze živice Bis-GMA
- s ideálnou viskozitou a tekutosťou
- hydrofilný pred polymerizáciou - **nevadí vlhkosť na oklúzii**
- hydrofóbny po polymerizácii
- pokročilá adhezívna technológia-zvýšená retencia
- **fluorescenčné** - viditeľné pod UV svetlom pri každej kontrole
- plnenie 53% - odolné voči oteru
- uvoľňuje/ prepúšťa fluoridy
- rádiopáčne

odtöne: Opaque White a Natural



Pred aplikáciou


Po aplikácii

Fluorescenčné pod UV svetlom



Kit:		202,50 €	225,00 €
	1× 1,2 ml striekačka UltraSeal XT hydro™		
	1× 1,2 ml striekačka Ultra-Etch™		
	20× kanyla Blue Micro		
	20× kanyla Inspirál Brush		
	Farba: natural, opakná biela		
Refil:	4× 1,2 ml	142,20 €	158,00 €

Zľava
10%

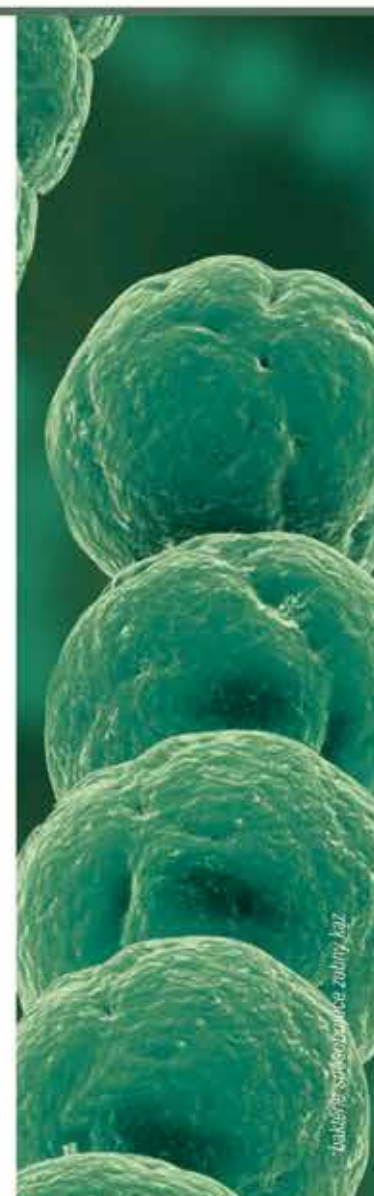

vakárske systémy a služby zubný kaz

NaviTip® Single SidePort 29ga®

Aplikačná kanyla na nanášanie UltraCal XS, MTAFlow, MTAFlow White.

- 1 otvor po strane bráni pretlačeniu materiálu cez apex
- Dĺžky 17, 21, 25 alebo 27 mm.

20× kanyla 65,60 € 82,00 €



NaviTip® Double SidePort 31ga®

Aplikačná ohybná kanyla 31ga (0,28mm) pre hypochlorid sodný, roztok EDTA 18%, Citric Acid 20%, roztok chlórhexidínu, UltraEtch.

- 2 otvory po stranách bránia pretlačeniu kvapaliny cez apex
- dĺžky 21 mm alebo 27 mm

20× kanyla 69,60 € 87,00 €
50× kanyla 148,80 € 186,00 €




NaviTip® 29ga, 30ga

Aplikačná kanyla na endodontické ošetrenie v dĺžkach 17, 21, 25 a 27 mm.

- 29ga (0,33 mm): pre EndoRez, UltraCal XS, File-Eze a MTAFlow/ MTAFlow White.
- 30ga (0,30 mm): pre hypochlorid sodný, roztok EDTA 18%, Citric Acid 20%, roztok chlórhexidínu, UltraEtch

20× kanyla 61,60 € 77,00 €
50× kanyla 136,80 € 171,00 €

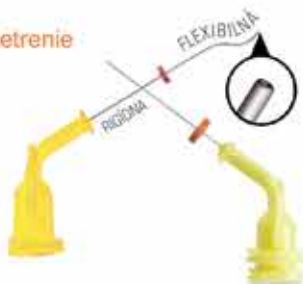

NaviTip FX 30ga®

Aplikačná kanyla pre Citric Acid multifunkčná kanyla: čistí, oškrabuje a vyplachuje pevná kanyla 30ga (0,30 mm)

- 30ga (0,30 mm)
- dĺžky 17 alebo 25 mm

20× kanyla 17 mm 71,20 € 89,00 €
20× kanyla 25 mm 71,20 € 89,00 €



Zľava 20%

Na všetky NaviTip® kanyly

Jiffy™ LEŠTIACE NÁSTROJE NA KOMPOZITA: NA POSLEDNOM KROKU ZÁLEŽÍ

Jiffy™ Natural

SYSTEM NA LEŠTENIE KOMPOZITOV

Na intraorálne leštenie akýchkoľvek kompozitov

- Ohybné kotúče v tvare špirály sa ľahko prispôbia všetkým zubným povrchom.
- Leštiaca kefka skrúteného tvaru je ideálna pre oklúzne povrchy.
- Dosahujú vysoký lesk prírodzenej skloviny.
- K dispozícii s plastovým stojanom.



506384-1 – Jiffy™ Natural Kit na leštenie kompozitov: 90,00 €* 100,00 €

- 1× špirálový leštiaci nástroj Jiffy Stredný,
- 1× špirálový leštiaci nástroj Jiffy Jemný,
- 1× krútená leštiaca kefka Jiffy Stredná,
- 1× krútená leštiaca kefka Jiffy Jemná,
- 1× plastový stojan



Refill:

- 3× špirálový kotúč (jemný alebo stredný) 74,70 €* 83,00 €
- 3× krútená kefka na oklúzie (jemná alebo stredná) 55,80 €* 62,00 €

Jiffy™ Kefky a špičky

- NA KOMPOZITY S ČASTICAMI KARBID KREMIKA

Výborný na leštenie oklúzných plôch a fisúr kompozitov či keramiky.

- 500850 Jiffy Regular Kefka 10 kusov 162,90 €* 181,00 €
- 501009 Jiffy Špička Kefka 10 kusov 162,90 €* 181,00 €



Jiffy™ ORIGINAL

INTRAORÁLNE LEŠTIACE NÁSTROJE NA KOMPOZITY

Vynikajúce na úpravu a leštenie akéhokoľvek kompozitného materiálu

- Leštiace kališky s flexibilným tenkostenným dizajnom ideálne na leštenie v blízkosti ďasna.
- Bez latexu.
- Impregnované diamantovým práškom.
- 3 hrúbosti (63µm-zelené, 45µm-žlté, 4µm-biele), 3 tvary (kališok, disk, špička).
- Na opakované použitie: znečistený povrch je možné niekoľkokrát „revitalizovať“ diamantovým vrtáčikom.
- Možno autoklavovať (odporúčame najskôr odstrániť debris ultrazvukom).



507010 – kit 18 ks sortiment: 64,80 €* 72,00 €
6× kališok (po 2 od každej hrúbosti),
3× disk (po 1 od každej hrúbosti),
9× špička (po 3 od každej hrúbosti).



Refill: 12 ks jedného typu a 1 hrúbosti v balení 46,80 €* 52,00 €

Jiffy HiShine - extrémne jemné pre vysoký lesk 10 ks v balení 65,70 €* 73,00 €

Tip:

Použite s leštiacou pastou Diamond Polish Mint 0,5 µm/1 µm (Katalóg Ultradent 2026 str. 92)

Zľava 10%*

Prí objednávke všetkých 2 produktov Ultradent.

VALO GRAND



ZÁRUKA 5 ROKOV!!

Zľava 10%

LED polymerizačné lampy

ŠIROKOSPEKTRÁLNE LED DIÓDY S ROZSAHOM VLNOVÝCH DĹŽOK 385 – 515 NM

Na polymerizáciu všetkých dentálnych materiálov. Kolimovaný zväzok svetelných lúčov.

3 polymerizačné režimy:

- štandard (1 000 mW/cm²)
- vysoký (1 600 mW/cm²)
- extra vysoký (3 200 mW/cm²)

Možnosť polymerizácie na 3 sekundy na vrstvu. Odolné proti poškodeniu pádom a poškrabaniu.

Tip:

S VALO LED lampou ušetríte – polymerizujete spoľahlivo za 3 sekundy*.
* dbajte na odporúčania výrobcov kompozitných materiálov ohľadom množstva energie v J potrebné na polymerizáciu.

- Kit 505972: VALO Grand Cordless LED lampa čierna 1.863,00 € 2.070,00 €
- Kit 504865: VALO Grand Cordless LED lampa oranžová Red Rock 1.863,00 € 2.070,00 €
- Kit 504864: VALO Grand Cordless LED lampa zařirovã modrã 1.863,00 € 2.070,00 €
- Kit 505971: VALO Grand LED lampa kãblovã 1.863,00 € 2.070,00 €

**BIELIENIE NEVITÁLNYCH ZUBOV
TECHNIKOU WALKING BLEACH**

Opalescence™ Endo

- Viskózný lepkavý gél s 35% peroxidu vodíka so zaručenou koncentráciou, nesteká.
- Technika „walking bleach“ na 3–5 dní.
- Pohodlne aplikujte zo striekačky do dreňovej dutiny zuba, ľahko sa odstráni.
- Rýchle výsledky s väčšou trvanlivosťou vybieleného odtieňa.
- **Pozor: iba na bielenie nevitálnych zubov**



Endo kit | obj. č. 501270 | **126,90 €**** **141 €**
Endo refill - 2x 1,2 ml | obj. č. 501323 | **120,60 €**** **134 €**

TIP

Na dočasnú uzavretie kavity použite dočasný karboxylátový cement bez eugenolu UltraTemp Regular (kompatibilný s peroxidom vodíka) alebo provizórnu svetlom polymerizovateľnú živicu J-Temp.



**CHEMICKO-ABRAZÍVNA PASTA
PRE MINIMÁLNE-INVAZÍVNE
OŠETRENIE ZUBOV S FLUORÓZOU**

Opalustre™

- Obsahuje 6,6% kyseliny chlorovodíkovej a mikročastice karbidu kremíka.
- Trvalo odstráni biele a hnedé škvrny z povrchu skloviny do hl. 0,2mm.
- Max. 4 aplikácie, každá po dobu 1 min.

Balenie:

- Mini kit: 2x1,2 ml Opalustre, 10x kanyla White Mac, 5x leštiaci kalíšok so štetinami Opal Cup, 5x leštiaci kalíšok Opal Cup
- Opalustre kit: 4x striekačka 1,2 ml, 20x kanyla white mac, 10x kalíšok sa štetinami opal cup, 10x leštiaci kalíšok opal cup.



kit | obj. č. 500554 | **187,20 €**** **208 €**
mini kit 2x 1,2ml + 20 kanyl | obj. č. 505554 | **112,50 €**** **125 €**
refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500555 | **134,10 €**** **149 €**
OpalCups štetinový 20 ks | obj. č. 505800 | **83,70 €**** **93 €**
OpalCups dokončovací 20 ks | obj. č. 505799 | **30,60 €**** **34 €**

TIP

Ak sú škvrny na zuboch svetlé, skúste najskôr vybieliť. Na izoláciu mäkkých tkanív použite OpalDam – viď katalóg Ultradent 2025 str. 22.

SVETLOM TUHNÚCA ŽIVIČNÁ BARIÉRA

OpalDam™ Green

- Svetlom tuhnúca živica ochranná hmota na dokonalú izoláciu tkanív a zubov.
- Použite ako gingiválnu ochranu pred použitím abrazívnej pasty Opalustre alebo ordináčného bielenia Opalescence Boost PF40%.
- Balenie kit: 4x striekačka 1,2 ml, 10x kanyla Micro 20ga, 10x kanyla Black Mini.



kit | obj. č. 501824 | **108,90 €**** **121 €**
refill - 20x 1,2 ml | obj. č. 501826 | **386,10 €**** **429 €**
refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 501825 | **95,40 €**** **106 €**

TIP

Pred aplikáciou dobre osušte vzduchom mäkké tkanivá aj zuby. Tiež pred aplikáciou môžete použiť hemostatický gél ViscoStat Clear: zastaví tvorbu sulkulárnych tekutín a udrží mäkké tkanivá suché. Použite ako gingiválnu ochranu pred použitím abrazívnej pasty Opalustre alebo ordináčného bielenia Opalescence Boost PF 40%.



Spolymerizovanú živicu ľahko odstránite v jednom kuse.

SVETLOM TUHNÚCA ŽIVIČICA PRE REZERVOÁRE NA BIELIACICH NOSIČOCH

LC Block-Out Resin

- Pre ľahké, rýchle a správne vytvarovanie bieliacich rezervoárov na bieliacich nosičoch.
- Nesteká, presne sa nanáša pomocou kanyly.
- Svetlom tuhnúci (LED lampy).
- Ďalšie použitie v laboratóriách na opravy modelov, vyblokovanie podbiehavých miest a i.
- **Balenie Kit obsahuje:** 4 x 1,2 ml a 20 kanyl Black Mini.
- **Balenie Econo Kit obsahuje:** 20x 1,2 ml a 20 kanyl Black Mini.



kit | obj. č. 500240 | **59,40 €**** **66 €**
econo kit | obj. č. 500242 | **198,90 €**** **221 €**
refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500241 | **50,40 €**** **56 €**

ZDRAVOTNÍCKE BIelenIE S KARBAMIDOM PEROXIDU DO ČAKÁRNE

Opalescence™ Quick PF 45 %

- 45% gél karbamid peroxidu
- obsahuje PF (dusičnan draselný a fluorid) ku zníženiu citlivosti pri a po bielení
- obsahuje 20% vody, bráni dehydratácii
- pH 6,9 nedemineralizuje skloviny
- na intenzívne ošetrovanie vnútorných zmien sfarbenia
- aplikácia na 30 minút, výsledky už po 1. aplikácii
- **Na účinnejšie bielenie závažnejších diskolorácií zubov.**
Je nutné zhotoviť individuálny bieliaci nosič.
- **Iba na indikáciu zubného lekára!**
- **Certifikát CE platný do 2028.**



Pred bielením (nedostatočný vývoj dentínu).


Po 4 aplikáciách Opalescence Quick (bieliaci gél s 45 % karbamidu peroxidu = cca 15 % peroxidu vodíka).



4x 1,2 ml | obj. č. 505346 | **63 €**** **70 €**
20x 1,2 ml | obj. č. 505348 | **259,20 €**** **288 €**

NA DLHODOBÉ ZNÍŽENIE CITLIVOSTI
Universal Dentin Sealant

- Blokátor dentínových tubulov.
- Vytvorí dočasnú bariéru proti baktériám, kyselinám, cementom, živiciam, a i.
- Rýchle použitie: naniesť a osušiť, NEPOLYMERIZUJE SA.
- Dlhodobý účinok (týždne až mesiace).

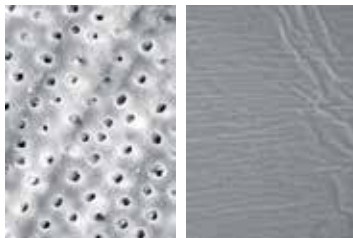

Na obidva povrchy aplikovaná kyselina fosforečná na 20 sec.

Pred aplikáciou kyseliny fosforečnej bol povrch ošetrený Universal Dentin Sealantom.

Ideálne na:

- pokrytie citlivých koreňov po root planingu
- obmedzenie postoperačnej citlivosti po výkone
- po paradontologickom ošetrení
- **pečatanie citlivých krčkov pred bielením**

- Balenie: kit 4x1,2ml striekačka + 20 kanýl
- Expiračná doba: 60 mesiacov.



refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500266 | **86,40 €****

96 €

Tvarovacie nožničky
Ultradent™ Ultra-Trim

- Na presné vystrihnutie okrajov nosičov.
- Pružinová konštrukcia minimalizuje únavu prstov.
- Vyrobené z nerez.
- Dopredaj.



1 ks | obj. č. 500605 | **122,40 €****

136 €

PEAK UNIVERSAL ADHESIVE SYSTÉM
Peak™ Universal Bond / Peak SE Primer

- **Peak Universal Bond** - svetlom tuhnúce adhesívum s 0,2% chlórhexidínu.
- Pre všetky dentálne materiály (dentín, sklovina, kov, keramika, kompozit aj zirkón).
- Najvyššia pevnosť väzby k dentínu (71,3 MPa) a k sklovine (51,7 MPa).
- Pre techniku Total-Etch, aj Self-Etch.
- Nízky obsah plniva (7,5 %) a minimálna hrúbka filmu 2µm.
- Na priame aj nepriame rekonštrukcie, bondovanie koreňových čapov a endodontických ošetrení.
- Etylalkohol ako rozpúšťadlo.

- **Peak SE Primer** – v JetMix striekačke: vždy čerstvý, nedegraduje
- Primer s najnižším pH na trhu (**pH 1,2**) - **pevná väzba aj ku sklovine.**
- Čas použiteľnosti po zmiešaní: **120 dní.**
- Zaisťuje čerstvé, stabilné chemické zloženie.
- Jednoduchý postup s nanosením jednej vrstvy.
- Presná a pohodlná aplikácia.
- Nie je potrebné oplachovať.

striekačky - 4x 1,2 ml | obj. č. 504553 | **112,50 €****

125 €

fľaštička - 4 ml | obj. č. 504543 | **82,80 €****

92 €

Peak SE - 4x 1,2 ml | obj. č. 505135 | **92,70 €****

103 €


TIP

Odporúčanie: pri technike self-etch s Peak Universal Bondom použijte **vždy** Peak SE Primer!

Sof-Tray™ fólie

• Fólia na zhotovenie nosiča / chrániča zubov tvarovaním pod tlakom.

• **Odporúčaná hrúbka pre bieliaci nosič: 0,9 mm.**

- Regular – 25 ks, hrúbka 0,9 mm
- Medium – 25 ks, hrúbka 1,5mm
- Heavy – 25 ks, hrúbka 2,0 mm



regular, hrúbka 0,9 mm - 25 ks | obj. č. 500226 | **41,40 €****

46 €

medium, hrúbka 1,5 mm - 20 ks | obj. č. 500227 | **41,40 €****

46 €

heavy, hrúbka 2,0 mm - 20 ks | obj. č. 500284 | **63,90 €****

71 €

PEČATIDLO KOMPOZITNÝCH VÝPLŇÍ
PermaSeal™

- Svetlom tuhnúca metakrylátová neplnená živica.
- Viaže sa ku kompozitu a naleptanej sklovine.
- Utesňuje mikroškráry a nepravidelnosti kompozitných výplní.
- Zabraňuje mikropriesakom, znižuje možnosť zafarbenia okrajov výplní.
- Chráni a revitalizuje provizórne živicové náhrady, vytvára vysoký lesk.
- Služí na zvlhčenie Ribbond vlákna.



Spolymerizovaný PermaSeal



Pred aplikáciou



refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500631 | **113,40 €****

126 €

mini kit 2x 1,2 ml | obj. č. 501013K | **73,80 €****

82 €

TIP

RETRAKTOR ÚST, PIER A JAZYKA

Umbrella™


- Prirodzene a jemne pomáha držať ústa pacienta otvorené bez vyťahovania či roztahovania pier a namáhania TMJ.
- Chránič jazyka udržiava jazyk pohodlne opretý mimo pracovnú oblasť.
- Anatomické opierky dovoľujú lekárovi pracovať v ústach pacienta s maximálnou viditeľnosťou a komfortom pre pacienta.
- Umožňuje výborne odsávať počas výkonu, neprekáža v pracovnom poli.
- Nevývoláva dáviaci reflex u pacientov.
- Pri kontrole zhryzu / odtlačkovaní môže zostať v ústach.

Ako zvoliť veľkosť Umbrelly?

- Ak pacient potrebuje veľkosť odtlačkovej lyžice 2-3, zvolte Umbrellu Medium.
- Ak pacient potrebuje veľkosť odtlačkovej lyžice 4-6, zvolte Umbrellu Large.
- Ak si nie ste veľkosťou istí, zvolte Umbrellu Large.

Stredný roztvárač Umbrella, 40 ks obj. č. 505162 122,40 €**	136 €
Stredný roztvárač Umbrella, 20 ks obj. č. 504871 64,80 €**	72 €
Stredný roztvárač Umbrella, 5 ks obj. č. 504870 18 €**	20 €
Veľký roztvárač Umbrella, 40 ks obj. č. 505258 122,40 €**	136 €
Veľký roztvárač Umbrella, 20 ks obj. č. 505257 64,80 €**	72 €
Veľký roztvárač Umbrella, 5 ks obj. č. 505256 18 €**	20 €

TIP
Bezpečný pri
ordinačnom
bielení, nesklzáva,
neprekáža.

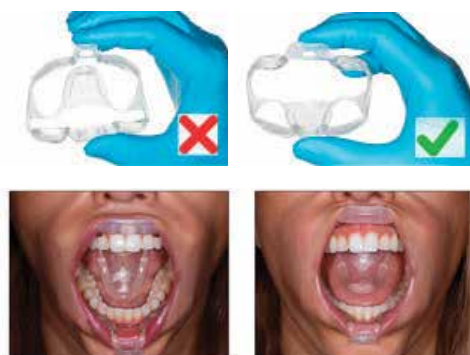

Skontrolujte, či jazyk pacienta pohodlne leží za chráničom, čo zaisťuje ľahký prístup. Nedávajte chránič jazyka na hornú stranu jazyka pacienta.



SEKČNÝ MATRICOVÝ SYSTÉM

Halo™

Nitínové krúžky

- Super-elastická zliatina niklu a titánu vydrží viac ako 1000 použití.
- Obrysy krúžkov s výstupkami bezpečne držia matricový pásik v prirodzenom anatomickom tvare.
- Prevedenie dovoľuje použitie pri výplniach MOD a iných dostavieb II. tr.

Matricové pásiky

- Anatomicky tvarované na dosiahnutie ideálneho bodu kontaktu.
- Zakrivenie okrajovej línie redukuje nutnosť dokončovacích operačných postupov.
- Hrúbka 0,038 mm originál a pevné 0,051 mm, nelepivé.

Klíčky

- Stlačiteľný stred umožní anatomické prispôsobenie matrice.
- Jednoduché zavedenie klínku, v prípade potreby je možné použiť niekoľko klínkov naraz.
- Farebné značenie uľahčuje rozpoznanie veľkosti klínkov.

Originál Kit s nástrojmi obj. č. 504831 584,10 €**	649 €
Original Minikit bez nástrojov obj. č. 504835 254,70 €**	283 €
Firm kit, nelepivý bez nástrojov obj. č. 504833 395,10 €**	439 €*
Matrice originál obj. č. 505448 64,80 €**	72 €
Matrice nelepivé, 50 ks obj. č. 505049 75,60 €**	84 €
Krúžok universal, 1 ks obj. č. 505008 136,80 €**	152 €

Karuselový zásobník:

- Prehľadný a šetrí čas.
- Ľahko sa dezinfikuje dezinfekciou na povrchy.

Balenie:

- **504831–HALO Originál Kit s nástrojmi:** 2 x – universal krúžky, 5x 25 originál matrice: 3,5mm; 4,5mm; 5,5mm; 6,6mm; 7,7mm. 3x 25 klínkov (veľké, stredné, malé), 1 – kliešte, 1 – pinzeta, 1x Halo otočný zásobník
- **504833–HALO Firm nelepivý bez nástrojov:** 2x Univerzálne krúžky, 5x 20 ks pevných nelepivých matric 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 3x 20 ks klínkov - malé, stredné a veľké, 1 Halo otočný zásobník
- **504835–HALO Originál Minikit bez nástrojov:** 2x Univerzálne krúžky, 4x 5 ks original matric 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm, 3x 5 ks klínov - malé, stredné a veľké, 1 Halo otočný zásobník



Halo™
SYSTEM SEKČNÝCH MATRIC

UNIVERZÁLNY KOMPOZIT - UNIVERZÁLNY KOMPOZIT VŽDY PRE KAŽDÚ VYPLŇ, LEN JEDEN ODTIEŇ STAČÍ.

Transcend

- Nanohybridný kompozit na báze Bis - GMA,
- Naplnený z 60-61% objemovo (71% váhovo).
- Odtieň **Universal Body** splynie s okolitým zubom/zubami.
- Umožňuje použitie **iba 1 odtieň**.
- Presne vyvážená translucencia a opacita.
- Výborný pre rekonštrukcie bielych zubov.
- Výborne lešiteľný s dlhodobou výdržou lesku.
- Fluorescencia blížiac sa prirodzenému zubu.
- Možnosť ďalších dentínových a sklovinných odtieňov (napr. pre výplne tr. III a tr. IV).
- **Inovovaná striekačka s QuadraSpace – uľahčuje manipuláciu, šetrí materiál.**

striekačka 4 g obj. č. 504733 78,30 €**	87 €
kompule, 10x 0,2g obj. č. 504744 45 €**	50 €
Econo Kit - striekačky 4x 4 g 294 € obj. č. 504734	105,80 €**
Econo Kit - kompule obj. č. 504817 153 €**	170 €



Prvý kompozit, ktorý sa po vybielení zubov nemusí nahradiť svetlejšim kompozitom. Splynie s odtieňom okolitých zubov. Ak pacient bude bieliť bieliacimi gémi Opalescence™, výplne sa prispôbia svetlejšiemu odtieňu.


* Platí do vypredania.

**HEMOSTATICKÝ VISKÓZNY GÉL S 25 %
 CHLORIDU HLINITEHO**
ViscoStat Clear™

- Transparentný gél **pre estetické zóny**.
- Na zastavenie slabšieho krvácania a sulkulárnych tekutín.
- Zostáva v sulku, nezanecháva rezíduá, nesteká.


Balenie:

- 506409 Kit: 4x 1,2 ml ViscoStat Clear + 20x kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub
- 506407 Indispense Kit: 1x 30 ml ViscoStat Clear + 20x kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub + 20x 1,2 ml prázdne striekačky
- 506408 Indispense: 1x 30 ml ViscoStat Clear

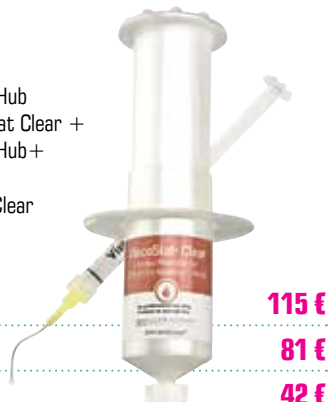

Indispense kit obj. č. 506407 103,50 €**	115 €
Indispense - 30 ml obj. č. 506408 72,90 €**	81 €
Kit obj. č. 506409 37,80 €**	42 €

VISKÓZNY, HEMOSTATICKÝ KOAGULAČNÝ GÉL S 20 % SÍRANU ŽELEZATEHO
ViscoStat™

- Hĺbková aktívna hemostáza v priebehu niekoľkých sekúnd.
- Bráni kontaminácii sulkulárnou tekutinou počas bondovania.
- Veľmi šetrný ku tkanivám.
- Na každodenné použitie pri operatívnych zákrokoch, periodontálnom ošetrovaní, gingivektómii.
- Vynikajúci ako fixátor pri pulpotómii – alternatíva formocresolu šetrnejšia k tkanivám.

Balenie:

- 500647 Indispense Kit: 1x 30 ml ViscoStat + 20x kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub + 20x 1,2 ml prázdne striekačky
- 500645 Indispense: 1x 30 ml ViscoStat
- 503093 Kit: 4x 1,2 ml ViscoStat + 20x kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub



Indispense kit obj. č. 500647 90 €**	100 €
Indispense - 30 ml obj. č. 500645 63 €**	70 €
Intro kit - 4x 1,2 ml + 20 kanýl obj. č. 503093 33,30 €**	37 €

VODNÝ HEMOSTATICKÝ ROZTOK S 12,7 % SÍRANU ŽELEZITÉHO
Astringent X™

- Najrýchlejšie a najsilnejšie hemostatikum Ultradent.
- Pre prípady, kedy môže byť dosiahnutie kvalitnej hemostázy náročnejšie (napr. Pri problematickom krvácaní, ktoré sa ťažko zastavuje).
- pH ~1,0.



Indispense 30 ml obj. č. 500690 61,20 €**	68 €
Fľaštička 30 ml obj. č. 500112 63 €**	70 €
Refill - striekačky 20x 1,2 ml obj. č. 505881 135,90 €**	151 €

VODNÝ HEMOSTATICKÝ ROZTOK S 15,5 % SÍRANU ŽELEZITÉHO
Astringent™

- Klasický hemostatický prípravok na hlbokú hemostázu.
- Zastavuje krvácanie v priebehu niekoľkých sekúnd.
- Na zastavenie povrchového krvácania pri rôznych dentálnych výkonoch a procedúrach stomatologickej chirurgie.
- pH ~1,0.



Indispense 30 ml obj. č. 500686 63 €**	70 €
Fľaštička 30 ml obj. č. 500111 63 €**	70 €

SPLIETANÉ RETRAKČNÉ VLÁKNO
Ultrapak™

- Jednoduché zavedenie
- Vynikajúca absorpcia
- Bezkonkurenčná retrakcia



Vláknó zo 100% bavlny prepletené do tvaru uzavretého tubulu sa dobre natlačí do sulku. Potom vďaka riadenej expanzii optimálne odťahne tkanivá.

Balenie:

- Kit: Ultrapak vlákno 1x 00, 0, 1, 2 + stojan



sada so stojanom, veľ. 00, 0, 1 a 2 obj. č. 509330 79,20 €**	88 €
č.000 - čierne, pre frontálne zuby obj. č. 509331 24,30 €**	27 €
č.00 - žlté, preparácie a cementovanie faziet obj. č. 509332 21,60 €**	24 €
č. 0 - fialové, dolné frontálne zuby a i. obj. č. 509333 19,80 €**	22 €
č. 1 - modré, retrakcia tkanív pri preparácii na korunku obj. č. 509334 19,80 €**	22 €
č. 2 - zelené, horné vlákno pri metóde dvoch vlákien obj. č. 509335 19,80 €**	22 €
č. 3 - červené, pre miesta so silnou gingivou obj. č. 509336 19,80 €**	22 €

Kanyla Metal Dento-Infusor™ Comfort Hub™/ Blue Mini™ Dento-Infusor™

- Plastové kanyly Blue Mini (Ø 1,20 mm) sú pružnejšie ako kanyly Metal.
- Dento-Infusor, majú mäkkšie kefky.
- Ideálne na kontrolu sulkulárnej tekutiny pri nanášaní adhezívnych výplní blízko gingívy.
- Použitie s: Astringent, Astringent X, ViscoStat, ViscoStat Clear.
- Balenie: 20ks, 100ks, 500ks.


TIP

Hemostatické prípravky ViscoStat™ a Astringent používajte s kanylou Metal Dento-Infusor™ Comfort Hub. Plastovú kanylu Blue Mini™ Dento-Infusor™ použite iba na čerstvo zahojený epitel, je menej agresívny.

Dento-Infusor 20 ks obj. č. 504954 23,40 €**	26 €
Blue-mini kanyly 20 ks obj. č. 500128 28,80 €**	32 €
Dento-Infusor 100 ks obj. č. 504955 99 €**	110 €
Blue-mini kanyly 100 ks obj. č. 501086 122,40 €**	136 €

