

Ultradent ŠPÉCIÁL

5 2026



31. 8. - 1. 11. 2026



GEMINI EVO™

SUPERPULZNÝ DENTÁLNY DIÓDOVÝ LASER NA MÄKKÉ TKANIVÁ.

REŽE. KOAGULUJE. DEKONTAMINUJE.

FOTOBIMODULÁCIA: VHODNÁ PO KAŽDOM OŠETRENÍ,
PODPORUJE HOJENIE, TLMÍ BOLEŠŤ, URÝCHĽUJE LIEČBU.

Detailné informácie nájdete na strane 6.



Dental Show 2026 | 14. novembra

29. ročník

sobota

on-line



lekári

7 kreditov
získate za účasť
na vzdelávacej akcii od SKZL

PREDNÁŠAJÚCI:



Adomas Auškalnis, DDS, PhD
Súkromná prax v Centre of Restorative Dentistry, klinika &Smile, Kaunas, Litva



Dr. Amr Elwi Helal
Endodontista, medzinárodný prednášajúci a odborný spolupracovník v oblasti endodoncie, Abú Zabí, Spojené arabské emiráty



MUDr. Martin Tomeček
Špecialista na implantológiu, estetickú a protetickú stomatológiu, Dentálna klinika 3DK, Praha



Vicente Lombardia
Training & Education Manager Europe, Solventum



Dr. Matías Ezequiel Scazzola
Vedúci profesor Katedry endodoncie na Universidad del Salvador / Asociación Odontológica Argentina a tiež docent endodoncie na National University of the West v Buenos Aires, Argentina

PROGRAM:

08:00 – 09:00	Registrácia účastníkov, prihlásenie do aplikácie.
09:00 – 11:00	Riešenie abrázie zubov a úprava oklúzie pomocou výplňových materiálov. Adomas Auškalnis, DDS, PhD, Kaunas, Litva
11:00 – 11:15	Prestávka
11:15 – 12:45	Evolúcia preparácie koreňových kanálikov bez ručných nástrojov: Vyššia bezpečnosť a lepšie zachovanie tkanív vďaka účelovo cielej metalurgii. Dr. Amr Elwi Helal, Spojené arabské emiráty
12:45 – 13:00	Prestávka
13:00 – 14:00	Ako má fungovať spolupráca implantológa, protetika a praktického stomatológa MUDr. Martin Tomeček, Praha
14:00 – 14:15	Prestávka

Podrobnejšie informácie
a prihlasovacie údaje pre lekára TU:

bit.ly/4whaD17



14:15 – 15:45	Úspešný tím v zubnej ordinácii: Komunikácia, motivácia a udržanie zamestnancov. Vicente Lombardia, Solventum
15:45 – 16:00	Prestávka
15:00 – 17:30	Biomechanické endodontické rekonštrukcie. Dr. Matías Ezequiel Scazzola, Argentina
17:30	Záver konferencie, losovanie o hodnotné ceny.

PREČO SA ZÚČASTNIŤ?

- zaujímavé témy s poprednými českými aj svetovými prednášajúcimi
- pútavé prednášky pre lekárov aj sestry – prednášky bežia súčasne
- priestor pre Vaše otázky na jednotlivých prednášajúcich
- 10-25% zľava pre účastníkov na objednávky uskutočnené v termíne 14. - 22. 11. 2026
- zľosovateľná vstupenka o hodnotné ceny
- prístup k záznamu konferencie po dobu jedného týždňa
- za účasť na konferencii budú udelené kredity v rámci systému vzdelávania pre lekárov (7 kreditov)

CENY: lekári

Prihláška do 30. 9. 2026	Prihláška od 1. 10. 2026
člen SKZL 121 €	člen SKZL 134 €
nečlen SKZL 181 €	nečlen SKZL 199 €

CENY: študenti a absolventi*

úhrada do 30. 9. 2026	úhrada od 1. 10. 2026
91 €	101 €

* k prihláške je nutné priložiť kópiu indexu alebo diplomu

sestry a dentálne hygieničky


PREDNÁŠAJÚCI:



PhDr. Eva Žabčíková
diplomovaná zdravotná sestra



Mgr. Dušan Kraus
Diplomovaný zdravotnícky záchranár s titulom magistra ošetrovateľa

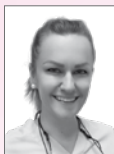

MDDr. Veronika Bačová Macáková
pedostomatologička



Michal Koudelka
oblastný manažér spoločnosti W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH pre ČR a Slovensko

6 kreditov
získate za účasť na vzdelávacej akcii
od SKSaPA a SK MTP

PROGRAM:

08:00 – 09:00	Registrácia účastníkov, prihlásenie do aplikácie.
09:00 – 10:30	Orálne zdravie u pacientov s autoimunitnými ochoreniami: praktické aspekty pre ošetrovateľskú prax. PhDr. Eva Žabčíková, diplomovaná zdravotná sestra
10:30 – 10:45	Prestávka
10:45 – 12:15	Prvá pomoc a riešenie urgentných stavov v ambulancii zubného lekára. Mgr. Dušan Kraus, záchranná služba
12:15 – 12:30	Prestávka

12:30 – 14:00	Ako ošetriť dieťa a nezbláznit' sa. MDDr. Veronika Bačová Macáková, pedostomatologička
14:00 - 14:15	Prestávka
14:15 – 15:45	Starostlivosť o nástroje v ordinácii zubného lekára: ako správne čistiť, dezinfikovať a sterilizovať – prakticky a bez zbytočnej teórie. Michal Koudelka, oblastný manažér W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH pre ČR a SR
15:45	Záver konferencie

CENY: SESTRY A DENTÁLNE HYGIENIČKY

Prihláška do 30. 9. 2026	Prihláška od 1. 10. 2026
členka 74 €	členka 81 €
nečlenka 96 €	nečlenka 105 €

Podrobnejšie informácie a prihlasovacie údaje
pre sestry a dentálne hygieničky TU:

bit.ly/4vGPAAs





*Vybielené zuby
pomôžu rozžiariť
váš svet*



25%
zľava

Opalescence® PF

Bezpečné bielenie bez rizika poškodenia zubov:

- Opalescence má pH 6,9
- Dlhodobá výdrž vybieleného odtieňa (až niekoľko rokov)
- Zaručený bieliaci výkon po celú dobu životnosti gélu = predvídateľná doba bielenia a výsledky u väčšiny pacientov
- **20% vody** chráni pred dehydratáciou zubov a návratom k pôvodnému odtieňu
- **Formula PF** (fluorid sodný a dusičnan draselný) minimalizuje citlivosť pri a po bielení

Príchut': mäta, melón, bez príchute.

Doba bieliaceho cyklu: v priemere **5-10 aplikácií**.

1/3–1/2 striekačky na 1 nosič.

Nočné bielenie Opalescence® PF 10%
10% karbamidu peroxidu
Doba 1 aplikácie: **8-10 hodín/ noc**

Denné bielenie Opalescence® PF 16%
16% karbamidu peroxidu
Doba 1 aplikácie: **4-6 hodín/ deň**

Vybielené zuby s úžasne dlhou výdržou odtieňa (až niekoľko rokov) – nie je potrebné prebieľovať každý mesiac!

Pacient Kit
8×1,2 ml striekačka Opalescence® PF,
1× 25 ml bieliaca zubná pasta Opalescence, 1× krabička na nosiče,
1× kartička vzorkovník odtieňov

76,50 € 102,00 €

Doktor Kit
8× 1,2 ml striekačka Opalescence® PF, 2× fólia Soft Tray,
1× 1,2 ml LC Block-Out Resin, 1× 25 ml bieliaca zubná pasta Opalescence,
1× krabička na nosiče, 1× kartička vzorkovník odtieňov

83,30 € 111,00 €

Refill 40×1,2 ml striekačka Opalescence® PF

267,80 € 357,00 €

TIP

Bielenie dopĺňte Bieliacou zubnou
pastou Opalescence Original
alebo Opalescence Sensitivity Relief.
Na výrobu bieliaceho nosiča používajte
fólie s hrúbkou 0,9 mm, hrubšie fólie môžu
byť príčinou citlivosti zubov pri bielení.
Bieliaci nosič **MUSÍ MAŤ** rezervoáre!
Bez nich je významne znížený
účinnok bielenia a predlžuje sa
celková doba bielenia.



opalescence_czech_and_slovakia

ZUBNÁ PASTA OPALESCENCE™
CHRÁNI ZUBY PRED KAZOM A PIGMENTÁCIOU.
SKVELO UDRŽÍ BIELY ODTIEŇ. SKVELO CHUTÍ.

Opalescence™
whitening toothpaste

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

- Jedinečná zmes tri-oxidu kremičitého aktívne odstraňuje povrchové škvrny.
- Odstránením povrchových škvŕn zosvetlí zuby o dva odtiene len za jeden mesiac¹.
- Bezpečná na každodenné, dlhodobé použitie, vhodná pre celú rodinu.
- Výnimočné vstrebávanie fluoridu sodného, pomáha lepšie chrániť pred kavitami a posilňuje sklovinu.
- Sladidlo Xylitol pomáha znižovať riziko zubného kazu.
- Nízkoabrazívna. 78 RDA zaisťuje maximálnu ochranu skloviny, dentínu a výplní³.
- **Vhodná aj na nebielené zuby.**
- Neobsahuje Triclosan ani oxid titaničitý.

Bieliaca zubná pasta Opalescence™ Original
4,8x väčšia absorpcia fluoridov sklovinou (spĺňa špecifikácie ADA)

500401	100 ml	8,80 €	11,00-€
500402	20 ml	3,60 €	4,00-€

Bieliaca zubná pasta Opalescence™ Sensitivity Relief
5% dusičnanu draselného na zníženie citlivosti,
znižuje citlivosť zubov – napr. pri a po bielení.

503470	100 ml	9,60 €	12,00-€
503472	20 ml	4,20 €	



Zľava
20%

Tip

Chcete bieliť a máte citlivé zuby?
Začnite používať Bieliacu zubnú
pastu Opalescence™
už 14 dní pred bielením.
Pomôže vám znížiť alebo
odstrániť citlivosť.

* Registrovaná ochranná známka inej spoločnosti ako Ultradent. 1. Gultz J, Kaim J, Scherer W. Whitening účinnok bielenia zubnej pasty (IADR abstract 2747). J Dent Res. 1998;77(suppl 2):975. 2. Schemehorn, BR. Enamel Fluoride Uptake 09-107. Vlastné dáta. 3. Táto zubná pasta neobsahuje peroxid. 4. Schemehorn, BR. Relative Dentin Abrasion Test na Dentifrices 11-111. Vlastné dáta.

Opalescence Dokonalý úsmev začína tu
go



Opalescence GO 6%

- univerzálny nosič s 6% peroxidu vodíka okamžite na použitie.

„Bielenie za pochodu“: bez odtlačku, bez laboratórnej práce, bez čakania na zhotovenie bieliaceho nosiča.

Nosiče na jedno použitie sa po nasadení **prispôbia tvaru pacientovho chrupu tak, že gél zostáva v nosiči a nevyteká.**

Profesionálne vybielenie zubov vo frontálnom aj distálnom úseku chrupu. Dlhodobá výdrž vybieleného odtieňa (v priemere niekoľko rokov).

Formula PF (dusičnan draselný a fluoridy) znižujú citlivosť.

20% vody znižuje dehydratáciu v priebehu bielenia a relaps k pôvodnému odtieňu.

Doba 1 aplikácie: **60-90 minút/ deň.**

Doba bieliaceho cyklu: **5-10 aplikácií.**

Vhodné aj na oživenie a predĺženie trvanlivosti odtieňa po predchádzajúcom ordinačnom bielení alebo po profesionálnom čistení zubov.

Vhodné aj pre pacientov so strojčekom.

Cenovo dostupné.

Zľava
10%

Pacient kit 86,40 € 96,00-€
(10x dolný + 10x horný nosič + Opalescence zubná pasta 30 ml)
minikit (4x dolný + 4x horný nosič), príchuť: mäta, melón

Mini kit 40,50 € 45,00-€
(4x dolný + 4x horný nosič) / príchuť: mäta, melón

SEKČNÝ MATRICOVÝ SYSTÉM

Nitinolové krúžky

- Super-elastická zliatina niklu a titánu udržuje prítlak počas ošetrovania, odoláva chemikáliám a dezinfekcii, vydrží viac ako 1000 použití.
- Nylonové hroty plnené sklom sa nezlomia ľahko a nezrúti sa počas preparácie.
- Obrisy krúžku s výstupkami bezpečne držia matricový pásik v prirodzenom anatomickom tvare.
- Prevedenie dovoľuje použitie pri výplniach MOD a iných dostavieb II. tr.
- Umožní ideálnu separáciu pri susediacich dostavbách.
- **NEW** Krátky krúžok.

505008	univerzál 1 ks	121,60 €	152,00-€
505009	univerzál 2 ks	219,20 €	274,00-€
505882	krátky 1 ks	121,60 €	152,00-€
505883	krátky 2 ks	219,20 €	274,00-€

Matricové pásy

- Anatomicky tvarované na dosiahnutie ideálneho bodu kontaktu.
 - Zakrivenie okrajovej línie pomáha určiť výšku výplne a redukuje úpravy zhryzu.
 - Jednoduché nasadenie, umiestnenie a odstránenie pri zachovaní prehľadnosti operačného poľa.
- Hrúbka 0,038mm originál a pevné, 0,051mm nelepivé.

firm/orig	50 ks	57,60 €	72,00-€
non stick	50 ks	67,20 €	84,00-€
firm/orig	100 ks	108,00 €	135,00-€
non stick	100 ks	127,20 €	159,00-€

Klinky

- Stlačiteľný stred umožní anatomické prispôsobenie matrice.
- Pevný klin: lepšia separácia pri menej traumatickom podráždení papily.
- Jednoduché zavedenie klinu, v prípade potreby je možné použiť niekoľko klinkov naraz.
- Farebné označenie uľahčuje rozpoznanie veľkosti klinkov.
- **NEW** Extra malý klin.

100 ks	43,20 €	54,00-€
--------	----------------	---------

Karuselový zásobník:

- Prehľadný, šetrí čas.
- Ľahko sa dezinfikuje dezinfekciou na povrchy.

**Zľava
20%**



504831 HALO Originál Kit s nástrojmi:
1 × univerzálny krúžok, 1 × krátky krúžok, 5 × 25 originál matrice: 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm,
4 × 25 ks klinkov – extra malé, malé, stredné, veľké, 1 × kliešte, 1 × pinzeta, 1 × Halo otočný zásobník.

519,20 € 649,00-€

509932 HALO Originál Kit bez nástrojov:
1 × univerzálny krúžok, 1 × krátky krúžok, 5 × 25 originál matrice: 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm.
4 × 25 ks klinkov – extra malé, malé, stredné, veľké, 1 × Halo otočný zásobník.

351,20 € 439,00-€

504833 HALO Firm nelepivý bez nástrojov:
1 × univerzálny krúžok, 1 × krátky krúžok, 5 × 20 pevných nelepivých matric 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm,
6,5 mm a 7,5 mm, 4 × 25 ks klinkov – extra malé, malé, stredné, veľké, 1 × Halo otočný zásobník

228,20 €* 439,00-€

509936 HALO Firm bez nástrojov:
1 × univerzálny krúžok, 1 × krátky krúžok, 5 × 25 pevných matric 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm,
4 × 25 ks klinkov – extra malé, malé, stredné, veľké, 1 × Halo otočný zásobník.

351,20 € 439,00-€

509935 HALO Original Minikit bez nástrojov:
1 × univerzálny krúžok, 1 × krátky krúžok, 4 × 5 ks original matric 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm,
4 × 5 ks klinkov – extra malé, malé, stredné, veľké, 1 × Halo otočný zásobník.

226,40 € 283,00-€

*Platí do vypredania zásob.

GEMINI EVO™

DIÓDOVÝ LASER 810÷980



FOTOBIMODULAČNÉ INTRAORÁLNE A EXTRAORÁLNE ADAPTÉRY ROZŠIRUJÚ VYUŽITIE LASERA V KAŽDODENNEJ PRAXI O TERAPIU/ LIEČBU BOLESTI A PODPORU HOJENIA, NAPR.:

- Liečba paralýzy tvárových nervov (poklesnuté kútiky, porucha hybnosti mimických svalov).
- Zníženie hypersensitivity dentínu u rezákov, očných zubov, premolárov, molárov.
- Úľava od bolesti po extrakcii tretieho molára.
- Urýchlenie posunu zubov pri ortodontickej liečbe („speed orthodontics“).
- Myogénne aj artrogénne poruchy TMJ.
- Prevencia a liečba zápalov sliznice.
- Prevencia a liečba herpesov, podpora hojenia a úľava od bolesti pri vredoch, áft, herpesov.

509121 Gemini EVO laser kit:

- 1× napájací zdroj
- 1× nožný pedál + batéria + USB kábel
- 10× 5 mm špička rezacia
- 3× ochranné okuliare
- 3× adaptéry PBM (25 mm, 7 mm, 3 mm)

11 100,00 € 43 880,00 €

Zľava
20%

508995 ochranné okuliare Gemini EVO: 311,00 €



100
WATTS

GEMINITM EVO – DIÓDOVÝ LASER 810÷980 na mäkké tkanivá

- superpulzný výkon v špičke 100 W (peak)
- tri vlnové dĺžky 810 nm, 980 nm, duálny 810–980 nm pre optimálnu absorpciu melanínu a vody
- rýchlejší hladký rez, vysoká termálna relaxácia, tkanivo sa neškvára
- Gemini špičky iniciované 5 mm (rezacie) a neiniciované 7 mm (dezinfekčné, dekontaminačné)
- silnejšie podsvietenie špičky - lepšia viditeľnosť v mieste zákroku
- bezdrôtový nožný pedál a prevádzka na nabíjaciu batériu

16

predvolených procedúr v 3 prehľadných kategóriách zákrokov:

- chirurgické – úprava a odstránenie orálnych tkanív
- nechirurgické – dezinfekčné, dekontaminačné (dekontaminácia parodontálnych chobotov, sulkov, koreňových kanálikov)
- úľava od bolesti / podpora hojenia s PBM adaptérmi


3

fotobiomodulačné adaptéry PBM:

- 1 extraorálna (25 mm),
- 2 intraorálne (3 mm, 7 mm)
- aktualizácia a vyhradená technická podpora cez Wi-Fi pripojenie, Dashboard

Vhodný

pre každodennú stomatológiu aj pre špecializácie (čelustnú chirurgiu, parodontológiu, ortodonciu, dentálnu hygienu a i.)

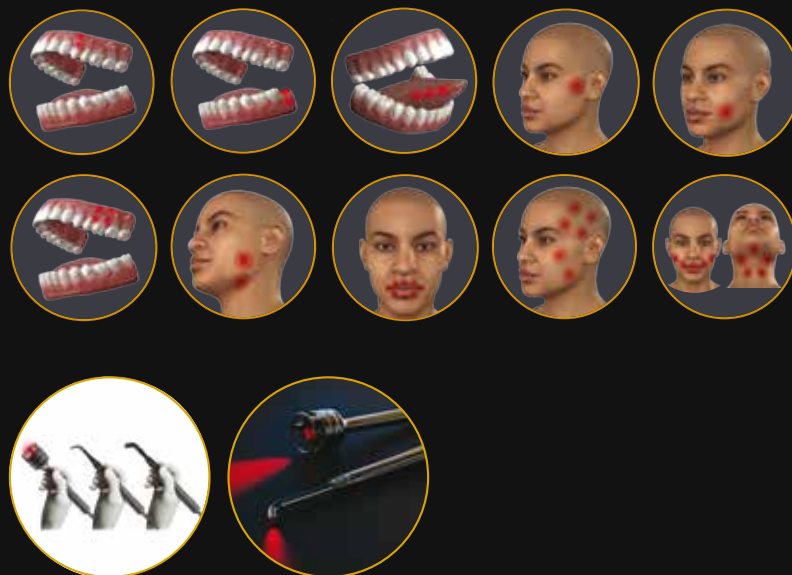

509123 Gemini EVO Intraorálny PBM adaptér kit: 296,00 € 370,00 €

- 1× 3 mm intraorálny PBM adaptér
- 1× 7 mm intraorálny PBM adaptér
- 1× čistiaca handrička

509124 Gemini EVO Extraorálny PBM adaptér kit: 528,00 € 660,00 €

- 1× 25 mm extraorálny PBM adaptér
- 2× dištančné krúžky
- 1× čistiaca handrička

Gemini špičky:

- | | | | | |
|--------|---|-------|----------|----------|
| 508993 | iniciovaná špička 5 mm (rezacia) | 25 ks | 294,40 € | 368,00 € |
| 508994 | neiniciovaná špička 7 mm (dezinfekčná, nerezacia) | 25 ks | 294,40 € | 368,00 € |



Stačí iba jeden odtieň

- Nanohybridný kompozit na báze Bis – GMA, naplnený z 60-61 % objemovo (71 % váhovo)
- Ultradent's RPM technológia-chameleón efekt dáva kompozitu unikátne optické a fyzikálne vlastnosti.
- Odtieň **Universal Body** pre estetické výplne, ktoré splynú s okolitým zubom/zubmi, za použitia iba **1 odtieňa** kompozitu. Presne vyvážená translucencia a opacita.
- Výborne leštiteľný s dlhodobou výdržou lesku.
- Fluorescencia blížiac sa prirodzenému zubu.
- Možnosť ďalších dentínových a sklovinných odtieňov (napr. pre výplne tr. III a tr. IV).
- **Striekačky sú vybavené deliacou mriežkou QuadraSpense pre lepšie dávkovanie kompozitu.**

Odtieň Universal Body Shade pre reálny vzhľad

Prvý kompozit,
ktorý po vybielení nemusíte opraviť

Splynie s odtieňom okolitých zubov
Ak pacient bude bieliť bieliacimi gémi Opalescence™,
výplne sa prispôbia svetlejšiemu odtieňu.



20%
zľava

504734	Transcend UniBody (UB) striekačka 4x4g	235,20 €	294,00 €
504817	Transcend UniBody kompule (UB) 40x0,2g	136,00 €	170,00 €
504726	Transcend kit - striekačky 7x4g, odtiene: A1D, A2D, A3D, B1D, EN, EW, UB	389,60 €	487,00 €
504814	Transcend kit - kompula 70x0,2g, odtiene: A1D, A2D, A3D, B1D, EN, EW, UB	224,00 €	280,00 €
5047xx	striekačka 1x4g	69,60 €	87,00 €
5047xx	kompula 10x0,2g	40,00 €	50,00 €

PEAK™

UNIVERSAL ADHESIVE SYSTEM

Peak™ Universal Bond
svetlom tuhnúce adhesívum s 0,2% chlórhexidínu

Peak™ SE Primer
samoleptací primer s pH 1,2

- Pre všetky dentálne materiály (dentín, sklovina, kov, keramika, kompozit aj **zirkón**).
- Najvyššia pevnosť väzby k dentínu (71,3 MPa) a ku sklovine (51,7 MPa).
- Pre techniku Total-Etch, aj Self-Etch.
- Nízky obsah plniva (7,5 %) a minimálna hrúbka filmu 2µm.
- Na priame aj nepriame rekonštrukcie, bondovanie koreňových čapov a endodontických ošetrení.
- Etylalkohol ako rozpúšťadlo.

20%
zľava

504553	Peak Universal Bond Refill 4x1,2ml striekačka	100,00 €	125,00 €
504543	Peak Universal Bond 1x4 ml fľaštička	73,60 €	92,00 €
505135	Peak SE Primer 4x1,2ml striekačka	82,40 €	103,00 €



Jiffy™ Natural

SYSTÉM NA LEŠTENIE KOMPOZITOV

Na **intraorálne leštenie** akýchkoľvek kompozitov.

- Ohybné kotúče v tvare špirály sa ľahko prispôbia všetkým zubným povrchom.
- Leštiaca kefka skrúteného tvaru je ideálna pre oklúzne povrchy.
- Dosahujú vysoký lesk prírodzenej skloviny.
- K dispozícii s plastovým stojanom.

506384-1 – Jiffy™ Natural Kit na leštenie kompozitov:

- 1× špirálový leštiaci nástroj Jiffy Stredný,
- 1× špirálový leštiaci nástroj Jiffy Jemný,
- 1× krútená leštiaca kefka Jiffy Stredná,
- 1× krútená leštiaca kefka Jiffy Jemná,
- 1× plastový stojan

Refill:

- 3× špirálový kotúč (jemný alebo stredný)
- 3× krútená kefka na oklúzie (jemná alebo stredná)



90,00 € ~~100,00 €~~



74,70 € ~~83,00 €~~
55,80 € ~~62,00 €~~

Jiffy™ Kefky a špičky

- NA KOMPOZITY S ČASTICAMI KARBID KREMIKA
Výborný na leštenie oklúzných plôch a fisúr kompozitov či keramiky.

500850 - Jiffy Regular Kefka 10 kusov

162,90 € ~~181,00 €~~

501009 - Jiffy Špička Kefka 10 kusov

162,90 € ~~181,00 €~~



Jiffy™ ORIGINAL

INTRAORÁLNE LEŠTIACE NÁSTROJE NA KOMPOZITY

Výnikajúce na úpravu a leštenie akéhokoľvek kompozitného materiálu.

- Leštiace kalíšky s flexibilným tenkostenným dizajnom ideálne na leštenie v blízkosti ďasna.
- Bez latexu.
- Impregnované diamantovým práškom.
- 3 hrúbosti (63µm-zelené, 45µm-žlté, 4µm-biele), 3 tvary (kalíšok, disk, špička).
- Na opakované použitie: znečistený povrch je možné niekoľkokrát „revitalizovať“ diamantovým vrtáčikom.
- Možno autoklávať (odporúčame najskôr odstrániť debris ultrazvukom).



507010 – kit 18 ks sortiment:

64,80 € ~~72,00 €~~

- 6× kalíšok (po 2 od každej hrúbosti),
- 3× disk (po 1 od každej hrúbosti),
- 9× špička (po 3 od každej hrúbosti).

Refill: 12 ks jedného typu a 1 hrúbosti v balení

46,80 € ~~52,00 €~~

Jiffy HiShine - extrémne jemné pre vysoký lesk
10 ks v balení

65,70 € ~~73,00 €~~



Tip:

Použite s leštiacou pastou Diamond Polish Mint 0,5 µm/1 µm
(Katalóg Ultradent 2026 str. 92)

**Zľava
10%**

ENDO-EZE

MTAFlow
WHITE

Jediné MTA,
ktoré pretečie kanylou
NaviTip 29ga.

**Zľava
10%**

Opravný mineral-trioxid-agregate cement na endodontické ošetrenia.
Vhodný aj na aplikáciu nad klinickou líniou.
Nezafarbuje.

- ultrajemný zrnitý prášok a proprietárne **gélové médium**
- hladká konzistencia pre každú procedúru
- odolný proti vymývaniu
- presné dávkovanie až k apexu pomocou kanyly
- **NaviTip 29ga Single port/ NaviTip 29ga**
- **bioaktívny**, podporuje hojenie

Kit: 8-10 aplikácií

1× MTAFlow White/MTAFlow prášok (2g), 1× MTAFlow White/MTAFlow gél (2ml), 1× odmerka s 2 odmernými koncami,
20× kanyla Black Micro, 10× striekačka Skini, 10× uzáver Luer Lock, 1× sprievodca technikou miešania, 1× návod

505980 Kit MTAFlow White **218,70 €** ~~243,00 €~~



NaviTip® Single SidePort 29ga®

Aplikačná kanyla na nanášanie UltraCal XS, MTAFlow, MTAFlow White.

- 1 otvor po strane bráni pretlačeniu materiálu cez apex
- Dĺžky 17, 21, 25 alebo 27 mm.

20× kanyla **73,80 €*** ~~82,00 €~~

NaviTip® 29ga, 30ga

Aplikačná kanyla na endodontické ošetrenie v dĺžkach 17, 21, 25 a 27 mm.

- 29ga (0,33 mm): pre EndoRez, UltraCal XS, File-Eze a MTAFlow/ MTAFlow White.
- 30ga (0,30 mm): pre hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlórhexidínu, UltraEtch

20× kanyla **69,30 €*** ~~77,00 €~~

50× kanyla **153,90 €*** ~~171,00 €~~



NaviTip® Double SidePort 31ga®

Aplikačná ohybná kanyla 31ga (0,28mm) pre hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlórhexidínu, UltraEtch.

- 2 otvory po stranách bránia pretlačeniu kvapaliny cez apex
- dĺžky 21 mm alebo 27 mm

20× kanyla **78,30 €*** ~~87,00 €~~

50× kanyla **167,40 €*** ~~186,00 €~~



NaviTip FX 30ga®

Aplikačná kanyla pre Citric Acid

multifunkčná kanyla: čistí, oškrabuje a vyplachuje pevná kanyla

- 30ga (0,30 mm)
- dĺžky 17 alebo 25 mm

20× kanyla 17 mm **80,10 €*** ~~89,00 €~~

20× kanyla 25 mm **80,10 €*** ~~89,00 €~~



**Zľava
10%***

Pri objednávke ďalších
2 produktov Ultradent
všetky NaviTip®
kanyly

- Fluoridový lak s 5 % fluoridu sodného (2,26 % fluoridových iónov).
- Účinná ochrana proti demineralizácii skloviny a zubnému kazu, posilňuje sklovinu (podľa ADA¹).
- Vysoká miera uvoľňovania = množstvo fluoridu dosiahnuteľné pri každom ošetrení.
- Nadpriemerné vstrebávanie = účinnosť absorpcie fluoridových iónov.
- Nedávivé zloženie umožní ošetrenie problematických pacientov.
- Xylitol ako sladidlo, dodatočná ochrana proti baktérii streptococcus mutans.
- Patentovaná adhézia = lepšia retencia, na zuboch zostáva až 48 hodín.
- Neobsahuje farbivá ani lepk.
- Jednoduchá a rýchla aplikácia počas minúty – kefkou alebo kanylkou.
- **Jediný fluoridačný prípravok určený aj pre deti mladšie ako 1 rok.**

Čo ocenia Vaši pacienti:

- Rýchla **úľava od citlivosti**: ošetrenie zubov alebo zubných krčkov (napr. pri bielení).
- Ošetrenie **demineralizáciou v medzizubných priestoroch** – prevencia zubných kazov.
- **Doplnok ortodontickej liečby** – predchádzanie alebo ošetrenie demineralizácie.

Vynikajúce príchute:

Walterberry – lesné ovocie, vynikajúci pomarančový krém, chladivá mäta, žuvačka a karamel. Niekoľkonásobne účinnejšie oproti iným fluoridovým prípravkom.

Novinka: malina, vanilka

Balenie:

striekačky kit 2x1,2ml+ kanyly Soft Eze alebo Ekono kit 20x1,2ml striekačky bez kanýl – iba v príchuti

Walterberry

jednorazové blistre 50x0,4ml alebo 200x0,4ml v príchutiach Walterberry,

pomarančový krém, žuvačka, chladivá mäta, karamel, bez príchute, malina, vanilka



Neutrálna



Chladivá mäta



Karamel



Pomarančový
krém



Žuvačka



Lesné ovocie pána
Waltera



Vanilka



Malina

**ZĽAVA
10%**



blister	50 x 0,4 ml	128,70 €	143,00 €
blister	200 x 0,4 ml	452,70 €	503,00 €
504521 striekačky	2 x 1,2 ml	14,40 €	16,00 €
504523 striekačky	20 x 1,2 ml	117,00 €	130,00 €

1. American Academy of Pediatric Dentistry. Policy statement on the use of fluoride. Adopted 1967. Reaffirmed 1977. Revised 2018. Frequently Asked Questions on Community Water Fluoridation. American Dental Association. Weyant RJ, Tracy SL, Anselmo T, et al. Topical fluoride for caries prevention. J Am Dent Assoc. 2013;144(11):1279–1291

Porcelain Etch a Silane Leptadlo a silan na keramiku



Povrch keramiky pred leptaním



Po 90 sekundách leptania Porcelain Etch a 5 sekundách leptania - čistenie kyselinou fosforečnou

**ZĽAVA
10%**



500406 Porcelain Etch Refill:	2x1,2 ml striekačka	43,20 €	48,00 €
501019 Porcelain Etch + Silane:	2x1,2 ml, 20 kanýl	61,20 €	68,00 €
500410 Silane Refill:	2x1,2 ml striekačka	35,10 €	39,00 €

VALO
GRAND



**ZÁRUKA
5 ROKOV!!**

**ZĽAVA
10%**

LED polymerizačné lampy

ŠIROKOSPEKTRÁLNE LED DIÓDY S ROZSAHOM VLNŮVÝCH DÍŽOK 385 – 515 NM

Na polymerizáciu všetkých dentálnych materiálov.
Kolimovaný zväzok svetelných lúčov.

3 polymerizačné režimy:

- štandard (1 000 mW/cm²)
- vysoký (1 600 mW/cm²)
- extra vysoký (3 200 mW/cm²)

Možnosť polymerizácie na 3 sekundy na vrstvu.
Odolné proti poškodeniu pádom a poškriabaniu.

Tip:

S VALO LED lampou ušetríte
– Spolymerizujete spoľahlivo za 3 sekundy!
Dbajte na odporúčania výrobcov kompozitných
materiálov ohľadom množstva energie v J
potrebného na polymerizáciu.

Kit 505972: VALO Grand Cordless LED lampy čierna	1 863,00 €	2 070,00 €
Kit 504865: VALO Grand Cordless LED lampy oranžová Red Rock	1 863,00 €	2 070,00 €
Kit 504864: VALO Grand Cordless LED lampy zafirová modrá	1 863,00 €	2 070,00 €
Kit 505971: VALO Grand LED lampy káblová	1 737,00 €	1 930,00 €

Širokospektrálna LED polymerizačná lampa.

Kit 505973: **2 331,00 €** 2-590,00-€

1 × VALO X LED lampa (klasická)
5 × externá šošovka (polymerizačná bodová, polymerizačná ProxiBall, diagnostická interproximálna, diagnostická transluminačná, diagnostické UV svetlo)
 2 × nabíjacia batéria
 1 × nabíjačka batérií
 1 × el. kábel pre napájanie nabíjačky alebo káblového adaptéra
1 × káblový adaptér
 držiak na lampu
 1 × oranžový ochranný štítok proti modrému svetlu
 1 × vzorkové balenie ochranných návlakov

**10%
zľava**

Teraz aj v nových farebných variáciách

**ZÁRUKA
5 ROKOV!!**



506539 VALO X Onyx Black
 506519 VALO X Twilight Blue
 506499 VALO X Nebula Green
 506498 VALO X Stardust Gray
 506497 VALO X Aurora Pink
 506496 VALO X Horizon Red
 506538 VALO X Galaxy Purple

Kit 506xxx: **2 038,50 €** 2-265,00-€

1 × VALO X LED COLOR lampa
 1 × externá difúzna šošovka
 2 × nabíjacia batéria
 1 × nabíjačka batérií
 1 × el. kábel pre napájanie nabíjačky alebo káblového adaptéra
(adaptér nie je súčasťou balenia)
 držiak na lampu
 1 × oranžový ochranný štítok proti modrému svetlu
 1 × vzorkové balenie ochranných návlakov.
NEOBSAHUJE 4 × externú šošovku.

- Priemer šošovky 12,5 mm.
- Výkonné **špeciálne LED diódy** (8 polymerizačných, 4 pre biele svetlo).
- Rozsah vlnových dĺžok 380–515 nm.
- **Funkcia Akcelerometer**-prepínanie medzi polymerizačnými a/alebo diagnostickými režimami pohybom zápästia.
- Možnosť jednoducho zmeniť napájanie VALO X z batériového na napájanie zo siete pomocou adaptéra
- (JE súčasťou balenia).

2 polymerizačné a 2 diagnostické režimy

Polymerizačný režim:

širokospektrálne LED diódy

2 polymerizačné výkony: štandard (1100 mW/cm², 10 sekúnd), extra vysoký pulzný (2 200 mW/cm², 5 sekúnd 3 × pulz s oneskorením).

Diagnostické režimy:

UV svetlo na detekciu fluorescenčných materiálov

(napr. pečatidlá fisúr, výplne, indikátory povlaku a i.).

Biele svetlo pre presnejší odpočet farby zuba, výplní, protetiky, určenie odtieňa pri bielení a i.

Externé polymerizačné a diagnostické šošovky VALO X, (SÚ súčasťou balenia - 5 ks celkom).

- Priemer šošovky 12,5 mm.
- Výkonné **špeciálne LED diódy** (8 polymerizačných, 4 pre biele svetlo).
- Rozsah vlnových dĺžok 380–515 nm.
- Na polymerizáciu všetkých dentálnych materiálov vrátane bulk-fill materiálov.
- Horné a spodné podsvietené tlačidlo s farebnou indikáciou režimu.
- Štíhlejšie telo z leteckého hliníka vysoko odolné proti poškodeniu.
- Ergonomický dizajn s plochou hlavičkou s výborným dosahom do všetkých častí úst.
- **Funkcia Akcelerometer**-prepínanie medzi polymerizačnými a/alebo diagnostickými režimami pohybom zápästia.
- Možnosť jednoducho zmeniť napájanie VALO X z batériového na napájanie zo siete pomocou adaptéra, (adaptér **NIE JE** súčasťou balenia).

2 polymerizačné a 2 diagnostické režimy

Polymerizačný režim:

širokospektrálne LED diódy

2 polymerizačné výkony:

štandard (1100 mW/cm², 10 sekúnd), extra vysoký pulzný (2 200 mW/cm², 5 sekúnd 3 × pulz s oneskorením)

Diagnostické režimy:

UV svetlo na detekciu fluorescenčných materiálov

(napr. pečatidlá fisúr, výplne, indikátory plaku a i.).

Biele svetlo pre presnejší odpočet farby zuba, výplní, protetiky, určenie odtieňa pri bielení a i.

Kompatibilný s externými polymerizačnými a diagnostickými šošovkami VALO X (**NIE SÚ** súčasťou balenia).

**10%
zľava**

Tip:

Pri polymerizácii používajte ochranné návlaky VALO X/ VALO Grand: chránite šošovku polymerizačnej lampy pred znečistením. Znečistená alebo poškodená šošovka = nižší polymerizačný výkon.

GÉL NA ZNÍŽENIE CITLIVOSTI ZUBOV

UltraEZ™

- Gél s 3% dusičnanu draselného a 0,25% fluoridu sodného s postupným uvoľňovaním, KNO₃, okamžite znižuje citlivosť zubov.
- Predplnené nosiče v ultratesnom nosiči, ktorý sa v ústach prispôsobí individuálnemu zubnému oblúku pacienta.

Použite pri:

- Citlivosti a obnaženie zubných krčkov.
- Citlivosti na zmeny tepla a chladu.
- Pri odstraňovaní zubného kameňa.
- Pred bielením (aj ½ hodiny bezprostredne pred bielením), v priebehu a po bielení.



Combo kit H + D - 20 ks obj. č. 505721 81 €**	90 €
Mini kit H+D 8 ks obj. č. 505743 36 €**	40 €
striekačky - 4x 1,2 ml obj. č. 501008 36 €**	40 €

CHEMICKO-ABRAZÍVNA PASTA PRE MINIMÁLNE-INVÁZÍVNE OŠETRENIE ZUBOV S FLUORÓZOU

Opalustre™

- Obsahuje 6,6% kyseliny chlorovodíkovej a mikročastice karbidu kremíka.
- Trvalo odstráni biele a hnedé škvrny z povrchu skloviny do hl. 0,2mm.
- Max. 4 aplikácie, každá po dobu 1 min.



PRED



PO

TIP

Ak sú škvrny na zuboch svetlé, skúste najskôr vybieliť. Na izoláciu mäkkých tkanív použite OpalDam – vid' katalóg Ultradent 2025 str. 22.



kit obj. č. 500554 187,20 €**	208 €
mini kit 2x 1,2ml + 20 kanýl obj. č. 505554 112,50 €**	125 €
refill - 4x 1,2 ml obj. č. 500555 134,10 €**	149 €

RETRAKTOR ÚST, PIER A JAZYKA

Umbrella™

- Dobre roztvorí pery pacienta, chráni jazyk.
- Umožní vám dobre vidieť aj v distálnom úseku chrupu.
- Spoločlivo drží, zvyšuje bezpečnosť ošetrovania.
- Pre pacienta je veľmi pohodlný, netlačí ani pri dlhšom ošetrovaní.

Ako zvoliť veľkosť Umbrelly?

- Ak pacient potrebuje veľkosť odtlačkovej lyžice 2-3, zvolte Umbrellu Medium.
- Ak pacient potrebuje veľkosť odtlačkovej lyžice 4-6, zvolte Umbrellu Large.
- Ak si nie ste veľkosťou istí, zvolte Umbrellu Large.



Skontrolujte, či jazyk pacienta pohodlne leží za chráničom, čo zaisťuje ľahký prístup.



Nedávajte chránič jazyka na hornú stranu jazyka pacienta.



Stredný roztvárač Umbrella, 40 ks obj. č. 505162 122,40 €**	136 €
Stredný roztvárač Umbrella, 20 ks obj. č. 504871 64,80 €**	72 €
Stredný roztvárač Umbrella, 5 ks obj. č. 504870 18 €**	20 €
Veľký roztvárač Umbrella, 40 ks obj. č. 505258 122,40 €**	136 €
Veľký roztvárač Umbrella, 20 ks obj. č. 505257 64,80 €**	72 €
Veľký roztvárač Umbrella, 5 ks obj. č. 505256 18 €**	20 €

PROVIZORNÁ SVETLOM TUHNÚCA ŽIVICA

J-Temp™

- Rádiopáka, svetlom tuhnúca, zatekavá provizorná živica na metakrylátovej báze.

KLINICKÉ INDIKÁCIE: 4 V 1



Dočasné výplne (endodontické, inlaye / onlaye, dostavba hrbolčekov, bielenie walking bleach).



Doplnenie zubnej štruktúry na upevnenie koferdamovej spony a ako bariéry proti endodontickým irigantom.



Dlahovanie medzi viacerými kapkami implantátu, pri odtlačkoch na zamedzenie deformácií odtlačkovacieho materiálu.



Frontálne zhryzy a dočasné zhryzové valy počas ortodontickej liečby, dočasné oklúzne dostavby v ortodoncii.



kit 4x 1,2 ml + 20 kanýl obj. č. 504897 48,60 €**	54 €
--	-------------

PRE HLBOKÚ HEMOSTÁZU

ViscoStat™

- Viskózný hemostatický koagulačný gél s **20% síranu železnatého**.
- Hĺbková aktívna hemostáza v priebehu niekoľkých sekúnd.
- Veľmi šetrný k tkanivám.
- Na každodenné použitie pri operatívnych zákrokoch, periodontálnom ošetrovaní, gingivektómii.
- Vynikajúci ako fixátor pri pulpotómii – alternatíva Formocresolu šetrnejšie ku tkanivám.



IndiSpense kit obj. č. 500647	90 €**	100 €
IndiSpense - 30 ml obj. č. 500645	63 €**	70 €
Intro kit - 4x 1,2 ml + 20 kanyl obj. č. 503093	33,30 €**	37 €

HEMOSTATICKÝ VISKÓZNY GÉL S 25 % CHLORIDU HLINITÉHO

ViscoStat Clear

- Transparentný gél pre **estetické zóny**.
- Na zastavenie slabšieho krvácania a sulkulárnych tekutín.
- Zostáva v sulku, nezanecháva rezíduá, nesteká.

Balenie:

- 506409 Intro kit: 4x 1,2 ml ViscoStat Clear + 20x kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub
- 506407 IndiSpense Kit: 1x 30 ml ViscoStat Clear + 20x kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub + 20x 1,2 ml prázdne striekačky
- 506408 IndiSpense: 1x 30 ml ViscoStat Clear



IndiSpense - 30 ml obj. č. 506408	72,90 €**	81 €
IndiSpense kit obj. č. 506407	103,50 €**	115 €
ViscoStat Clear intro kit obj. č. 506409	37,80 €**	42 €

VODNÝ HEMOSTATICKÝ ROZTOK S 12,7 % SÍRANU ŽELEZITÉHO A SUBSULFÁTOV

Astringent X™

- Pre špeciálne prípady ťažkého krvácania (pre hemofilikov, pacientov s Coumadinom a i.)
- Menej kyslý ako iné preparáty subsulfátov železa.



IndiSpense 30 ml obj. č. 500690	61,20 €**	68 €
Fľaštička 30 ml obj. č. 500112	63 €**	70 €
Refill - striekačky 20x 1,2 ml obj. č. 505881	135,30 €**	151 €

Dento-Infusor™ kanyly

Kanyla Metal Dento-Infusor Comfort Hub

- Tupá, zahnutá kanyla s chumáčikom na kefke umožňuje jemne pritlačiť do sulku.
- Aplikácia hemostatik, účinné odstraňovanie povrchového koagula. Dôkladná a rýchla hemostáza bez poranenia sulku. Vyvinie vyšší tlak.

Kanyla Blue Mini Dento-Infusor™

- Vhodnejšia pri aplikáciách na zabránenie tvorby sulkulárnych tekutín, pri väčšom tlaku ľahko pruží.
- Použitie: ViscoStat, ViscoStat Clear, Astringent X.
- Balenie: Kanyla MDI Comfort Hub 20 ks, 100 ks, 500 ks
- Kanyla Blue Mini DI 20 ks, 100 ks, 500 ks



kanyla MDI Comfort Hub - 100 ks obj. č. 504955	99 €**	110 €
kanyla MDI Comfort Hub - 20 ks obj. č. 504954	23,40 €**	26 €
Blue-mini kanyly 100 ks obj. č. 501086	122,40 €**	136 €
Blue-mini kanyly 20 ks obj. č. 500128	28,80 €**	32 €

SPLIETANÉ RETRAKČNÉ VLÁKNO

Ultrapak™

- Jednoduché zavedenie
- Vynikajúca absorpcia
- Bezkonkurenčná retrakcia



sada so stojanom, veľ. 00, 0, 1 a 2 obj. č. 509330	79,20 €**	88 €
č.000 - čierne, pre frontálne zuby obj. č. 509331	24,30 €**	27 €
č.00 - žlté, preparácie a cementovanie faziet obj. č. 509332	21,60 €**	24 €
č. 0 - fialové, dolné frontálne zuby a i. obj. č. 509333	19,80 €**	22 €
č. 1 - modré, retrakcia tkanív pri preparácii na korunku obj. č. 509334	19,80 €**	22 €
č. 2 - zelené, horné vlákno pri metóde dvoch vlákien obj. č. 509335	19,80 €**	22 €
č. 3 - červené, pre miesta so silnou gingivou obj. č. 509336	19,80 €**	22 €

ZAVÁDZAČ RETRAKČNÉHO VLÁKNA

Fischers Ultrapak™ Packer

- Špeciálne navrhnutý na zavádzanie spletených retrakčných vlákien Ultrapack.
- Tenké vrúbkované ostrie bráni zošmyknutiu vlákna.
- Menšia pravdepodobnosť poranenia mäkkých tkanív pri zavádzaní vlákna.
 - prevedenie 45° k rukoväti - najčastejšie používané
 - prevedenie 90° k rukoväti
- 2 veľkosti.

Balenie:

- Fischer´s Ultrapak Packer malý 45°
- Fischer´s Ultrapak Packer stredný 45°
- Fischer´s Ultrapak Packer malý 90°
- Fischer´s Ultrapak Packer stredný 90°



1 ks obj. č. 500171	79,20 €**	88 €
-----------------------	------------------	-------------

POLYKARBOXYLÁTOVÝ CEMENT BEZ EUGENOLU PRE PROVIZORNÉ FIXÁCIE / VÝPLNE

UltraTemp™

- Pre **krátkodobé** provizórne fixácie (korunky, inlaye): **1-2 týždne**.
- Dočasné zatvorenie kavity.
- **Dočasné uzavretie kavity pri endo bielení do dutiny zuba.**
- **Hydrofilný**-nespôsobuje citlivosť.
- **Bez eugenolu**, šetrný k pulpe - nedráždi.
- Výborne tesní - bráni prieniku baktérií.
- Pracovný čas: 2-3min.
- Ľahko ho odstránite.



1x 5 ml + 20 kanýl | obj. č. 505916 | **97,20 €****

108 €

PROVIZÓRNY HYDROFILNÝ CEMENT BEZ EUGENOLU NA ŽIVICOVEJ BÁZE

UltraTemp™ REZ II

- Na fixáciu provizórnych náhrad, ak je požadovaná dlhšia retencia (2-4 týždne).
- RTG kontrastné.
- Fluorescenčné-dobre viditeľný pod UV svetlom.
- Výborne tesní.
- Odoláva žuvacím silám a slinám (protetika dobre drží).
- Zloženie bez eugenolu nebude narušovať vážobnú silu.
- **Nevhodný v kombinácii s peroxidovými prípravkami!**



UltraTemp REZ II Fast Set Kit - exp. 28.02.2027 | **108 €** | obj. č. 506061

53 €

ZĽAVA

51%

JEDNORAZOVÉ MATRICE

Omni-Matrix™

- Rýchle, bezpečné, hygienické.
- Matrica s krídelkami – lepšia fixácia pozície.
- Matrica bez krídeliek – ľahké zavedenie klínku.
- Univerzálne, úzke, s kovovým pásikom.

- Kovové matrice s krídelkami/bez krídeliek: 48 ks v balení:
- oranžové - 6,5 x 0,025 mm
- zelené - 6,5 x 0,038 mm
- fialové - 5,2 x 0,038 mm



kovové - 48 ks | obj. č. 507701 | **125,10 €****

139 €

ŠOŠOVKY PRE VALO/ VALO GRAND

Zľava 10% pri nákupe aspoň 2 výrobkov**



Polymerizačné šošovky:

Bodové polymerizačné šošovky (priemer 2,5 mm):
(bodová polymerizácia kompozitu/cementu cez translucentnú protetiku napr. zaistenie pozície faziet, korúnok, oklúzií a i.). 2 šošovky v balení.

504082 – VALO Grand Cordless/ káblová **118,00 € 106,20 €****
505890 – VALO X **118,00 € 106,20 €****

ProxiBall šošovky:

vytvorí bod kontaktu pre matricu pri dostavbách II. tr. 2 šošovky v balení.

504081 – VALO Grand Cordless/ káblová **118,00 € 106,20 €****
505936 – VALO Cordless / káblová **110,00 € 99,00 €****
505889 – VALO X **118,00 € 106,20 €****

Nepolymerizačné, diagnostické šošovky:

Interproximálne šošovky: Transformujú modré svetlo na 1mm bod bieleho svetla. Pomáha zviditeľniť medzizubné kazy. 2 šošovky v balení.

504658 – VALO Grand Cordless/ káblová **122,00 € 109,80 €****
504629 – VALO Cordless/ káblová **109,00 € 98,10 €****
505893 – VALO X **122,00 € 109,80 €****

Transiluminčné šošovky:

presvetľujú zuby a dentálnu protetiku. Transformujú modré svetlo na žlté/červené spektrum a pomáhajú zviditeľniť praskliny alebo defekty v zuboch alebo výplniach. 2 šošovky v balení.

504084 – VALO Grand Cordless/ káblová **118,00 € 106,20 €****
505937 – VALO Cordless/ káblová **110,00 € 99,00 €****
505891 – VALO X **116,00 € 104,40 €****

Black Light šošovka (čierne svetlo):

Pomáha vizualizovať fluorescenčné materiály. 1 šošovka v balení.

504319 – VALO Grand Cordless/ káblová **97,00 € 87,30 €****
505939 – VALO Cordless / káblová **92,00 € 82,80 €****

White Light šošovka (biele svetlo):

Pomáha určiť presný odtieň/farbu kompozita, funguje ako aj prirodzené svetlo.

Transformuje modré svetlo na riadené biele svetlo 5000 K.
Na výborné prispôsobenie farby kompozita k farbe zubov.
504628 – VALO Grand Cordless/ káblová **122,00 € 109,80 €****

INDIKÁTORY KAZU A KALCIFIKOVANÝCH VSTUPOV DO KANÁLIKA

Sable™ Seek™

- Sfarbuje kazivý a demineralizovaný dentín.
- Umožňuje presné, bezproblémové dávkovanie.
- Tmavo zelená farba je ideálna pre prácu v blízkosti drene.



1. Demineralizovaný dentín po aplikácii Sable Seek.

2. Odstránenie kariózneho dentínu (tmavo zelená farba).

3. Kontrola odstránenia kazu pomocou Sable Seek.



Intro kit - 4x 1,2 ml + 20 kanýl | obj. č. 500233 | **104,40 €****

116 €

Refill - 4x 1,2 ml | obj. č. 500234 | **79,20 €****

88 €

Econo refill - 20x 1,2 ml | obj. č. 501805 | **291,60 €****

324 €

DENTÍNOVÝ LINER A BÁZA

Ultra-Blend™ Plus

- Svetlom aktivovaný, RTG kontrastný liner s hydroxidom vápenatým v uretan-dimetakrylátovej (UDMA) báze.
- Dokonalý materiál na prekrytie drene.
- Vynikajúce uvoľňovanie vápnika.
- Nerozpustí sa časom.
- Vysoko plnený.

TIP

Použite na prekrytie MTAFlow pri prekrytí pulpy pred zhotovením výplne.



kit | obj. č. 500415 | **108,90 €****

121 €

mini kit 2x 1,2 ml + kanyly | obj. č. 501016 | **59,40 €****

66 €

refill - 4 x 1,2 ml | obj. č. 500416 | **96,30 €****

107 €

NAJZATEKAVEJŠÍ FLOW KOMPOZIT NA TRHU

PermaFlo™

- Prvá vrstva pri zhotovení kompozitných výplní na dno kavity.
- Ideálny na **dostavby chrupu v pediatrii** a ošetrovanie mikrokavít.
- Na upevnenie transparentných inlejí, onlejí a faziet, priame fazety a výplne I.- V. triedy.
- **Prekrytie/maskovanie kovu a tmavých miest (PermaFlo Dentin Opaquer).**
- Svetlom tuhnúci, rádiopákný.
- Plnený zo 68 % nanočasticami o veľkosti 7 µm.



Rýchlo sa šíriace kazy u 3-ročného dieťaťa.



O jeden rok neskôr:



PermaFlo Dentin Opaquer: zakrytie kov a diskolorácie, je obzvlášť vhodný pri opravách keramických korúnok.



Dentin Opaquer - 2x 1,2 ml + 4 kanyly | obj. č. 501005 | **66,60 €****

74 €

A1, A2, A3, B1, - 2x 1,2ml + 4 kanyly | obj. č. 500947 | **68,40 €****

76 €

LEPTADLO S 35% KYSELINOU FOSFOREČNOU

Ultra-Etch™

- Samolimitujúca chémia leptá len do hl. **1,9µm**.
- Penetruje do najmenších fisúr, ale nesteká na vertikálnych povrchoch.
- Neobsahuje polyméry, nezanecháva rezíduá.
- Tixotropné, ľahko pretečie kanylou.
- Expiračná doba **48 mesiacov**.



Econo kit - 20x 1,2 ml + 40 kanýl | obj. č. 500167 | **141,30 €****

157 €

IndiSpense - 30 ml | obj. č. 500685 | **93,60 €****

104 €

Intro kit - 4x 1,2 ml + 20 kanýl | obj. č. 500163 | **55,80 €****

62 €

Refill - 20 x 1,2 ml | obj. č. 500168 | **117 €****

130 €